

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhed

Lumea IPL 7000
Series

5 manuelle
intensitetsindstillinger

1 tilbehør: krop

Lumea IPL-app

Brug med ledning



BRI920/00



Fantastiske resultater, fantastisk værdi

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud*

Opnå hårfri, glat hud med vores Lumea IPL 7000-serie. Behandlinger er nænsomme og effektive med tilbehør til hvert kropsområde.

Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv
- Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Komplet løsning til ansigt og krop

- 1 tilbehørsdel til krop
- Leveres med Satin Compact-pentrimmer
- Velegnet til en lang række hudfarver og hårfarver

Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Sensor for hudtone og 5 intensitetsindstillinger
- Optimer din rutine med Philips Lumea IPL-appen

Vigtigste nyheder

2x om måneden for hurtige resultater




Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 15 minut at dække begge underben.

Hudfarvesensor



Vælg mellem 5 intensitetsindstillinger for at få en behagelig oplevelse. Hudfarvesensoren forhindrer dig i at behandle områder af din hud, der er for mørke til IPL-behandling.

Ekstra langt kabel

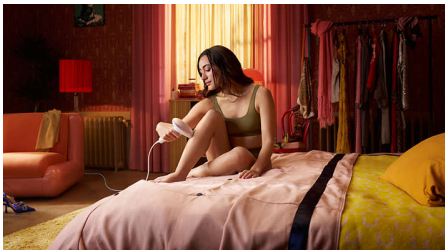


Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvrerdygtighed.

1 tilbehørsdel til krop




Tilbehøret til krop kan bruges til skånsom og effektiv behandling. Det brede behandlingsvindue er perfekt til hurtig behandling af større kropsområder som ben, arme og mave.

Udviklet i samarbejde med dermatologer

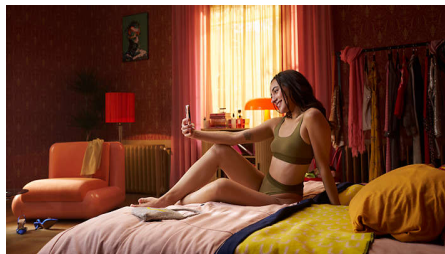

Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem, effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

Philips Lumea IPL-appen

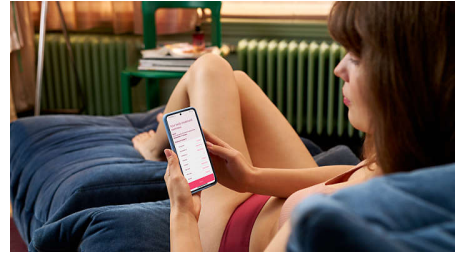

Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.

Satin Compact-pentrimmer



Fuldend din skønhedspleje: Satin Compact-trimmeren er et diskret skønhedsværktøj til brug på farten, der hurtigt og nemt fjerner selv de fineste ansigtshår.

Til mange hud- og hårtyper



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mellebrun (I-IV).

Specifikationer

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Programtilstand

Slide and Flash: For hurtig anvendelse

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Brug med ledning

Stamp and Flash: Til behandling på små områder

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Bygget til at holde, 250.000 blink, svarende til 20 års pærelevetid**

Spænding: 100-240 V

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti ved produktregistrering inden for 90 dage

Medfølgende dele

Instructions for use: Brugervejledning

Opbevaring: Skønhedsetui

Adapter: 24 V/1500 mA

Anvendelsestid

Underben: 15 min.

Under armene: 2,5 min.

Bikini line: 4 min

Face areas: 2 min

Tekniske specifikationer for tilbehør

Kropstilbehør: Vinduesstørrelse: 4,0 cm²,
Behandling af kroppen: ben, arme, mave og under armene



* Mediane hårreduktioner efter 12 behandlinger: 86 % på underben

** Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.