

PHILIPS

Aparat IPL za odstranjevanje
dlak s SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Senzor SmartSkin

3 pametni nastavki: telo, obraz,
natančni nastavek

Ekskluzivne funkcije v aplikaciji
na osnovi umetne inteligence

Brezžična in žična uporaba



BRI973/00



Naš najpametnejši aparat IPL z ekskluzivnimi funkcijami SkinAI

Uživajte v gladki koži brez dlačic kar 12 mesecev*

Odkrijte našo najpametnejšo rešitev IPL doslej za dolgotrajno gladko kožo. Naša najhitrejša brezžična naprava Lumea IPL s tehnologijo SenseIQ ima v paketu zdaj tudi ekskluzivne funkcije SkinAI v aplikaciji Lumea IPL za analizo kože in spremljanje napredka.

Nežno in učinkovito za dolgotrajno gladko kožo

- Hitri rezultati s tretmaji le na vsaka 2 tedna
- Brezžična in žična možnost za enostavno uporabo
- Razvito v sodelovanju z dermatologi za preprostost in učinkovitost

Celovita rešitev za obraz in telo

- Celovita rešitev za obraz in telo s 3 pametnimi nastavki
- Primerno za večino odtenkov kože in barv dlačic

Prilagojen tretma za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Nežno in udobno s tehnologijo SenseIQ
- Pametna analiza kože s tehnologijo SkinAI

Značilnosti

2 tretmaja na mesec za hitre rezultate




Začetna faza obsega 4 tretmaje le na vsaka 2 tedna, kar je pol manj kot pri drugih znamkah. Rezultate nato vzdržujte z mesečnim hitrim urejanjem.

Tehnologija SenseIQ



Aparat Lumea serije 9900 ima pet nastavitev svetlobe, ki jih je mogoče preprosto nastaviti. Senzor SmartSkin zazna vaš odtenek kože in vam pomaga najti najudobnejšo nastavitev. Inteligentni nastavitve prilagajajo tretma posameznemu predelu telesa.

Brezžična in žična možnost za enostavno uporabo

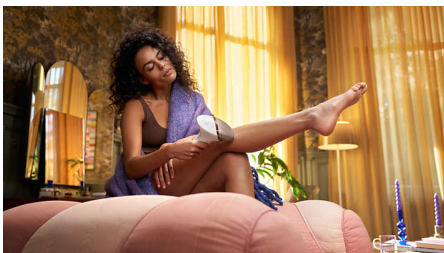

Naprava Philips Lumea je zasnovana tako, da je priročna in enostavna za uporabo. Napravo lahko uporabljate s kablom za hitro obdelavo

večjih predelov telesa, kot so noge, ali pa z brezžičnim baterijskim načinom za natančno obdelavo težko dostopnih predelov telesa.

3 pametni nastavitve




Posebej oblikovani nastavitve se popolnoma prilegajo oblinam vašega telesa in sprožijo najučinkovitejše programe za vsak predel telesa, ko so priključeni. Obraz: ploščata oblika in majhno okence z UV-filtru. Telo: navznoter ukrivljena oblika z velikim okencem. Natančnost: navzven ukrivljena zasnova za težko dostopne predele.

Razvito v sodelovanju z dermatologi



Kot vodilni proizvajalec na področju zdravstvene tehnologije je družba Philips razvila aparat Lumea IPL po posvetovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito domačo uporabo. Lumea IPL, ki izhaja iz tehnologije, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih, zagotavlja nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

Ekskluzivne funkcije SkinAI

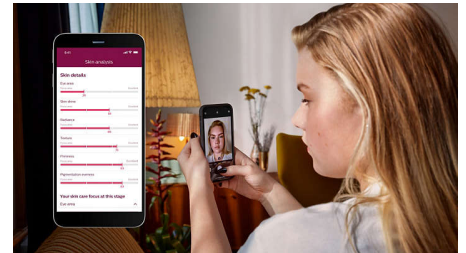

Naša brezplačna aplikacija z navodili zagotavlja navodila po korakih z ekskluzivno tehnologijo SkinAI za analizo vaše kože in sledenje zmanjšanju poraščenosti.

Za večino vrst kože in dlačic



Tehnologija IPL deluje na podlagi kontrasta med pigmentom v barvi dlačic in pigmentom v odtenku kože, zato najbolje deluje na naravno temnih dlačicah svetle, rjave in črne barve ter na odtenkih kože od svetlega do temno rjavega (I-V).

Specifikacije

Tehnični podatki za nastavke

Nastavek za telo: Oblika: konveksno zaobljeno, Velikost okenca: 4,1 cm², Prilagojen program za telo: noge, roke in trebuh

Nastavek za obraz: Oblika: ravna, Velikost okenca: 2 cm², dodaten filter, Prilagojen program za obraz: zgornja ustnica, brada in predel čeljusti

Nastavek za natančno oblikovanje: Oblika: konkavno zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm², Prirejen tretma za predele bikinija in pod pazduh

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filtr: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitve svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Senzor barve kože: Zazna kožni odtenek

Senzor SmartSkin: Pravi prikaz nastavitve na ukaz

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za hitro uporabo

Pritisni in osvetli: Za uporabo na manjših predelih

Žična/brezžična uporaba: Brezžična in žična uporaba

Tehnične specifikacije

Vrsta baterije: Polnilna baterija

Napetost: 100–240 V

Visokozmogljiva sijalka: Zdržljivo zasnovano za 450.000 osvetlitev, kar je enakovredno 39-letni življenjski dobi sijalke****

Servis

Garancija: 2 leti globalne garancije in 1 dodatno leto garancije ob registraciji izdelka v roku 90 dni

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik

Shranjevanje: Luksuzna torbica

Napajalnik: 19,5 V/4000 mA

Čas uporabe

Spodnji del noge: 8,5 min

Pazduhe: 2,5 min

Predel bikinija: 2 min

Deli obraza: 1,5 min



* Povprečno zmanjšanje poraščenosti po 12 tretmajih: 86 % na spodnjem delu nog, 70 % na predelu bikinija, 67 % pod pazduhami

* * Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.