

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

ProtectiveClean
4700

Sensor de presión incorporado

2 modos, 3 intensidades

1 x función BrushSync



HX6481



Encías más sanas con un cepillado suave.

Mejora la salud de las encías hasta un 100 % más que con un cepillo manual.

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión al mismo tiempo que mejoras la salud de las encías hasta un 100 % más en comparación con un cepillo manual.

Probado, mejora la higiene bucal

- Mejora la salud de las encías hasta un 100 %*
- Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales
- Blanquea los dientes en solo una semana

Diseñado para ti

- Fomentando un cepillado a fondo
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

Innovative technology

- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

Optimiza tu cepillado

- Dos modos y tres ajustes de intensidad


Destacados

Mejora la salud de las encías



Las cerdas de alta densidad y calidad ofrecen un cepillado extrasuave para eliminar la placa a lo largo de la línea de las encías y mejorar la salud de las encías hasta un 100 % más que un cepillo dental manual. Además, las potentes puntas especialmente curvadas llegan fácilmente a los dientes de la parte posterior de la boca.

Cepillado según tus preferencias

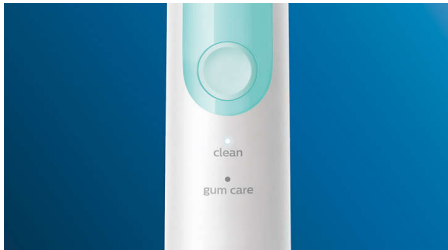

Este cepillo dental dispone de dos modos y tres intensidades para personalizar el cepillado. El modo Limpieza es el modo estándar para disfrutar de una limpieza superior y el modo Cuidado de las encías añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que puedas masajear suavemente las encías. Las tres intensidades te permiten deslizar el dedo de izquierda a derecha para alternar de mayor a menor intensidad.

Seguro y suave



Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con

ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

La única tecnología sónica verdadera




Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Controla la presión del cepillado



Cepillarse con demasiada fuerza puede dañar los dientes y las encías. Para evitarlo, el Philips Sonicare ProtectiveClean emite un suave sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión.

Tecnología BrushSync

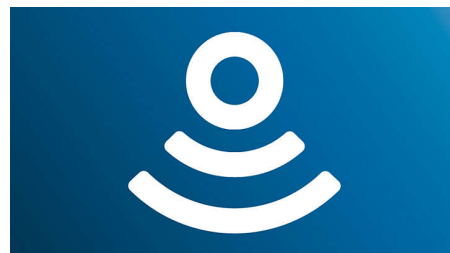


Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Pero nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto te avisará. Así, puedes estar seguro de que tus cabezales de cepillado funcionan correctamente.

Temporizadores útiles

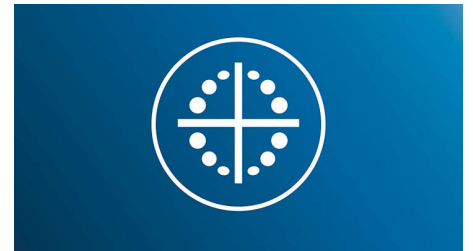

¿Necesitas un cepillo dental eléctrico con temporizador? Nuestro QuadPacer te permite saber cuándo has empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro SmartTimer te informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

Dientes más blancos de forma natural



Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco y menta

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Piezas incluidas

Cargador: 1

Cabezales: 30 Cuidado de las encías Premium G3, 30 Control antiplaca Premium C3

Mango: 1 ProtectiveClean

Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías, Ayuda a reducir las caries

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes en 1 semana

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Alta, Baja, Mediano

Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

