

PHILIPS

sonicare



Cepillo dental eléctrico
sónico: prueba

ProtectiveClean 4300

Sensor de presión incorporado

1 modo de limpieza

1 x función BrushSync



HX6848

Encías más sanas con un cepillado suave.

Mejora la salud de las encías hasta un 100 % más que con un cepillo manual

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión al tiempo que mejoras la salud de las encías hasta un 100 % más en comparación con un cepillo manual.

Probado, mejora la higiene bucal

- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Innovative technology

- Un empujoncito suave para un cepillado agradable y sencillo
- Los pacientes aprovechan al máximo los cabezales de cepillado
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

Improves patients' oral health

- Mejora la salud de las encías en hasta un 100 %*
- ¿Empastes, coronas o zonas sensibles? No te preocupes.

Designed around your patient

- La mejor manera de acostumbrarte a tu nuevo cepillo
- Fomentando un cepillado a fondo

ProtectiveClean 4300

Cepillo dental eléctrico sónico: prueba

HX6848/98

Destacados

Mejora la salud de las encías



Las cerdas de alta densidad y calidad ofrecen un cepillado extrasuave para eliminar la placa a lo largo de la línea de las encías y mejorar la salud de las encías hasta un 100 % más que un cepillo dental manual. Además, las potentes puntas especialmente curvadas llegan fácilmente a los dientes de la parte posterior de la boca.

¿Demasiada presión?



Es posible que los pacientes no se den cuenta de que se cepillan los dientes con demasiada fuerza, pero el cepillo dental sí. Si empiezan a tomarla con sus encías, el cepillo dental producirá un sonido intermitente para que reduzcan la presión.

Seguro y suave



Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

Tecnología Philips Sonicare



Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Recordatorios de sustitución inteligente



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Sin embargo, tenemos la solución: nuestra tecnología de reconocimiento de cepillado inteligente registra durante cuánto tiempo los pacientes han estado utilizando el cabezal de cepillado y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto avisará. Así, pueden estar seguros de que sus cabezales de cepillado funcionan correctamente todo el tiempo.


Tecnología BrushSync



Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal

inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

Temporizadores útiles

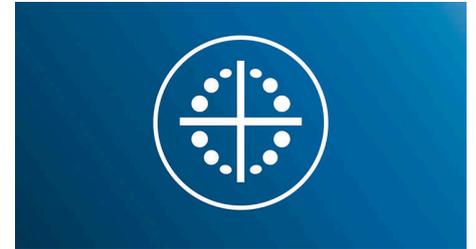

Nuestro Quadpacer permite a tus pacientes saber cuándo han empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro Smartimer informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

Programa Easy-Start



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un periodo de adaptación. Por eso, nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

ProtectiveClean 4300

Cepillo dental eléctrico sónico: prueba

HX6848/98

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo de energía: En espera sin pantalla <0,5 W

Diseño y acabado

Color: Azul medio claro

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Piezas incluidas

Mango: 1 ProtectiveClean

Cabezales: 1 Cuidado de las encías Premium G3, 1 InterCare estándar, 1 Blanqueamiento Optimal W2c compacto

Cargador: 1

Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas, Ayuda a reducir las caries

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

