

# PHILIPS

## sonicare

Електрическа звукова четка за зъби с приложение

DiamondClean Smart

Персонализирано обучение

Интелигентни сензори на главата

Интелигентно разпознаване на главата

4 режима, 3 степени на интензивност



HX9903/03



## Нашата най-добра четка за зъби за пълна грижа за устната кухина

### Чувствайте се уверени със 100% обхват

DiamondClean Smart е нашата най-добра четка за зъби за цялостна грижа. Четирите високоефективни глави на четката ви дават възможност да се фокусирате върху всички зони на здравето на устната кухина, а нашата технология с интелигентни сензори ви дава лична обратна информация и указания.

#### Доказано подобрява здравето на устата

- Премахва до 10 пъти повече плака\* за дълбоко почистване
- До 7 пъти по-здрави венци\* само за 2 седмици
- Премахва до 100% повече петна\*\* само за 3 дни

#### Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Насочва ви да измиете пропуснатите зони и ги маркира
- Връща ви обратно към всяко пропуснато място за 100% покритие
- Започнете да се грижите по-добре за вашите проблемни зони
- Предупреждава ви, ако натискате прекалено силно
- Насочва ви да намалите търкането

#### Optimize your brushing

- Главите на четката за зъби автоматично избират оптималните настройки
- Уверете се, че извличате максимума от вашата глава на четка за зъби
- Избирайте между 4 режима и 3 настройки на интензивност
- Зареждаща чаша Premium и калъф за пътуване


## Акценти

### Кажете сбогом на плаката




Поставете главата на четката за контрол на плаката C3 Premium, за да се насладите на нашето най-дълбоко почистване. С помощта на меките гъвкави страни косъмчетата се адаптират към формата на повърхността на всеки зъб за 4 пъти по-голям повърхностен контакт\*\*\* и премахва до 10 пъти повече плака от трудни за достигане зони\*.

### Грижа за вашите венци

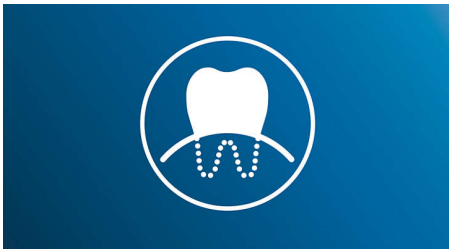

Поставете главата на четката за грижа за венците G3 Premium, за да подобрите здравето на венците си. Нейният малък размер и насочените към линията на венците косъмчета осигуряват нежно, но същевременно ефективно почистване по линията на венците, където започва заболяването на венците. Клинично е доказано, че осигурява до 100% по-малко възпаление на венците\* и до 7 пъти по-здрави венци само за две седмици.\*


### По-бели зъби, бързо

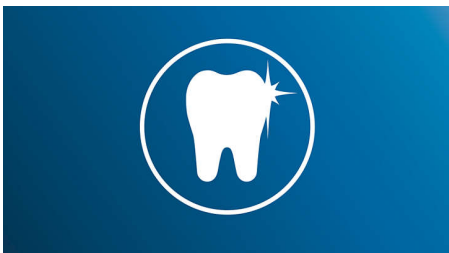

Поставете главата на четката за зъби W3 Premium White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята най-бяла усмивка. Клинично


доказано е, че със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна премахва до 100% повече петна само за три дни.\*\*

### Не пропускайте нито една зона

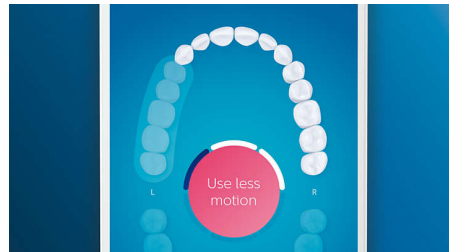


Приложението Philips Sonicare ви информира, когато сте постигнали цялостно почистване и ви инструктира как да бъдете по-добри и по-внимателни с четката.

### Функция TouchUp

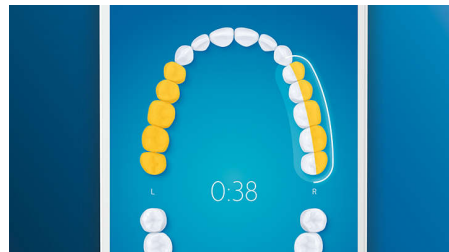


Ако пропуснете място, докато миете зъбите си, функцията TouchUp на приложението ще ви покаже. След това можете да се върнете за второ минаване и да сте уверени, че всеки път ще се насладите на пълно почистване.

### Зона на фокусиране и настройка на цел

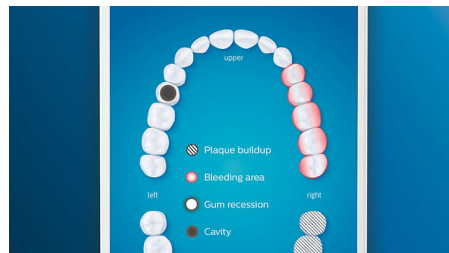

Някакви проблемни зони, посочени от вашия зъболекар? Ще ги маркираме в 3D картата на устата ви във вашето приложение и ще ви напомним да обърнете специално внимание на тези зони.

### Прекалено голям натиск?

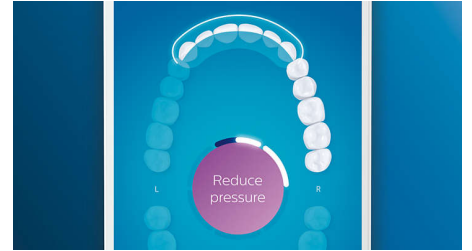

Възможно е да не забележите, когато натискате четката прекалено силно, но вашият DiamondClean Smart ще забележи. Ако използвате прекалено голям натиск, светлинният пръстен в края на дръжката ще започне да мига. Това е нежно напомняне да намалите натиска и да оставите главата на четката за зъби да си свърши работата. 7 от 10 души смятат, че тази функция ги е направила по-добър потребител на четка.

### С лекота



С електронната четка за зъби вие оставяте четката да свърши работата. Ние сме вградили сензор за търкане в дръжката като нежно напомняне да намалите търкането. По този начин можете да подобрите техниката си и да се насладите на по-нежно и по-ефективно почистване.

# Спецификации

## Възможности за свързване

**Безжична технология Bluetooth®:** Свързано приложение за почистване

## Захранване

**Напрежение:** 110 – 220 V

## Технически спецификации

**Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване):** 14 дни\*\*\*\*\*

**Батерия:** Акумулаторна

**Тип батерия:** Литиево-йонна

## Дизайн и покритие

**Цвят:** Бяло

## Сервиз

**Гаранция:** 2 години ограничена гаранция

## Съвместимост

**Съвместимост с Android:** Телефони с Android, Таблети с разрешен Bluetooth 4.0

**Съвместимост с iOS:** Трето поколение iPad или по-нов, iPhone 4S или по-нов, с iOS7 или по-нова

## Лесна употреба

**Индикатор за батерията:** Светещата икона показва състоянието на батерията

**Съвместимост на дръжката:** Лесно поставяне на

главите с щракване

**Дръжка:** Тънък и ергономичен дизайн

**Дисплей:** Осветен дисплей

**Разпознаване на главата на четка:** Синхронизира се в оптимален режим

**Напомняне за замяна:** За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

## Включени в комплекта

**Дръжка:** 1 DiamondClean Smart

**Калъф за пътуване:** Калъф за пътуване Premium

**Глави за четка:** 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

**Зареждаща чаша:** 1

## Работни показатели при почистване

**Лечебен ефект:** До 7 пъти по-здрави венци\*\*\*\*

**Скорост:** До 62 000 движения на четката/мин

**Работни характеристики:** Отстранява до 10 пъти повече плака\*

**Таймер:** BrushPacer и SmartTimer

**Предимства на избелването:** До 100% по-малко петна\*\*\*\*\*

**Обратна връзка при натиск:** Пръстенът светва в лилаво, Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

**TouchUp:** Гарантира 100% покритие

## Режими

**3 степени на интензивност:** Високо, Средно, Ниски

**Clean:** За изключително ежедневно почистване

**Deep Clean+:** За освежавашо дълбоко почистване

**Gum Health:** Специално внимание към кътниците

**White+:** За премахване на повърхностни петна

## Сдвояване в режим BrushSync

**C3 Контрол на плаката Premium:** Сдвояване в режим Clean

**G3 глава на четка за грижа за венците Premium:**

Сдвоява се в режим Gum Health

**W3 глава на четка Premium White:** Сдвояване в режим White+

## Технология с интелигентен сензор

**Сензор за натиск:** Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

**Сензор за местоположение:** Проследява и подобрява покритието

**Сензор за търкане:** Указва за намаляване на търкането

**3D карта на устата:** Маркира проблемните зони

**TouchUp:** За справяне с пропуснати зони

**Сензор за позиция:** Ръководства за области, които сте пропуснали



\* Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби

\*\* в сравнение с ръчна четка за зъби с водеща паста за зъби за избелване

\*\* в сравнение с DiamondClean

\*\*\* при режим Gum Health в сравнение с ръчна четка за зъби при 2 седмици

\*\*\*\* след 3 дни на използване в режим White+ в сравнение с ръчна четка за зъби

\*\*\*\*\* въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в стандартен режим