

PHILIPS

sonicare



フィリップス ソニックケア
コードレスパワーフロッサー

Sonicare Cordless Power
Flosser 3000

X 型水流で広範囲の歯垢を除去
歯間移動ガイド機能付き



HX3826/34

X（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル。

デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去*1 *1強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時 / フロスと手磨きを併用した場合と比べ（個人差があります）

ソニックケア コードレスパワーフロッサー3000は、X 型水流の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流します。2つのモードと3段階の強さから選べ、さらにタンク部分を取り外して洗うことができ清潔に保つことができます。お風呂でも使用可能。■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてください

簡単かつ便利

- USB充電ケーブルを使用した充電方式
- 給水しやすい約 250ml タンク
- 使い方は簡単
- ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去

より速く、より効果的なフロス

- 2つのモード、3段階の強さ設定
- 360度回転するノズル
- 歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ
- 効果的に短時間で洗浄できる X 型水流

最新テクノロジーで簡単に洗浄

- カドストリームテクノロジー：歯肉縁下の歯垢を除去

Sonicare Cordless Power Flosser 3000

フィリップス ソニックアー コードレスパワーフロッサー

HX3826/34

特長

効果的に短時間で洗浄できる X 型水流



X 型の 4 方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかりと除去。簡単に早く洗浄できます。

歯ぐきの下からしっかりきれいに



カドストリームテクノロジーが、6mm もの深い歯周ポケットから歯垢を最大 99% 除去します。

歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ



一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるので、その間に次の歯間ノズルを移動させることができます。（ディープクリーンモードのみ）

2つのモード、3段階の強さ設定



クリーンモード（標準水圧）とディープクリーンモード（一定間隔で強弱をつけた水流・歯間移動ガイドあり）の2つからモードを選べます。また、強さも3段階からお好みで選べます。

360 度回転するノズル



ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。

USB充電ケーブルを使用した充電方式




USB充電ケーブルを使用して簡単に充電。満充電で約3週間ご使用いただけます。（1日1回1分間使用した場合）

給水しやすい約 250ml タンク



約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。タンクを回して取り外すことで、水が簡単に補充でき、タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。（タンクを外さなくても、サイドの注水口からも水が補充できます。）

使い方は簡単

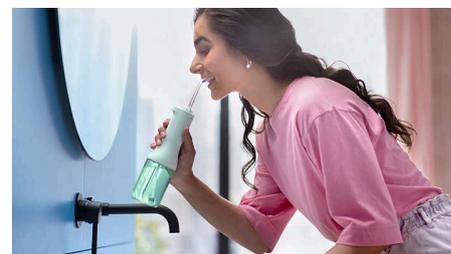

ノズルの先端を歯の間に当て、歯ぐきに沿ってスライドさせながら使います。当てるだけで歯間をしっかりと効果的に洗浄できます。

ジェット水流で歯間の汚れを除去



スタンダードノズルを搭載し、ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢を気になるところにピンポイントでスッキリ除去します。

Sonicare Cordless Power Flosser 3000

フィリップス ソニックアークコードレスパワーフロッサー

HX3826/34

仕様

電源

対応電圧: AC 100-240V (海外電圧対応)

デザインと仕上げ

色: ミント

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ハンドル: スリムなデザイン

ノズル装着方式: はめ込み式

性能

クリーニング: クリーンモード(標準水圧で洗浄するモード)、ディープクリーンモード(一定間隔で水圧に強弱をつけて洗浄するモード)

内容・付属品

F1 スタンダードノズル: 1

F3 カドストリームノズル: 1

トラベルバッグ: 1

USB 充電ケーブル: 1

USB電源アダプター: 1

ソニックアークコードレスパワーフロッサー: 1

モード

クリーン: 標準水圧での洗浄

ディープクリーン: 一定間隔で水圧に強弱をつけて洗浄

強さ: 3段階

健康上の利点

歯垢の除去: 対象エリアの歯垢を除去

歯肉縁下: 歯肉縁下の歯垢を最大 99%除去**

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

* -

**6mm の歯周ポケット模型の最深部 2mm において (実際の口内の結果は異なる場合があります)

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-04-15
バージョン: 5.5.1

EAN: 87 20689 01116 7

www.philips.com