

PHILIPS

sonicare



Mundusch

Trådlös Power Flosser 3000

Tar bort upp till 99,9 % av placken

2 tandtrådslägen, 3
intensitetsnivåer

Fullständig rengöring på 60
sekunder

250 ml behållare



HX3826/31

Tandtrådsanvändning på ett nytt sätt med QuadStream-teknik

Tar bort upp till 99,9 % av placken* i behandlade områden

Smidig och noggrann rengöring mellan tänderna för att få friskare tandkött. Unik Quad Stream-spets rengör ett större område enklare för en effektivare rengöring mellan tänderna varje gång, så det blir enkelt att göra rätt.

Easy and convenient

- Snabb universell laddning med USB-A till liten kontaktkabel
- 250 ml behållare som är lätt att fylla på
- Enkel teknik
- Standardspets för punktrensning

Faster, more effective flossing

- 2 tandtrådslägen, 3 intensitetsnivåer
- Fullständig rengöring på 60 sekunder
- Pulse Wave-tekniken leder dig från tand till tand
- Quad Stream-teknik för snabbare, effektivare tandtrådsanvändning

An effortless clean with advanced technology

- Quadstream-teknik: Tar bort plack nedanför tandköttskanten

Funktioner

Quad Stream-teknik



Unik X-formad Quad Stream-spets separerar flödet i fyra vattenstrålar som täcker ett större område mellan tänderna och längs tandköttskanten. Få en snabbare och djupare rengöring utan krångel med tandtråd.

Rengör nedanför tandköttskanten



Quadstream-tekniken tar bort upp till 99 % av placken från 6 mm djupa parodontala fickor.

Pulse Wave-teknik




Skonsamma vattenpulser vägleder dig från tand till tand i djuprengöringsläget – så att det blir rätt varje gång.

2 lägen, 3 intensitetsnivåer



Välj den rengöring som passar ditt leende. Rengöringsläget ger ett kontinuerligt flöde för effektiv daglig rengöring. Djuprengöringspulser ger en mer noggrann rengöring. Justerbar intensitetsnivå anpassas för komfort.

Fullständig rengöring på 60 sekunder

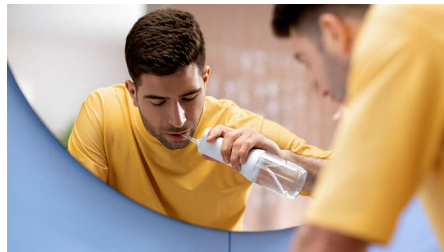

Kom åt svåråtkomliga ställen med ett munstycke som roterar 360 grader så att du kan använda enheten i alla riktningar. Få en grundlig 360°-rengöring på bara 60 sekunder från start till slut.

Snabb laddning med USB-A till liten kontaktkabel




Smidig laddning med USB-A till liten kontaktkabel. Du kan rengöra i upp till 14 dagar på bara en laddning.

250 ml behållare




Behållarens kapacitet på 250 ml rymmer tillräckligt med vatten för en rekommenderad 60-sekunders rengöring. Vrid och ta loss eller använd sidoluckan för enkel påfyllning.

Enkel teknik

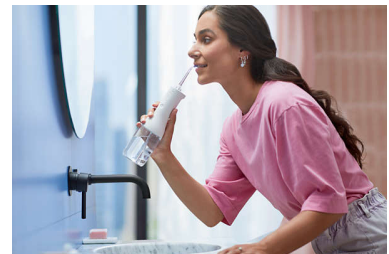

Peka, tryck och rengör för effektivare rengöring mellan tänderna. Rikta spetsen mellan tänderna och längs tandköttskanten – och låt den göra jobbet åt dig!

Standardspets för punktrensning

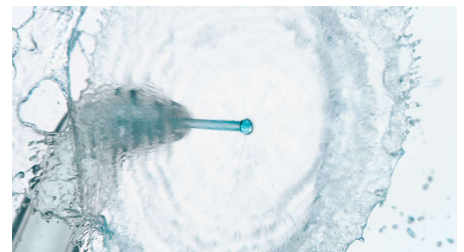

En standardspets med en ström ökar trycket för punktrensning och borttagning av matrester när du behöver det.

Specifikationer

Effekt

Spänning: Flerspänningsladdare

Design och finish

Färg: Vit

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Munstycke: Lätt klicka fast och ta bort

Prestanda

Rengöring: Rengör hela munnen på 60–90 sekunder

Medföljande tillbehör

F1 Standardmunstycke: 1

F3 Quad Stream-munstycke: 1

Resefodral: 1

USB-laddningskabel: 1

USB-väggadapter: 1

Sonicare Cordless Power Flosser: 1

Lägen

Rengöra: För en noggrann daglig rengöring

Djuprengöring: För en djuprengöring mellan tänderna

Intensitetsnivåer: 3 nivåer

Hälsofördelar

Subgingival: Tar bort upp till 99 % av placken nedanför tandköttskanten**

