

Philips Sonicare Draadloze  
Power Flosser 3000  
Waterflosser - Zwart

Verwijdert tot 99,9% tandplak  
Volledige reiniging in 60 seconden  
2 flosstanden, 3 sterktes  
Snel universeel opladen met USB-  
A naar Small Plug kabel



HX3826/33

## Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

Verwijdert tot 99,9% tandplak\* van behandelde delen

Reinig uw tanden grondig en moeiteloos voor gezond tandvlees. De unieke Quad Stream-tip reinigt meer plekken in uw mond met minder moeite. Flossen wordt iedere keer simpeler en effectiever.

### Gebruiksvriendelijk en handig

- Eenvoudig vulbaar reservoir van 250 ml
- Moeiteloze techniek
- Snel universeel opladen met USB-A naar Small Plug kabel
- Standaardpunt voor gerichte reiniging

### Sneller en effectiever flossen

- 2 flosstanden, 3 sterktes
- Volledige reiniging in 60 seconden
- Pulse Wave-technologie begeleidt u van tand tot tand
- Quad Stream-technologie voor sneller en effectiever flossen

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Waterflosser - Zwart

Verwijdert tot 99,9% tandplak Volledige reiniging in 60 seconden, 2 flosstanden, 3 sterktes, Snel universeel opladen met USB-A naar Small Plug kabel

# Kenmerken

### Quad Stream-technologie



De unieke X-vormige Quad Stream-tip scheidt de waterstroom in 4 stralen, die een groter gebied tussen de tanden en langs de tandvleesrand bereiken. Sneller en grondiger reinigen zonder flosdraad.

### Pulse Wave-technologie



Zachte waterpulsen leiden u in de Deep Clean-modus van tand tot tand, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.

### 2 poetsstanden, 3 sterktes



Kies de reiniging die bij uw glimlach past. De Clean-modus zorgt voor een continue waterstroom voor effectieve dagelijkse reiniging. Deep Clean-pulsen voor een


grondigere reiniging. Het instelbare intensiteitsniveau past zich aan voor comfort.

### Volledige reiniging in 60 seconden



U bereikt moeilijk te bereiken gebieden met een mondstuk dat 360 graden draait, zodat u het apparaat in elke richting kunt gebruiken. Geniet van een grondige 360-reiniging in slechts 60 seconden van begin tot eind.

### Snel opladen met USB-A naar Small Plug kabel

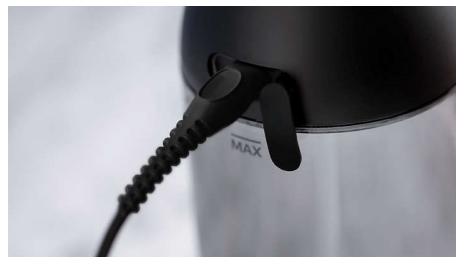

Handig opladen met USB-A naar Small Plug kabel. Je kunt tot 14 dagen schoonmaken met één keer opladen.


HX3826/33

### Reservoir van 250 ml.




Het reservoir met een inhoud van 250 ml kan voldoende water bevatten voor een aanbevolen reiniging van 60 seconden. Eenvoudig vastdraaien en verwijderen, of gebruik de zijklep voor eenvoudig bijvullen.

### Moeiteloze techniek

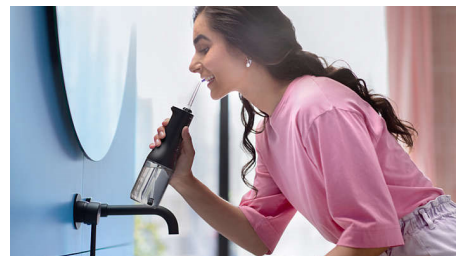

Eenvoudig richten, drukken en reinigen voor effectiever flossen. Richt de punt tussen uw tanden en langs het tandvlees, en laat het al het werk voor u doen!

### Standaardpunt voor gerichte reiniging

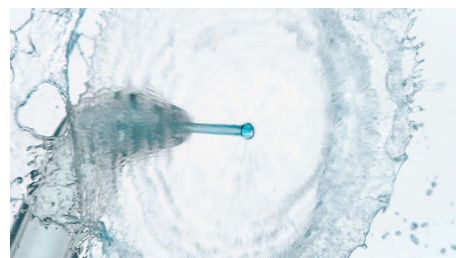

Een standaardpunt met één stroom verhoogt de druk voor een gerichte reiniging en het verwijderen van voedselresten wanneer dat nodig is.

## Waterflosser - Zwart

Verwijdert tot 99,9% tandplak Volledige reiniging in 60 seconden, 2 flosstanden, 3 sterktes, Snel universeel opladen met USB-A naar Small Plug kabel

# Specificaties

### Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

### Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

### Gebruiksgemak

- Handvat: Slang, ergonomisch design
- Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

### Prestaties

- Reiniging: Reinigt de hele mond in 60-90 seconden

### Meegeleverde artikelen

- Draadloze Power Flosser: 1
- F1 standaardmondstuk: 1

- F3 Quad Stream-opzetstuk: 1

- Reistas: 1
- USB-oplaadkabel: 1
- USB-muuradapter: 1

### Poetsstanden

- Clean: Voor een grondige, dagelijkse reiniging
- Intensiteiten: 3
- Deep Clean: Voor diepe reiniging tussen de tanden

### Gezondheidsvoordelen

- Verwijdering van tandplak: Verwijdert tot 99% tandplak van behandelde delen\*

### Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart



Publicatiedatum  
2024-02-28

Versie: 6.6.1

EAN: 87 20689 01115 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* In een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren.