

PHILIPS

Overhålt IPL-
hårfjerningsenhet

Lumea IPL 8000
Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehør: kropp,
ansikt, bikini, armhuler

Lumea IPL-app

Bruk med ledning



BRI947/00R1

Skreddersydd for deg med SenseIQ

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Gled deg over rask og personlig behandling med vår Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-teknologi med smarte tilbehør og Lumea IPL-app for langvarig glatt hud.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv
- Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsdeler
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Overhålt Lumea-IPL

- Samme resultater, bedre for miljøet

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenseIQ
- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Høydepunkter

Overhalt Lumea-IPL



Vi liker å gjenbruke returnerte produkter og gi dem et nytt liv, ettersom materialene og delene vi bruker til å lage dem, har størst påvirkning på CO2-utslippene. Hvis du velger overhalt fremfor ny, reduseres karbonavtrykket med 78 %.**

2 ganger i måneden for raske resultater



Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

SenseIQ-teknologi



Lumea 8000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen din og hjelper deg med å finne den

mest komfortable innstillingen. Det intelligente tilbehøret tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

Ekstra lang kabel



Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

Fire smarte tilbehørsdeler



Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filer. Kropp: Buett innover med et stort vindu. Bikini og armhule: Buett utover for områder hvor det er vanskelig å komme til.


Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den

hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Philips Lumea IPL-appen

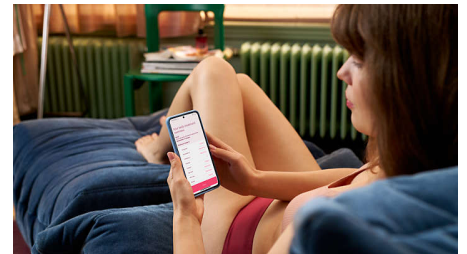

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

Tilbehør for bikinibehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for følsomt bikiniområde

Tilbehør for underarmbehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for armhuler

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til

hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

SmartSkin-probe: Få rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Bruk med kabel / trådløs bruk: Bruk med ledning

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Sminkeveske

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Underarmer: 2,5 min

Bikini linje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

Legger: 8,5 min



* Median for hårreduksjon etter 12 behandlinger: 86 % på leggene, 70 % på bikini, 67 % på armhulene
** Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikini linje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti
*** Omfatter: produkt, emballasjematerialer og Philips omvendt returlogistikk for Lumea S8000. Omfatter ikke: kjemikalier, energi til repressering, transport av innkommende deler og materialer. Beregning basert på ReCiPe2016 og ecoinvent3.6-databasen, med antakelse om at alt tilbehør, adaptere og emballasje må erstattes.