

PHILIPS



Refurbished IPL-
ontharingsapparaat

Lumea IPL 8000
Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente opzetstukken:
lichaam, gezicht, bikini, oksels

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer



BRI949/00R1

Persoonlijke behandeling met SenseIQ

Geniet 12 maanden lang van een haarloze, gladde huid*

Geniet van een snelle en persoonlijke behandeling met onze Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-technologie met slimme opzetkoppen en Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 4 slimme opzetstukken
- Verkrijgbaar met Satin Compact-pentrimmer
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

Gereviseerde Lumea IPL

- Dezelfde resultaten, beter voor het milieu

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Zacht en comfortabel met SenseIQ
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Lumea IPL 8000 Series

Refurbished IPL-ontharingsapparaat

Kenmerken

Gereviseerde Lumea IPL



We houden ervan om geretourneerde producten te hergebruiken en ze een tweede leven te geven, omdat de materialen en onderdelen die we gebruiken om ze te maken de grootste CO2-impact hebben. Door te kiezen voor gereviseerde producten in plaats van gloednieuwe, verminderen we de CO2-voetafdruk met 78%.***

2x per maand voor snelle resultaten



Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

SenselQ-technologie



Lumea 8000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortabele instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandeling aan voor elke lichaamszone.

Extra lange kabel



Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

4 slimme opzetstukken



Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster. Bikini en oksel: Naar buiten gebogen voor moeilijke bereikbare plaatsen.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen




Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van

BRI949/00R1

technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Philips Lumea IPL-app

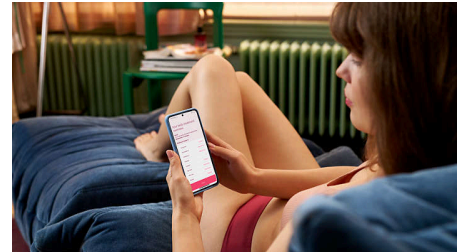

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Satin Compact-pentrimmer



Voltooi uw schoonheidsroutine: de Satin Compact-pentrimmer is een discreet beauty-hulpmiddel om onderweg snel en eenvoudig zelfs de fijnste gezichtsbehaaring te verwijderen.

Voor de meeste huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot donkerbruin (I-V).

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen, Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat, Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde behandeling voor het gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

Opzetstuk voor bikinilijn: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde behandeling voor gevoelige bikinilijn

Opzetstuk voor de oksels: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde onderarmbehandeling

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat

het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft
SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Met of zonder snoer te gebruiken: Gebruik met snoer

Technische specificaties

Spanning: 100-240 volt

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 450.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 39 jaar**

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Opbergetui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Onderbenen: 8,5 min.

Pentrimmer

Gebruiksgemak: Compact handvat

Vermogen: AAA-batterij

Accessoires: Wenkbrauwkam,

Reinigingsborsteltje



* Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 86% op benen, 70% op bikinilijn, 67% op oksels
** Bij volgen van het behandelingschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet
*** In scope: product, verpakkingsmateriaal en omgekeerde logistiek van Philips voor retouren van Lumea S8000. Buiten scope: chemicaliën, energie die nodig is voor opwerking, inkomend onderdeel en materiaaltransport. Berekening gebaseerd op ReCiPe2016 en ecoinvent3.6 database, ervan uitgaande dat alle accessoires, adapter en verpakking vervangen moeten worden.