

PHILIPS

Refurbished IPL-
ontharingsapparaat

Lumea IPL 8000
Series

SmartSkin-sensor

2 intelligente opzetstukken:
lichaam, gezicht

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer



BRI945/OOR1



Persoonlijke behandeling met SenseIQ

Geniet 12 maanden lang van een haarloze, gladde huid*

Geniet van een snelle en persoonlijke behandeling met onze Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-technologie met slimme opzetkoppes en Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 2 slimme opzetstukken
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

Gereviseerde Lumea IPL

- Dezelfde resultaten, beter voor het milieu

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Zacht en comfortabel met SenseIQ
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Kenmerken

Gereviseerde Lumea IPL



We houden ervan om geretourneerde producten te hergebruiken en ze een tweede leven te geven, omdat de materialen en onderdelen die we gebruiken om ze te maken de grootste CO₂-impact hebben. Door te kiezen voor gereviseerde producten in plaats van gloednieuwe, verminderen we de CO₂-voetafdruk met 78%.***

2x per maand voor snelle resultaten



Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

SenseIQ-technologie



Lumea 8000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest

comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandeling aan voor elke lichaamszone.

Extra lange kabel



Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

2 slimme opzetstukken



Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster.


Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen



Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen,

voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Philips Lumea IPL-app

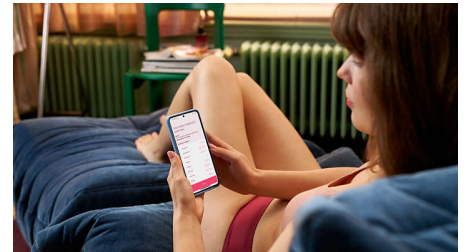

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Voor de meeste huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot donkerbruin (I-V).

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen,
Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde
lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat,
Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde
behandeling voor het gezicht: bovenlip, kin en
kaaklijn

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid
tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt

dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het
juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Gebruik met
snoer

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine
zones

Technische specificaties

Spanning: 100-240 volt

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam,
450.000 pulsen, gelijk aan een levensduur
voor de lamp van 39 jaar**

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar
extra garantie bij productregistratie binnen 90
dagen

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Opbergetui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Onderbenen: 8,5 min.



* Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12
behandelingen: 86% op benen, 70% op bikinilijn, 67% op
oksels

** Bij volgen van het behandelingschema. Berekend voor
gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De
levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende
wereldwijde garantie van Philips niet

*** In scope: product, verpakkingsmateriaal en
omgekeerde logistiek van Philips voor retouren van
Lumea S8000. Buiten scope: chemicaliën, energie die
nodig is voor opwerking, inkomend onderdeel en
materiaaltransport. Berekening gebaseerd op
ReCiPe2016 en ecoinvent3.6 database, ervan uitgaande
dat alle accessoires, adapter en verpakking vervangen
moeten worden.