

PHILIPS

sonicare

Power Toothbrush
Special Edition

DiamondClean
9000 Series

A csatlakoztatott alkalmazás
nyomon követi a folyamatot

Beépített nyomásérzékelő

Intelligens kefefej-felismerés

4 üzemmód, 3 intenzitási szint



HX9911



Erőfeszítés nélküli fehér mosoly

Fehérebb fogak már 3 napon belül*

Kezdje stílusosan a mindennapokat a fejlett Sonicare technológiával, amely segít a fehérebb fogak elérésében és a szájhygiéna fenntartásában. Kíméletes az ínyéhez, valamint a kapcsolt alkalmazáshoz csatlakozva tanácsokat kaphat és nyomon követheti fogai ápolását. Válasszon a 4 üzemmód és a 3 intenzitási szint közül a személyre szabott fogmosáshoz!

Fehérebb fogak és jobb szájápolás

- Kemény a fogkövel, gyengéd az ínyvel

Igazodik az igényeihez

- 4 üzemmód és 3 intenzitási szint a személyre szabott fogmosási élményért

Igazodik az igényeihez

- A nyomásérzékelő figyelmeztet a túl erős rányomás esetén
- A BrushSync automatikusan kiválasztja az Önnek legmegfelelőbb üzemmódot

Kövesse nyomon az előrehaladását a személyre szabott jelentéssel

- Sonicare alkalmazás coachinghoz és előrehaladási jelentésekhez

Stílusos, felhasználóbarát kialakítás

- Stílusos kialakítás a páratlan fogmosási élményért

Fénypontok

Fehébb fogak már 3 napon belül*



Fokozza mosolya ragyogását a fejlett Sonicare technológiával. A polírozó sörték akár 100%-kal több szennyeződést távolítanak el, mint egy kézi fogkefe, így a fogak már 3 nap alatt láthatóan fehérebbek lesznek*.

Kíméletes a fogínyhez



A C3 Premium Plaque Control kefefejet úgy tervezték, hogy az eddigi legalaposabb tisztítást végezze. A puha, rugalmas oldalak és sörték tökéletesen követik a fogak körvonalát, így 4-szer nagyobb felülettel érintkeznek, és a nehezen elérhető helyeket is segítenek megtisztítani***

Páratlan fogmosási élmény




DiamondClean 9000 készülékünk kiemelkedő ombr dizájnnal rendelkezik, hogy prémium minőségű, ergonomikus fogmosási élményt nyújtson, amely megfelel az Ön stílusának. A vékony, kompakt, kiegészítő színű utazótok bárhová elkíséri.

Speciális Sonicare technológia



Az erőteljes hangrezgések percenként 62 000 mozgást végeznek, hogy a lepedéktávolító buborékokat a fogak közé és az ínyvonal mentén terelje. Akár 10-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe.

4 üzemmód / 3 intenzitási szint

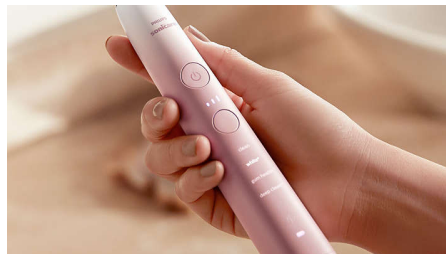

Válasszon a 4 fogmosási üzemmód közül: a Clean a kivételes mindennapi tisztításhoz, a White+ a ragyogó mosolyhoz, a Gum Health a gyengéd, de hatékony tisztításhoz, a Deep Clean+ pedig az élénkítő mélytisztításhoz használható. Az alacsony és magas közötti három intenzitásfokozatot lehetővé teszi a teljesítmény fokozását vagy az érzékeny íny ápolását.

Beépített nyomásérzékelő



Talán még Ön sem veszi észre, hogy túl erősen mossa a fogát, de a DiamondClean 9000 ezt is észleli. Ha csökkentenie kell a nyomást, a fogkefe pulzáló hangot fog kiadni. Ekkor hagyja, hogy a fogkefefej végezze a munkáját.

BrushSync automatikus párosítás



Az intelligens kefefejek garantálják, hogy Ön a lehető legjobb tisztítás eléréséhez megfelelő üzemmódot és intenzitást használja. Ha C3 Premium Plaque Control kefefejet használ. A DiamondClean 9000 BrushSync technológiája automatikusan szinkronizálja a fogkefefejet a Clean móddal, így segít fehériteni fogait.

Sonicare alkalmazás



A DiamondClean 9000 útmutatást nyújt Önnek az egészséges fogmosási szokások javításához és fenntartásához. A beépített intelligens érzékelők tudatják, ha túl nagy nyomást fejt ki, és a fogmosási Sonicare alkalmazással történő követésével hozzáfér a folyamatjelentéshez is, amely segít nyomon követni, hogy mennyit fejlődött az idő múlásával.

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

Bluetooth® vezeték nélküli technológia:
Fogmosási alkalmazás

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 14 nap***

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Szaténrózsaszín-fehér színátmenet

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android telefonok,
Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek

iOS-kompatibilis: 3. generációs iPad vagy
újabb, iPhone 4S vagy újabb, iOS7 vagy újabb
operációs rendszerrel, iOS7 operációs
rendszerrel

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen
rápattintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Csere-émlékeztető: Így mindig a legjobb
eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon
világítani kezd

Tartozékok

Utazótok: 1

Kefefejek: 1 C3 Premium Plaque Control

Markolat: 1 DiamondClean 9000

Töltődokkoló és korong: 1

Fogmosási teljesítmény

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket
távolít el*

Időzítő: BrushPacer és SmartTimer

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével
figyelmezteti a használat

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

3 intenzitási szint: Magas, Közepes, Alacsony

Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért

Egészséges íny: Különös figyelemmel az
órlőfogakra

White+: A felületi lerakódások eltávolításáért

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere-émlékeztető: Mindig tudni
fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén
figyelmeztet

