

PHILIPS

sonicare



DiamondClean 9000

Cordless Power
Flosser

Szájzuhany + fogkefe

Quad Stream technológia

Impulzushullámok vezetnek menet
közben



HX3886/41

A QuadStream technológiával újragondolt fogköztisztítás

A kezelt területeken található lepedék* 99,9%-át eltávolítja

Erőfeszítés nélküli alapos fogköztisztítás a fogíny egészségének javítása érdekében. Az egyedülálló Quad Stream hegy kevesebb erőfeszítéssel több területet tisztít meg, így mindig hatékonyabb a fogköztisztítás. A megfelelő használat pedig egyszerűen kivitelezhető.

Tökéletes tisztítás

- Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

Egyszerű és kényelmes

- Gyors, univerzális töltés USB-A kábellel
- Normál hegy célzott tisztításhoz

Gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztítás


- 2 fogköztisztító üzemmód, 3 intenzitási szint
- Teljes tisztítás 60 másodperc alatt
- A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
- Quad Stream technológia a gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztításért

A DiamondClean 9000 az Ön igényeihez igazodik

- Személyre szabott fogmosási élmény


Fénypontok

Quad Stream technológia

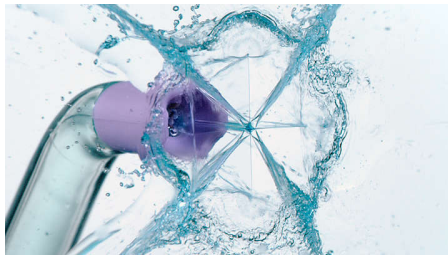

Az egyedülálló X-alakú Quad Stream hegy a vízáramot 4 vízsugárba választja szét, amelyek több területet fednek le a fogak között és a fogíny mentén. Gyorsabb, alaposabb tisztítás a hagyományos fogszelvényekkel való bajlódás nélkül.

Pulse Wave technológia

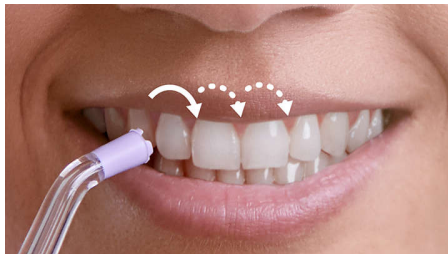

Gyengéd vízsugárimpulzus vezeti a felhasználót fogról fogra a Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmódban – így minden alkalommal megfelelő módon végezheti a tisztítást.


2 üzemmód, 3 intenzitási szint



Válassza a mosolyához illő tisztaságot. A Clean (Tisztítás) üzemmód folyamatos vízáramlást biztosít a hatékony mindennapi tisztításhoz. A Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmód

impulzusokat alkalmaz az alaposabb tisztítás érdekében. Az állítható intenzitási szint biztosítja a kényelmet.

Teljes tisztítás 60 másodperc alatt

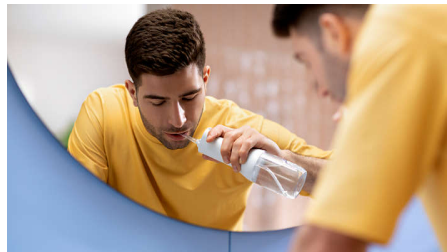

A nehezen elérhető területeket is megtisztíthatja a 360 fokban elforgatható fejjel, vagyis bármilyen irányban használhatja a készüléket. Alapos, 360 fokos tisztítás mindössze 60 másodperc alatt az elejétől a végéig.

USB-A töltés



Az USB-A kábellel történő kényelmes töltéshez ugyanaz a csatlakozás szükséges, mint a legtöbb mobiltelefon vagy táblagép esetén. Akár 14 nap tisztítás egyetlen feltöltéssel.

4 üzemmód, 3 intenzitási szint



A DiamondClean 9000 a Clean, a White+, a Gum Health és a Deep Clean+ funkciókkal minden fogmosási igényről gondoskodik. A Clean


üzemmód a mindennapi (ám nem mindennapi hatékonyságú) tisztításra, a White+ a foltok eltávolítására, a Gum Health a fogíny gyengéd, mégis hatékony tisztítására, a Deep Clean+ pedig az élénkítő mélytisztításra szolgál. A három intenzitás révén lehetősége nyílik, hogy válasszon a nagyobb tisztítóerővel járó magasabb és az érzékenyebb szájüregekhez javasolt alacsonyabb fokozat között.

Philips Sonicare technológia



Az erőteljes szónikus rezgés felhabosítja a fogkrémet, hogy az így képződő buborékok megküzdenek a lerakódásokkal, majd mélyen bejuttatja a habot a fogai közé, és eloszlatja a fogíny mentén. A 2 perces fogmosás hatása így egy hónapi hagyományos fogmosással ér fel.

Normál hegy célzott tisztításhoz

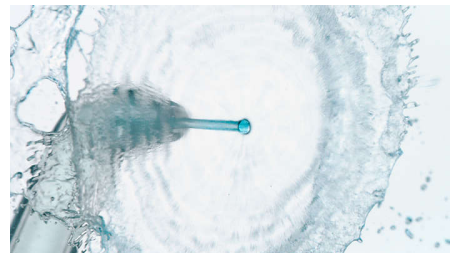

A normál, egyetlen vízsugarat kibocsátó hegy növeli a nyomást a célzott tisztításhoz és az ételmaradványok eltávolításához, amikor szükséges.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: Többfeszültségű töltő

Műszaki adatok

Energiafogyasztás: Kikapcsolt módban <0,3 W,

Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W

Consumer Trade Item

Height: 25.9 cm

Width: 24.5 cm

Length: 12 cm

Net weight: 1.294 kg

Gross weight: 1.589 kg

GTIN: 8720689016155

Country of origin: CN

Harmonized system code: 96032100

Külső karton

Height: 27.7 cm

Width: 25.8 cm

Length: 37.9 cm

Net weight: 3.882 kg

Gross weight: 5.069 kg

GTIN: 18720689016152

Raklap

Height: 98.1 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 104.814 kg

Gross weight: 162.123 kg

GTIN: 68720689016157

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Pallet Layer

Height: 27.7 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepattintható

Teljesítmény

Tisztítás: A teljes száj megtisztítása 60–90 másodperc alatt

Tartozékok

Vez. nélk. elektromos fogköztisztító: 1

F1 Standard fej: 1

Fogkefefej: 1 - C3

F3 Quad Stream fej: 1

USB töltőkábel: 1

DiamondClean 9000: 1

USB fali adapter: 1

Pohártöltő: 1

USB utazótok: 1

Egészségügyi előnyök

Lepedék eltávolítás: A kezelt területeken található lepedék 99%-át eltávolítja*

Elektromos fogköztisztító üzemmódjai

Clean: A kivételes mindennapos tisztításért

Mélytisztítás+: Az élénkítő mélytisztításért

Intenzitási szintek: 3

