

PHILIPS

IPL Haarentfernungsgerät
mit SenselQ

Lumea IPL Prestige

SmartSkin Sensor

2 intelligente Aufsätze: Körper,
Gesicht

Lumea IPL App

Verwendung mit Kabel



BRI944/00



Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Bis zu 92% weniger Haare nach nur 3 Behandlungen**

Lumea IPL Prestige ist mit SenselQ Technologie, intelligenten Aufsätzen und der Lumea IPL App das effektivste IPL-Gerät*** für eine individuelle Haarentfernung am ganzen Körper. Kabelgebundene Version.

Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv
- Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 2 Aufsätzen
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

Individuelle IPL-Haarentfernung

- Sanft und komfortabel mit SenselQ
- Optimieren Sie Ihre Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.

Besonderheiten

Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung



Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

SenselQ technology



Lumea Serie 8000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Extralanges Kabel



Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

2 smart attachments



Speziell entwickelte Aufsätze passen sich perfekt jeder Körperform an und nutzen bei Verwendung die effektivsten Programme für jede Körperpartie. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster.


Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL

entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

Philips Lumea IPL-App

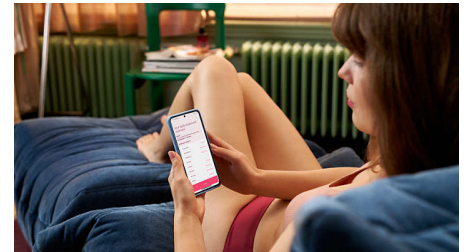

Unsere kostenlose Coaching-App hilft Ihnen, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt Sie schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperbehandlungs-Aufsatz: Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle Behandlung für den Körper: Beine, Arme und Bauch

Gesichtsbehandlungs-Aufsatz: Form: flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

SmartSkin Sensor: Die richtige Einstellungsanzeige auf Abruf

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für eine schnelle Anwendung

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Mit Kabel/kabellos: Verwendung mit Kabel

Technische Daten

Stromspannung: 100–240 V

Hochleistungs-Lampe: Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren**

Consumer Trade Item

Height: 19 cm

Width: 26.5 cm

Length: 14 cm

Net weight: 1.053 kg

Gross weight: 1.664 kg

GTIN: 8710103948827

Country of origin: SI

Außenkarton

Height: 20 cm

Width: 27.4 cm

Length: 28.8 cm

Net weight: 2.106 kg

Gross weight: 3.52 kg

GTIN: 18710103948824

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Kosmetiktasche

Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Anwendungszeit

Unterarme: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Gesichtsbereiche: 1,5 Min.

Unterschenkel: 8,5 Min.



* Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten

** Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; die einzelnen Ergebnisse können variieren

*** Durchschnittliches Ergebnis: 58% weniger Haare nach 12 Behandlungen

**** Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.