

PHILIPS

Reacondicionado Dispositivo de depilación IPL

Lumea IPL 9900 Series

Sensor SmartSkin

4 accesorios inteligentes: cuero, cara, zona del bikini y axilas

Funciones exclusivas de la aplicación con IA

Uso con y sin cable



BRP958/00R1



Nuestra IPL más inteligente con funciones exclusivas de SkinAI

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses*

Descubre nuestra solución IPL más inteligente hasta la fecha para una piel suave durante mucho tiempo. Nuestro dispositivo Lumea IPL sin cable más rápido con tecnología SenseIQ ahora incluye funciones de SkinAI exclusivas en la aplicación Lumea IPL para analizar tu piel y realizar un seguimiento de tu progreso.

Suavidad y eficacia para conseguir una piel sedosa por más tiempo

- Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos
- El único sistema Lumea con opción sin cable
- Desarrollado con dermatólogos para ser fácil y efectivo

Solución completa para cara y cuerpo

- Solución completa para la cara y el cuerpo con 4 accesorios inteligentes
- Rostro suave en dos pasos con la depiladora facial
- Adecuado para la mayoría de tonos de piel y colores de vello

Lumea IPL <gt/>

- Los mismos resultados, pero mejor para el medio ambiente

Tratamiento personalizado IPL para eliminar el vello

- Suavidad y comodidad con SenseIQ
- Análisis inteligente de la piel con SkinAI

Destacados

Lumea IPL >



Nos encanta reutilizar productos devueltos y darles una segunda vida, ya que los materiales y las piezas que usamos en su fabricación tienen el mayor impacto de CO2. Elegir productos reacondicionados en lugar de nuevos reduce la huella de carbono en un 78 %***.

2 veces al mes para obtener resultados rápidos



Para empezar, sesiones cada dos semanas (la mitad de tratamientos que otras marcas), seguido de un retoque una vez al mes: eso es todo. Depilar ambas piernas solo requiere 8,5 minutos.

Tecnología SenseIQ



Lumea serie 9900 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Sin cable si así quieres



Para mayor comodidad, Lumea serie 9900 es nuestro único sistema IPL inalámbrico, lo que permite llegar fácilmente a cualquier zona con precisión y utilizarlo desde cualquier lugar.

4 accesorios inteligentes



Los accesorios especialmente diseñados se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y activan los programas más eficaces para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Cara: diseño plano y pequeña ventana con filtro UV. Cuerpo: curvado hacia dentro con una ventana grande. Bikini y axilas: curvado hacia fuera para zonas de difícil acceso.


Desarrollado junto con dermatólogos



Como líderes en la tecnología sanitaria, en Philips han desarrollado Lumea IPL consultándolo con dermatólogos, para un uso fácil y efectivo en la seguridad de tu hogar.

Derivado de la tecnología utilizada en los salones profesionales, Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

Funciones exclusivas de SkinAI

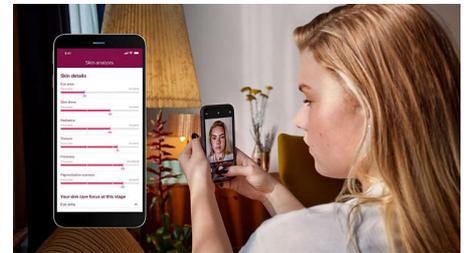

Nuestra aplicación de asesoramiento gratuita ofrece indicaciones paso a paso, ahora con la exclusiva tecnología SkinAI, para analizar tu piel y hacer un seguimiento de la reducción del vello.

Incluye una depiladora facial



El sistema IPL Lumea serie 9900 incluye la nueva depiladora facial de Philips. Ya puedes eliminar de forma fácil y segura el vello de melocotón antes de los pulsos con Lumea.

Para la mayoría de tipos de piel y vello



IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a oscuro (I-V).

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para el tratamiento corporal: Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm², Tratamiento personalizado para el cuerpo: piernas, brazos y abdomen

Accesorio para el tratamiento facial: Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm², filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara: labio superior, barbilla y mandíbula

Accesorio para el tratamiento de la zona del bikini: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para la sensible zona del bikini

Accesorio para el tratamiento en las axilas: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para las axilas

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a petición

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para aplicación rápida

Uso con/sin cable: Uso con y sin cable

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas pequeñas

Especificaciones técnicas

Tipo de batería: Batería recargable

Tensión: 100-240 V

Lámpara de alto rendimiento: Diseño

duradero, proporciona 450 000 pulsos, equivalente a 39 años de vida útil de la lámpara****

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa y 1 año adicional de garantía al registrar el producto en 90 días

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de lujo

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8,5 min.

Axilas: 2,5 minutos

Zona del bikini: 2 min

Cara: 1,5 minutos



* Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86 % en medias piernas, 70 % en la línea del bikini y 67 % en las axilas

** Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips

*** Incluido: producto, materiales de embalaje y logística inversa de Philips de devoluciones de Lumea S9900. No incluido: productos químicos, energía necesaria para el procesamiento, transporte de recepción de piezas y materiales. Cálculo basado en ReCiPe2016 y la base de datos ecoinvent3.6, dando por hecho que todos los accesorios, el adaptador y el embalaje deben ser reemplazados.