

# PHILIPS

Refurbished IPL-  
Haarentfernungsgerät

Lumea IPL 9900  
Series

SmartSkin Sensor

4 intelligente Aufsätze: Körper,  
Gesicht, Bikinizone,  
Achselhöhlen

Exklusive, KI-gesteuerte App-  
Funktionen

Mit Kabel und kabellos  
verwendbar



BRP958/00R1



## Unsere beste IPL-Lösung mit exklusiven SkinAI Funktionen

Genießen Sie bis zu 12 Monate haarfreie, glatte Haut\*

Wir präsentieren – die beste IPL-Lösung aller Zeiten für langanhaltend glatte Haut. Unsere schnellste kabellose Lumea IPL-Lösung mit SenselQ Technologie bietet über die Lumea IPL-App nun exklusive SkinAI Funktionen, mit denen Sie Ihre Haut analysieren und Fortschritte verfolgen können.

### Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat
- Das einzige Lumea Gerät mit kabelloser Option
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv

### Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 4 intelligenten Aufsätzen
- Mit einem Haarentferner für das Gesicht ist ein glattes Gesicht zum Greifen nah
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

### Generalüberholtes Lumea IPL

- Gleiche Ergebnisse, besser für die Umwelt

### Individuelle IPL-Haarentfernung

- Intelligente Hautanalyse mit SkinAI
- Sanft und komfortabel mit SenselQ

# Besonderheiten

## Generalüberholtes Lumea IPL




Wir bereiten zurückgegebene Produkte wieder auf und geben ihnen ein zweites Leben, da die Materialien und Teile, die wir verwenden, bei der Herstellung die größte CO<sub>2</sub>-Belastung verursachen. Der Kauf eines generalüberholten Geräts anstelle eines brandneuen Geräts reduziert den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck um 78%\*\*\*.

## Haarentferner für das Gesicht inbegriffen



Zu Geräten der Lumea IPL Serie 9900 gibt es nun den Philips Haarentferner für das Gesicht. Jetzt können Sie Babyhärchen schnell und sicher entfernen, bevor Sie mit der Lichtbehandlung mit Lumea beginnen.

## Exklusive SkinAI Funktionen

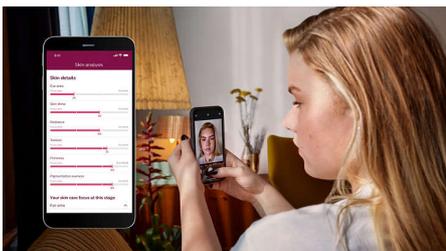

Unsere kostenlose Coaching-App bietet nun Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit exklusiver SkinAI Technologie, damit Sie Ihre Haut analysieren und die Haarreduktion verfolgen können.

## Mit Dermatologen entwickelt

Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

## 4 intelligente Aufsätze



Speziell entwickelte Aufsätze passen sich perfekt jeder Körperform an und nutzen bei Verwendung die effektivsten Programme für jede Körperpartie. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster. Bikinizone und Achselhöhlen: Nach außen gewölbt für schwer zugängliche Bereiche.

## Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung



Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

## SenseIQ Technologie



Lumea Serie 9900 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

## Bei Bedarf kabellos



Lumea Serie 9900 ist unser einziges IPL-Gerät mit kabellosem Betrieb und damit besonders praktisch. So erreicht es schwer zugängliche Bereiche noch präziser und eignet sich auch für unterwegs.

## Für die meisten Haut- und Haartypen

IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

# Daten

## Technische Daten der Aufsätze

**Körperbehandlungs-Aufsatz:** Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für den Körper: Beine, Arme und Bauch

**Gesichtsbehandlungs-Aufsatz:** Form: Flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm<sup>2</sup>, zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

**Bikinizonenbehandlungs-Aufsatz:** Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für die empfindliche Bikinizone

**Unterarmbehandlungs-Aufsatz:** Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für die Achselhöhlen

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtintensitätseinstellungen:** An Ihren

Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

**Hauttonsensor:** Erkennt Ihren Hautton

**SmartSkin Sensor:** Die richtige Einstellung auf Abruf

## Anwendungsmodus

**„Slide and Flash“:** Für eine schnelle Anwendung

**Mit Kabel/kabellos:** Mit Kabel und kabellos verwendbar

**„Stamp and Flash“:** Für die Behandlung kleiner Bereiche

## Technische Daten

**Batterietyp:** wiederaufladbarer Akku

**Stromspannung:** 100–240 V

**Hochleistungs-Lampe:** Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer v. 39 Jahren\*\*\*\*

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

## Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Bedienungsanleitung

**Lagerung:** Hochwertige Tasche

**Adapter:** 19,5 V/4.000 mA

## Anwendungszeit

**Unterschenkel:** 8,5 Min.

**Unterarme:** 2,5 Min.

**Bikinizone:** 2 Min.

**Gesichtsbereiche:** 1,5 Min.



\* Durchschnittliche Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 86% weniger Haare im Unterschenkelbereich, 70% in der Bikinizone, 67% in den Achselhöhlen

\*\* Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.

\*\*\* Dazu gehören Produkte, Verpackungsmaterialien und die Rückführungslogistik von Lumea S8000 Rücksendungen von Philips. Nicht dazu gehören Chemikalien, für die Wiederaufbereitung benötigte Energie, eingehende Teile und Materialtransport. Die Berechnung basiert auf der ReCiPe2016- und ecoinvent3.6-Datenbank, wobei davon ausgegangen wird, dass sämtliches Zubehör, der Adapter und die Verpackung ausgetauscht werden müssen.