

PHILIPS

Kompressor-
Verneblersystem für Kinder

Sami the Seal

Tischgerät für den
Heimgebrauch

Therapie in 6 bis 8 Minuten*

*bei Verwendung mit 2,5 ml
Salbutamol

Speziell für Kinder entwickelt

HH1304



Für eine Therapie, die Spaß macht

Das Kompressor-Verneblersystem für Kinder „Sami der Seehund“ hat die Form einer freundlichen Tierfigur, um Ihr Kind zu ermutigen, die Vernebler-Therapie durchzuführen.

Bewährte SideStream Technologie

- Wirksame Verabreichung von Wirkstoffen
- Erzeugt durchgängig ein hochwertiges Aerosol

Speziell für Kinder entwickelt

- Effizient, zuverlässig und freundlich
- Niedlich und effektiv

Kurze Behandlungszeiten

- Therapie in 6 bis 8 Minuten*

Für gängige verschreibungspflichtige Medikamente geeignet

- Kompatibel mit gängigen verschreibungspflichtigen Medikamenten

Besonderheiten

Für eine Therapie, die Spaß macht



Das Kompressor-Verneblersystem "Sami der Seehund" ist nicht nur leistungsstark und zuverlässig, sondern hat durch die niedliche Figur auch ein kinderfreundliches Design, damit Sie und Ihr Kind eine noch angenehmere Therapieerfahrung haben. Durch die Beschwerung am Boden bietet der Kompressor zusätzliche Stabilität.

"Tucker" Gesichtsmaske für Kinder




Unsere sympathische Gesichtsmaske für Kinder "Tucker die Schildkröte" besteht aus einem weichen, flexiblen Material, das sich der Gesichtskontur Ihres Kindes optimal anpasst. Die Öffnungen in der Gesichtsmaske halten den Wirkstoff von den Augen Ihres Kindes fern.

Schnelle, wirksame Behandlung



Unser SideStream Vernebler wurde speziell entwickelt, um die Behandlungszeit Ihres Kindes so kurz wie möglich zu halten. Da bei unserem Vernebler, "Sami der Seehund", die Luft durch das Röhrchen gedrückt wird, wird zusätzliche Luft in den oberen Teil des Verneblers gesogen, um Ihrem Kind ein schnelleres Einatmen der Aerosol-Medikamente zu ermöglichen. Eine Therapiesitzung kann innerhalb von 6 Minuten erfolgen.*

Bewährte Vernebler-Technologie

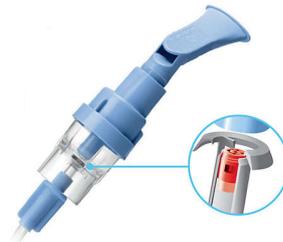

Konstante Verabreichung einer hochwertigen Aerosoltherapie. Der SideStream Vernebler wurde für eine häufige, wiederholte Anwendung konzipiert und kann Ihrem Kind

wirksam sein Vernebler-Medikament verabreichen, bis es Zeit ist, ihn auszutauschen.

Mehrere Konfigurationen



Der dunkelblaue SideStream Vernebler muss erst nach zwei Wochen ersetzt werden. Dieser Einweg-Vernebler bietet jedes Mal eine konstante Wirkstoffabgabe und ist für die meisten üblicherweise verschriebenen Atemwegstherapeutika geeignet.

Vielfältigkeit



"Sami der Seehund" ist für die Verwendung mit den meisten Aerosolmedikamenten, die für gängige Atemwegserkrankungen verschrieben werden, bestimmt.

Daten

Design

Reliable and appealing: Child-friendly

Betriebsparameter

Höchstdruck: 29-43.5 psi

Operating mode: Continuous

Performance average flow rate: 6 LPM @ 10 psig

Thermal fuse: Functioning temp 130 degrees C

Produktangaben

Gewicht: 3.5 lbs

Abmessungen: 226mm x 155mm x 267mm

Gewährleistung: 5 years

Behandlungszeit (6 bis 8 Minuten*): * 2.5ml

Salbutamol dose

Electrical requirements: 120VAC-60 Hz

Power: 120 VA

