

PHILIPS

sonicare

„Sonic“, elektrinis dantų
šepetėlis su programa

DiamondClean 9000

Paprastas prijungiamasis valymas

Integruotas spaudimo jutiklis

Išmanus šepetėlio galvutės
atpažinimas

4 režimai, 3 intensyvumai



HX9911/23

Sveikiausia šypsena kiekvieną dieną

Gili švara sveikesnei šypsenai

„Philips Sonicare DiamondClean 9000“ užtikrina optimalų apnašų šalinimo, sveikesnių dantenų ir dantų balinimo efektyvumą, padedantį pasiekti gilią švarą sveikesnei šypsenai.

Designed around you

- Jūsų šypsenai sukurta šerelių forma

Optimize your brushing

- Premium klasės įkrovimo stiklinė ir kelioninis dėklas

Premium performance

- Šepetėlio galvutė „All-in-One“ visapusiškai priežiūrai
- „Sonic“ valymas: efektyvus valymo meistriškumo klasė

Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Leidžia suprasti, jei spaudžiate per stipriai
- Individualiems poreikiams pritaikytas valymas
- „BrushSync“ automatiškai parenka jums tinkamiausią režimą
- Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes

Stay on track with a personalized progress report

- Pradėkite ugdyti sveikus įpročius ir jų laikykitės


DiamondClean 9000

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programa

HX9911/23

Ypatybės

Premium „All-in-One“ galvutė

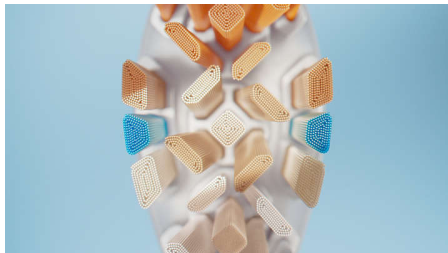

„A3 Premium All-in-One“ šepetėlio galvutė yra vienintelė, kurios jums reikia, kad dantys būtų švaresni ir baltesni***, o dantenos – sveikesnės. Su šia šepetėlio galvute pašalinsite 20 k. daugiau apnašų*, iki 100 % dėmių** ir dantenos bus iki 15 k. sveikesnės vos per 2 savaites**

Suapvalintas profilis



Dėl lenkto profilio šereliai patenka tiksliai ten, kur reikia. Kruopščiai tobuliname ir sukūrėme „viskas viename“ variantą, pasižymintį išskirtine burnos priežiūra.

Patikimas „Sonic“ valymas



Nuvalykite apnašas naudodami „Sonic“ – mūsų efektyvaus ir švelnaus valymo technologiją. Valant dantis, iki 62 000 šerelių judesių ir dinaminis skysčio poveikis padeda šereliams išvalyti net sunkiai pasiekiamas vietas, kad burnoje jaustumėte išskirtinę gaivą ir švarą.

4 režimai, 3 intensyvumai



„DiamondClean 9000“ komplektuojami su „Clean“, „White+“, „Gum Health“ ir „Deep Clean+“ režimais, kad būtų pasirūpinta valymo poreikiais. Režimas „Clean“ skirtas išskirtiniam kasdieniam valymui, „White+“ – dėmėms šalinti, „Gum Health“ valo danteną švelniai, tačiau veiksmingai, o „Deep Clean+“ išsiskiria gaiviu, giliu valymu. Yra trys intensyvumo nustatymai, todėl galite rinktis nuo didesnio nustatymo, kad valymas būtų geresnis, iki žemesnio nustatymo jautresnei burnai.

Integruotas spaudimo jutiklis



Galite nepastebėti, kad valote per stipriai, tačiau „DiamondClean 9000“ tai pastebės. Jei reikės sumažinti spaudimą valant, dantų šepetėlis skleis pulsuojančią garsą. Tai priklauso nuo galvutės, tad leiskite šepetėlio galvutei atlikti savo darbą. 7 iš 10 žmonių teigė, kad ši funkcija padėjo jiems geriau valyti dantis.

„BrushSync“ funkcija



Su išmaniomis šepetėlių galvutėmis užtikrinama, kad naudosite tinkamą režimą ir intensyvumą, kad išvalytumėte kiek įmanoma geriausiai. Pvz., naudojate „W3 Premium White“ šepetėlio galvutę. Jūsų „DiamondClean 9000“ „BrushSync“ technologija automatiškai synchronizuos šepetėlio galvutę su „White+“ režimu, kad būtų lengviau balinti dantis.

DiamondClean 9000

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programa

HX9911/23


Ypatybės

„BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo priminimas



Laikui bėgant visos šepetėlių galvutės susidėvi, todėl norėsite stebėti savąją, kad įsitikintumėte, jog ji vis dar puikiai valo. Mūsų „BrushSync“ technologija stebi, kiek laiko naudojate šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valote. Ant rankenos esantis „BrushSync“ pakeitimo priminimas ir trumpas pyptelėjimas atkreipia dėmesį, kai ateina laikas pakeisti galvutę.

Progreso ataskaita

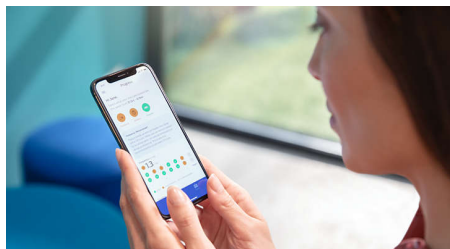

„DiamondClean 9000“ teikia rekomendacijas, kaip pagerinti ir išlaikyti sveikus valymo įpročius tarp odontologinių patikrų. Integruoti išmanieji jutikliai praneša, kai per daug spaudžiate, o sujungus valymą su programėle „Sonicare“, asmeninė progreso ataskaita padeda nenukrypti ir pamatyti, kiek bėgant laikui patobulėjote.

Premium klasės įkrovimo stiklinė ir kelioninis dėklas



Įkrauti dantų šepetėlį dar niekada nebuvo taip paprasta. Po dantų valymo tiesiog įdėkite dantų šepetėlį į elegantišką stiklinę ir jis iškart bus įkraunamas. Stiklinis įkroviklis ne tik stilingai įsilieja į jūsų vonios kambarį, bet ir atlieka skalavimo stiklinės funkciją. Vieną kartą visiškai įkrautu šepetėliu galėsite naudotis dvi savaites. Mūsų aukščiausios kokybės kelioninis dėklas leidžia įkrauti ir higieniškai laikyti dantų šepetėlį keliaujant.

DiamondClean 9000

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programa

HX9911/23

Specifikacijos

Prijungimo galimybė

„Bluetooth®“ belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 14 dienų****

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Energijos sąnaudos: Budėjimo režimu be ekrano <0,5 W

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Rausva aukso spalva

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“ telefonai, „Bluetooth 4.0“ ir naujesnė, Norėdami sužinoti daugiau apie suderinamumą su „iOS“, „Google Play Store“ ieškokite „Sonicare“.

Suderinamumas su „iOS“: „iPhone“ su

„Bluetooth 4.0“ arba vėlesne versija, Norėdami sužinoti daugiau apie suderinamumą su „iOS“, „App Store“ ieškokite „Sonicare“.

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Šepetėlio galvutės atpažinimas:

Sinchronizuojama su optimaliu režimu

Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsidega priminimo piktograma

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „DiamondClean 9000“

Šepetėlių galvutės: 1 „A3 Premium All-in-One“

Stiklinis kroviklis: 1

Kelioninis dėklas: 1 USB įkrovimo dėklas

Valymo veiksmingumas

„Performance“: Pašalina iki 20 k. daugiau apnašų*

Nauda sveikatai: Iki 15 k. sveikesnės dantenos**

Balinamoji nauda: Iki 100 % mažiau dėmių***

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

3 intensyvumo nustatymai: Aukštas, Vidutinis, Žemas

„Deep Clean+“: Stiprinantis gilus valymas

„Gum Health“: Ypatingas dėmesys krūminiams dantims

„White+“: Paviršinėms dėmėms šalinti

„BrushSync“ režimas-poravimas

„A3 Premium All-in-One“: Suderinama su „Clean“ režimu

Išmanioji jutiklinė technologija

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes

Technologija „BrushSync“: Sujungia išmaniąją rankeną su, išmaniąja šepetėlio galvute



* palyginti su paprastu dantų šepetėliu.

* *naudojant su A3 šepetėlio galvute, palyginti su paprastu dantų šepetėliu.

* **palyginti su paprastu dantų šepetėliu. Tyrimas atliktas laboratorijoje, individualūs rezultatai gali skirtis.

* ***pagrįsta dviejų minučių valymo procedūromis du kartus per dieną.