

PHILIPS

IPL Tüy alma cihazı

Lumea IPL 7000
Series

5 manuel yoğunluk ayarı

2 başlık: vücut, yüz

Lumea IPL Uygulaması

Kablolu kullanım

BRI924/00



Mükemmel sonuçlar, üstün değer

12 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildinizin keyfini çıkarın*

Lumea IPL 7000 Serimiz ile tüysüz ve pürüzsüz bir cilde sahip olun. Özel aparatlar ile vücudun her bölgesine nazik ve etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Uzun süreli pürüzsüz bir cilt için nazik ve etkili uygulama

- Hızlı sonuçlar için sadece ayda 2 kez bakım yapın
- Nazik ve etkili uygulama
- Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

Yüz ve vücut için eksiksiz çözüm

- Yüz ve vücut için 2 aparatlı, eksiksiz çözüm
- VisaPure mini yüz temizleyici ile birlikte gelir
- Çeşitli cilt tonları ve tüy renkleri için uygundur

Kişiselleştirilmiş IPL tüy alma uygulaması

- Cilt Tonu Sensörü ve 5 yoğunluk ayarı
- Philips Lumea IPL uygulamasıyla rutin işlerinizi optimize edin

Özellikler

Hızlı sonuçlar için ayda 2 uygulama



Başlangıçta 2 haftada bir, yani diğer markalara göre yarı yarıya daha az uygulama. Ardından ayda sadece bir kez rötuş. Hepsisi bu kadar. İki alt bacağı tamamlamak 15 dakika sürer.

Cilt Tonu Sensörü



Rahat bir deneyim için 5 yoğunluk ayarı arasından seçim yapın. Cilt Tonu Sensörü, cildinizin IPL uygulaması için çok koyu olan bölgelerine uygulama yapmanızı engeller.

Ekstra uzun kablo



Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.

2 özel aparatlı




Hassas bölgelerde bile nazik kullanım için farklı vücut ve yüz başlıkları hızlı ve hassas bir şekilde çalışır. Yüz aparatında hassas uygulama için entegre bir ışık filtresi bulunur.

Dermatologlarla geliştirildi



Sağlık teknolojisinde lider olan Philips, uzman bilim adamları ve dermatologlarla birlikte Lumea IPL'i hassas bölgelerde bile güvenli, rahat ve etkili olacak şekilde geliştirdi.

Philips Lumea IPL uygulaması

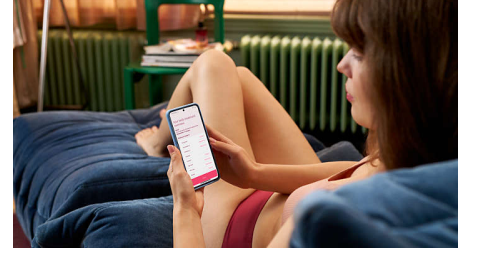

Ücretsiz koçluk uygulamamız, tedavi programınızı planlamanıza ve bu plana bağlı kalmanıza yardımcı olur, ardından sizi her seansta adım adım yönlendirir. 2,1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

VisaPure mini yüz temizleme

Güzellik rutininizi tamamlayın: VisaPure mini yüz temizleyici, gözle görülür derecede tazelenmiş ve yumuşak bir cilt için kompakt ve kullanımı kolay bir cilt temizleme cihazıdır.

Çeşitli cilt ve tüy tipleri için



IPL uygulaması için tüy rengindeki pigmentle cilt tonundaki pigment arasında kontrast olması gerekir. Bu nedenle bu teknoloji doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde ve açık ila orta kahverengi tonlarındaki ciltlerde etkilidir (I-IV).

Teknik Özellikler

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Hızlı uygulama için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu kullanım

Damga ve Flaş: Küçük bölgelerde uygulama için

Teknik özellikler

High performance lamp: Uzun ömürlü, 250.000 ışık atışı, 20 yıllık lamba ömrüne eşdeğerdir**

Gerilim: 100-240 V

Servis

Garanti: 90 gün içerisinde ürün kaydı yapılması halinde dünya çapında 2 yıl garanti + 1 yıl ek garanti

Dahil olan ürünler

Kullanım için talimatlar: Kullanım kılavuzu

Depolama: Taşıma çantası

Adaptör: 24 V / 1500 mA

Uygulama süresi

Alt bacak: 15 dk

Koltuk altları: 2,5 dk

Bikini line: 4 dk

Yüz alanları: 2 dk

VisaPure mini hassas

Aksesuarlar: Hassas ciltler için fırça başlığı, Güç adaptörü

Güç: Güç adaptörü

Başlıkların teknik özellikleri

Vücut aparatı: Pencere boyutu: 4,0 cm², Vücut bakımı: bacaklar, kollar, karın ve koltuk altları

Yüz başlığı: Pencere boyutu: 2 cm², ekstra filtre, Yüz bakımı: üst dudak, çene ve çene hattı

