

# PHILIPS

IPL-hårfjerningsenhed  
med SenseIQ

Lumea IPL Prestige

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehørsdele:  
krop, ansigt, bikini, armhuler

Lumea IPL-app

Brug med ledning



BRI948/00



## Nyd 6 måneders silkeglat hud\*

Op til 92 % hårreduktion efter 3 behandlinger\*\*

Lumea IPL Prestige er den mest effektive IPL-enhed\*\*\* med SenseIQ-teknologi, intelligent tilbehør og Lumea IPL-appen til en personlig hårfjerningsbehandling til hele kroppen. Trådløs for at gøre det ekstra nemt.

### Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv
- Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

### Komplet løsning til ansigt og krop

- Komplet løsning til ansigt og krop med 4 smarte tilbehørsdele
- Velegnet til de fleste hudfarver og hårfarver

### Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Skånsomt og behageligt med SenseIQ
- Optimer din rutine med Philips Lumea IPL-appen

## Vigtigste nyheder

### 2x om måneden for hurtige resultater



Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 8,5 minut at dække begge underben.

### SenseIQ-teknologi



Lumea 8000-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente tilbehørsdele tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.

### Ekstra langt kabel



Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredegtighed.

### 4 smarte tilbehørsdele



Specialdesignede tilbehørsdele passer perfekt til kroppens kurver og udløser de mest effektive programmer for hvert kropsområde, når de er tilsluttet. Ansigt: fladt design og lille vindue med UV-filter. Krop: buer indad med et stort vindue. Bikinilinje og under arme: buer udad til områder, der er svære at komme til.


### Udviklet i samarbejde med dermatologer



Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem,

effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

### Philips Lumea IPL-appen

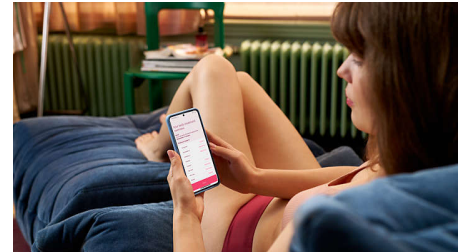

Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.

### Til de fleste hud- og hårtyper



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mørkebrun (I-IV).

# Specifikationer

## Tekniske specifikationer for tilbehør

**Body treatment attachment:** Form: Konvekst buet, Vinduesstørrelse: 4,1 cm<sup>2</sup>, Skræddersyet behandling af krop: Ben, arme og mave

**Face treatment attachment:** Form: Flad, Vinduesstørrelse: 2 cm<sup>2</sup>, ekstra filter, Skræddersyet behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og kæbelinje

**Bikini treatment attachment:** Form: Konkavt buet, Vinduesstørrelse: 3 cm<sup>2</sup>, Skræddersyet behandling til det følsomme bikiniområde

**Underarm treatment attachment:** Form: Konkavt buet, Vinduesstørrelse: 3 cm<sup>2</sup>, Skræddersyet behandling til armhulerne

## Sikkerhed og justerbare indstillinger

**Integreret UV-filer:** Beskytter huden mod UV-lys

**5 lysenergiindstillinger:** Justerbar i forhold til

din hudtype

**Integreret sikkerhedssystem:** Undgå utilsigtede blink

**SmartSkin-sensor:** Den rigtige indstilling ved behov

## Programtilstand

**Slide and Flash:** For hurtig anvendelse

**Ledningsbaseret/ledningsfri brug:** Brug med ledning

**Stamp and Flash:** Til behandling på små områder

## Tekniske specifikationer

**Spænding:** 100-240 V

**High performance lamp:** Bygget til at holde, 450.000 blink, svarende til 39 års pærelevetid\*\*

## Service

**Garanti:** 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti ved produktregistrering inden for 90 dage

## Medfølgende dele

**Instructions for use:** Brugervejledning

**Opbevaring:** Skønhedsetui

**Adapter:** 19,5 V / 4.000 mA

## Anvendelsestid

**Under armene:** 2,5 min.

**Bikini line:** 2 min

**Face areas:** 1,5 min.

**Underben:** 8,5 min



\* Median hårreduktion efter 12 behandlinger: 77 % på ben, 64 % ved bikinilinjen, 64 % i armhulerne

\*\* Når behandlingsplanen følges, målt på benene, individuelle resultater kan variere

\*\*\* Gennemsnitligt resultat: 58 % hårreduktion efter 12 behandlinger

\*\*\*\* Når behandlingsplanen følges: Beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret