

# PHILIPS

## sonicare



Escova de dentes  
elétrica com app

DiamondClean  
Smart

Aconselhamento personalizado  
Sensores inteligentes da cabeça  
Reconhecimento inteligente da  
cabeça

5 modos, 3 intensidades



HX9944/13

## A nossa melhor escova de dentes para cuidados orais completos

Sinta-se confiante, com cobertura a 100%

A DiamondClean Smart é a nossa melhor escova de dentes para cuidados completos. Quatro cabeças de escova de alto desempenho permitem-lhe concentrar-se em todas as áreas da sua saúde oral, e a nossa tecnologia Smart Sensor proporciona-lhe feedback e orientação personalizados.

### Proven to improve oral health

- Remove até 10x mais placa bacteriana\* para uma limpeza profunda
- Gengivas até 7x mais saudáveis\* em apenas 2 semanas
- Para um hálito fresco duradouro

### Orientação personalizada na aplicação para uma escovagem perfeita

- Oferece orientações para a escovagem e indica quais as áreas por escovar
- Leva-o de volta aos locais onde não escovou para uma cobertura a 100%
- Comece a tratar melhor das áreas mais problemáticas
- Alerta-o quando está a escovar com demasiada força
- Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

### Optimize your brushing

- As cabeças das escovas selecionam automaticamente as definições ideais
- Certifique-se de que aproveita ao máximo a cabeça da escova
- Escolha entre 5 modos e 3 definições de intensidade

## Destaques

### Diga adeus à placa bacteriana



Encaixe a cabeça de escova C3 Premium Plaque Control para sentir a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com faces laterais macias, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior\*\*\* e remover até 10x mais placa das áreas difíceis de alcançar\*.

### Cuide das suas gengivas



Encaixe a cabeça de escova G3 Premium Gum Care para melhorar a saúde das suas gengivas. O seu tamanho menor e as cerdas destinadas à linha das gengivas proporcionam uma lavagem suave, mas eficaz, ao longo da linha das gengivas, onde as doenças gengivais começam. Foi comprovado clinicamente que consegue 100% menos inflamação das gengivas\* e gengivas até 7x mais saudáveis em apenas duas semanas.\*

### Escova para língua TongueCare+




Encaixe a cabeça de escova TongueCare+ para remover suavemente os odores que causam as bactérias dos poros da língua. As suas 240 micro cerdas especialmente desenvolvidas para penetrarem nas nervuras e nos sulcos da língua para removerem as bactérias e os resíduos que provocam o mau hálito. Combine com o nosso spray para língua antibacteriano BreathRx para uma limpeza de nível superior e um hálito extremamente fresco.

### Nunca falhe um local




A aplicação Philips Sonicare permite-lhe saber se alcançou uma limpeza profunda e oferece-lhe orientações que ajudam a escovar os dentes de forma mais eficaz e consciente.

### Função TouchUp

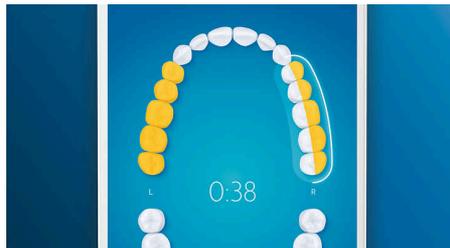

Se tiver falhado algum ponto enquanto escovava os dentes, a função TouchUp da nossa aplicação mostra-lhe esse ponto. Assim, pode voltar para uma segunda passagem e ter a certeza de que a limpeza fica completa, sempre.

### Áreas a ter em atenção e definição de objetivos

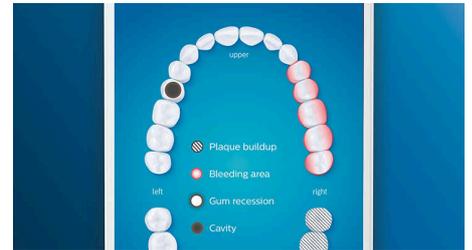

O seu dentista indicou-lhe algumas áreas a ter em atenção? Vamos destacá-las no mapa em 3D da sua boca da aplicação e lembrá-lo de que deve ter um cuidado especial com elas.

### Demasiada pressão?



Poderá não notar que está a escovar com demasiada força, mas a sua escova DiamondClean Smart nota. Se aplicar demasiada pressão, o anel de luz na extremidade da pega pisca. Trata-se de um lembrete simples para aliviar a pressão e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função os ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

### Simple e fácil



Com uma escova de dentes elétrica, é a escova que faz o trabalho. Incorporámos um sensor da força de escovagem na pega que ativa um lembrete simples para aliviar a pressão. Desta forma, poderá melhorar a sua técnica e conseguir uma lavagem mais suave e eficaz.

## Destaques

### Emparelhamento de modo BrushSync



Não sabe qual o modo e a intensidade que deve utilizar? Fique já a saber. Um microchip instalado na cabeça da escova indica à DiamondClean Smart qual está a utilizar. Assim, se encaixar uma cabeça de escova de cuidado das gengivas, por exemplo, a escova de dentes sabe selecionar o modo e a intensidade ideais para conseguir um cuidado suave, mas eficaz, das gengivas. Necessita apenas de premir o botão de alimentação.

### Avisos de substituição inteligentes



As cabeças da escova desgastam-se ao longo do tempo e tornam-se menos eficazes na remoção da placa bacteriana. Com o reconhecimento inteligente da cabeça da escova, saberá sempre quando for preciso substituí-la. A escova de dentes regista a frequência e a força da sua escovagem com cada cabeça da escova, e avisa-o quando chegar a altura de a substituir. Pode também monitorizar o tempo de vida útil das suas cabeças de escova na aplicação Philips Sonicare e até mesmo encomendar cabeças de escova de substituição, para que nunca seja apanhado de surpresa.

### 5 modos, 3 definições de intensidade



A DiamondClean Smart dispõe de cinco modos que abrangem uma variedade de necessidades de escovagem: modo Clean para uma limpeza diária excepcional, White+ destina-se à remoção de manchas, Deep Clean+ faz uma limpeza profunda revigorante, Gum Health proporciona uma limpeza suave, mas eficaz, das gengivas e Tongue Care é o modo perfeito para a limpeza da língua. Separa os resíduos da língua e limpa as bactérias que causam o mau hálito. Três intensidades permitem-lhe escolher entre uma definição mais alta que aumenta a limpeza e uma mais baixa para as bocas mais sensíveis.

## Especificações

### Conectividade

**Tecnologia sem fios Bluetooth®:** Aplicação de escovagem conectada

### Alimentação elétrica

**Voltagem:** 110-220 V

### Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** 14 dias\*\*\*\*\*

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

### Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

### Compatibilidade

**Compatibilidade Android:** telemóveis Android, tablets com Bluetooth 4.0

**Compatibilidade iOS:** iPad 3.ª geração ou superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou superior

### Fácil de utilizar

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Indicador de bateria:** Ícone iluminado indica a carga da bateria

**Visor:** Visor iluminado

**Reconhecimento da cabeça da escova:** Sincroniza-se com o modo ideal

**Lembrete de substituição:** Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

### Itens incluídos

**Pega:** 1 DiamondClean Smart

**Cabeças de escova:** 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 escova para língua TongueCare+

**Base de carregamento:** 1

### Desempenho de limpeza

**Benefícios para a saúde:** Gingivas até 7x mais saudáveis\*\*\*\*

**Performance:** Remove até 10x mais placa bacteriana\*

**Velocidade:** Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

**Temporizador:** BrushPacer e SmarTimer

**Resposta da pressão:** O anel acende-se a roxo, A pega vibra para alertar o utilizador

**TouchUp:** Garante 100% de cobertura

### Modos

**3 intensidades:** Elevada, Média, Baixa

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**Limpeza profunda+:** Para uma limpeza profunda revigorante

**Saúde das gengivas:** Atenção especial aos molares

**TongueCare+:** Para um hálito fresco duradouro

**Branco+:** Para eliminar manchas da superfície

### Emparelhamento do modo BrushSync

**C3 Premium Plaque Control:** Emparelha-se com o modo Clean

**G3 Cabeça de escova Premium Gum Care:**

Emparelha-se com o modo Gum Health

**Cabeça de escova W3 Premium White:**

Emparelha-se com o modo White+

**Escova para língua TongueCare+:** Emparelha-se com o modo TongueCare

### Tecnologia de sensor inteligente

**Sensor de pressão:** Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

**Sensor de localização:** Regista e melhora a cobertura

**Sensor de escovagem:** Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

**Mapa em 3D da boca:** Destaca as áreas com problemas

**TouchUp:** Para regressar aos locais onde não escovou

**Sensor de posição:** Indica quais as áreas por escovar

### Assistência ao software

**Atualizações de software:** A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.



\* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual  
\*\* em comparação com uma escova de dentes manual com uma das melhores pastas de dentes branqueadoras  
\*\* em comparação com a DiamondClean  
\*\*\*\* no modo Gum Health em comparação com uma escova de dentes manual durante 2 semanas  
\*\*\*\*\* após um período de 3 dias de utilização no modo White+ em comparação com uma escova de dentes manual  
\*\*\*\*\* com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão