

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

4100 Series

Sonicare-Technologie

4-Quadranten-Timer und 2-
Minuten-Timer

Schlankes, ergonomisches
Design

14 Tage Akkulaufzeit



HX3689/41



Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo
Sonicare.

Für weiße Zähne bei jedem Putzen

Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt sanft Verfärbungen – für natürlich weiße Zähne bei jedem Putzen.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Weniger verbrauchen. Mehr wiederverwenden
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Wechseln Sie zwischen 2 Intensitätsstufen
- Akkulaufzeit von 14 Tagen

Ein gesundes Lachen mit weißen Zähnen

- Unsere einzigartige Technologie für eine sanfte und effektive Reinigung
- Für weiße Zähne bei jedem Putzen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege


- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

Schützt Ihr Zahnfleisch

- Die Andruckkontrolle schützt Zähne und Zahnfleisch


Besonderheiten

Für weiße Zähne bei jedem Putzen

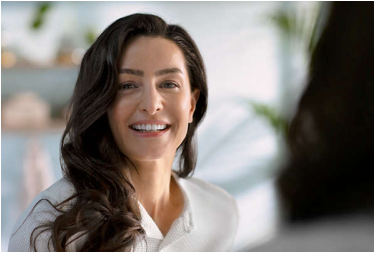

Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Schalltechnologie entfernt sanft Verfärbungen für natürlich weißere Zähne mit jedem Putzen.

Schützt Ihr Zahnfleisch

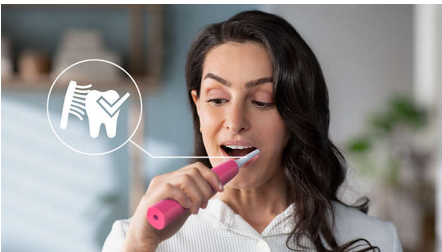

Die integrierte Andruckkontrolle erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus und reduziert die Vibration. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer




Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

2 Intensitätsstufen



Wechseln Sie zwischen 2 Intensitätsstufen, um das Zähneputzen komfortabler zu machen.

Fortschrittliche Schalltechnologie

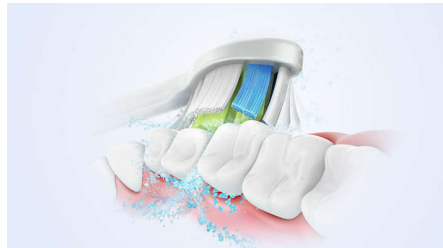

Kraftvolle Bürstenvibrationen lassen Mikrobubbles tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.


BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere

BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

Lange Akkulaufzeit

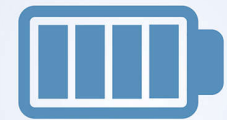

14 days

Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

Für weniger Abfall



Unser Ziel bei Philips ist es, Elektronikschrott zu reduzieren. Das erreichen wir zum Beispiel, indem wir die Anzahl der von uns verkauften Adapter minimieren. Diese Produkte werden ohne Netzadapter geliefert, da wir uns für die Reduzierung von Elektronikschrott einsetzen.

Daten

Leistung

Stromspannung: DC5V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage**

Batterietyp: Lithium-Ionen

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 13.9 cm

Length: 6.3 cm

Net weight: 0.198 kg

Gross weight: 0.297 kg

GTIN: 8720689034791

Country of origin: CN

Außenkarton

Height: 23.3 cm

Width: 14.7 cm

Length: 19.8 cm

Net weight: 0.594 kg

Gross weight: 1.007 kg

GTIN: 18720689034798

Design und Materialausführung

Farbe: Paradise Pink mit Prisma-Effekt

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare
Bürstenköpfe

BrushSync Erinnerungsfunktion:

Erinnerungsfunktion, So wissen Sie immer,
wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen
sollten, Erinnerungssymbol leuchtet auf, Stellt
jederzeit optimale Ergebnisse sicher

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 W Optimal White

Ladegerät: 1

Handstück: 1 Serie 4100

Reinigungsleistung

Leistung: Für weiße Zähne bei jedem Putzen

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-
Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur
Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

2 Intensitätsstufen: Hoch, Niedrig

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem
Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe
austauschen sollten

