



Visit us

www.philips.com

There may be certain differences between the content of this manual and your product. Please refer to the actual product. We reserve the right to update the product at any time without prior notice.

© 2023 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Rev A MAR 23



PHILIPS

Eye Mask Massager


Air Pressure Eye
Mask Massager

PPM2702




Quick Start Guide


1.Remove the contact lenses, frame glasses or accessories around your eyes.

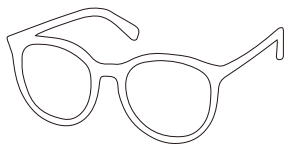


2.Adjust the elastic headband and wear the product comfortably on your eyes.

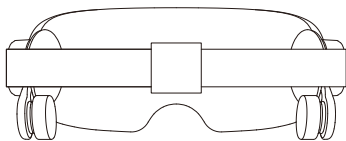

3.Wear the bone conduction stereo unit to an area about 0.5-1.5cm in front of your ears. It is recommended to adjust the different angles of the headset bracket according to personal situation to achieve the best sound effect.

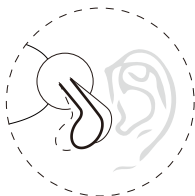

4.Press and hold the power function button  for 2 seconds to power on the device with the voice prompt of "Massage on". Press and hold the power function button  for 2 seconds to power off the product with the voice prompt of "Massage off".

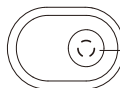

Press and hold the button to power on/off

5.After power-on, the warm compress is turned on by default, Eye Beauty Mode is enabled with the voice prompt of "Eye Beauty Mode", and the power indicator lamp turns orange; the built-in music is played by default and the music indicator lamp turns cyan.




Orange



Cyan

6.Press the power function button  to switch the modes circularly in turn, and the corresponding voice prompts are as follows:
Eye Beauty Mode → Eye Care Mode → Sleep-aid Mode → Eye Warming Mode → Music Mode

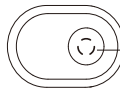

Press the button to switch the modes


*Except for the music relaxation mode, the warm compress is enabled by default in other modes. Double click the power function button to turn off the warm compress function, and the indicator lamp turns green. Double click the button again to restart the warm compress.

7.After power-on, the background system automatically searches for the paired Bluetooth device (the search time is 10 minutes, and the music indicator lamp turns cyan), and connects to the paired Bluetooth device automatically. When pairing successfully, the music indicator lamp turns blue with a voice prompt of "The Bluetooth device is connected successfully", and the audio of the pairing device will be played.




Music indicator lamp changes from cyan to blue


8.When playing the built-in music, press the music button  to play the next music; press and hold the button to search for a new Bluetooth device; double click to turn off/of the music.

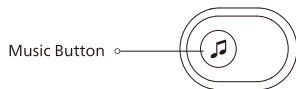

9.When playing the built-in music, after switching to the corresponding mode, the product will be automatically powered off in 15 minutes by default. When playing the Bluetooth music, after switching to the corresponding mode, except that no automatic power-off is set in the music relaxation mode, the device will be automatically powered off in 30 minutes (15 minutes of massage + 15 minutes of pure music) in other modes.

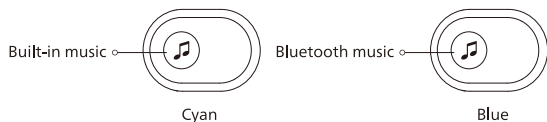

10.If the battery is lower than 10%, the power indicator lamp will be in the red breathing state, and there will be a voice prompt of "Low battery, please charge it in time" (prompt once only each time the product is powered on).

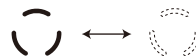


Breathing Display

11.When the device is being charged, the power indicator lamp will be in the breathing light state, which is convenient to know the current battery power of the device in real time.


- Red breathing lamp: 0-9%
- Orange breathing lamp: 10-50%
- Green breathing lamp: 51-99%
- Green lamp remains on: 100%

- ❗ 1. It is recommended to start at a low level when using the massager for the first time, so as to avoid irritation.
- 2.Close your eyes during use of the product. Blurred vision may occur when you take off the product after use. Just close your eyes for 1 to 3 minutes, and this condition can be eased.
- 3.After use, clean the surface of the product with a damp cloth or an alcohol pad. Do not rinse it directly with water.


1. 摘下隐形眼镜、框架眼镜及眼周的配饰。

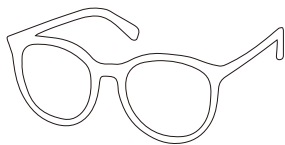


2. 调整松紧头带，将产品舒适佩戴至眼部。

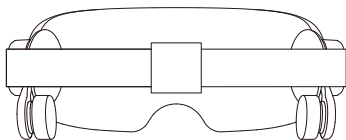

3. 将骨传导立体声单元佩戴至耳朵前方约0.5-1.5cm的区域，建议结合个人情况，具体调节耳机支架的不同角度以获取最佳音效。

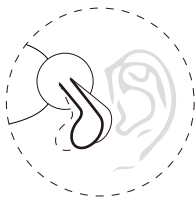

4. 长按2秒  电源功能键开机，语音播报“按摩开启”。长按2秒  电源功能键关机，语音播报“按摩结束”。

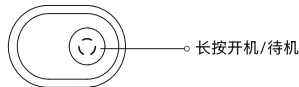

5. 开机后默认开启热敷，进入“美眼模式”，语音播报“美眼模式”，电源灯亮橙色；默认播放内置音乐，音乐灯亮青色。




亮橙色



亮青色

6. 短按  电源按键依次循环切换模式，对应语音提示：

美眼模式 → 护眼模式 → 助眠模式 → 暖眼模式 → 音乐放松模式

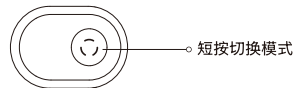

*除音乐放松模式外，其他模式均默认开启热敷，双击电源功能键，可关闭热敷功能，指示灯变为绿色，再次双击，则可重新开启热敷。

7. 开机后, 后台自动搜索已配对蓝牙设备, (搜索时间为10分钟, 音乐灯亮青色), 自动连接已配对蓝牙设备。配对成功后, 音乐灯变为蓝色, 语音播报“蓝牙连接成功”, 播放配对设备音频。



音乐灯由青色变为蓝色

8. 播放内置音乐时, 短按  音乐按键播放下一首; 长按搜索新蓝牙设备; 双击可关闭/开启音乐。



9. 播放内置音乐时, 切换至对应的模式后, 默认15分钟后自动关机。播放蓝牙音乐时, 切换至对应模式后, 除音乐放松模式不设自动关机外, 其他模式均在30分钟 (15分钟按摩+15分钟纯音乐) 后自动关机。



亮青色



亮蓝色

10. 当电量低于10%时, 电源指示灯呈红色呼吸灯状态, 语音播报“电池电量低, 请及时充电”(每次开机只播报一次)。




呼吸显示

11. 当机器处于充电状态时, 电源指示灯呈现呼吸灯状态, 方便实时了解设备当前电量。


- 红色呼吸灯: 0-9%
- 橙色呼吸灯: 10-50%
- 绿色呼吸灯: 51-99%
- 绿色灯常亮: 100%

- ❗ 1.首次使用时建议从低档位开始, 避免刺激。
2.使用产品时请闭目, 使用完后取下产品时可能出现视力模糊的情况, 闭目1-3分钟即可缓解。
3.使用完后, 可使用湿布或酒精棉擦拭清洁产品外表, 切勿直接用水冲洗。


1. Tanggalkan kanta lembut, cermin mata dan aksesori di sekeliling mata Anda.

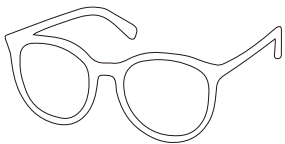


2. Sesuaikan ikat kepala yang anjal agar sesuai dengan produk dengan selesa di sekeliling mata Anda.

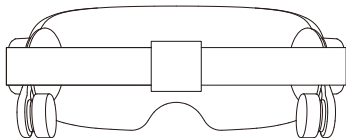

3. Pakai unit stereo kira-kira 0, 5-1, 5cm di hadapan telinga Anda. Disyorkan untuk menyesuaikan sudut berbeza pendakap dengan telinga mengikut keadaan individu masing-masing untuk mendapatkan kesan bunyi yang terbaik.

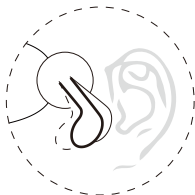

4. Tekan dan tahan butang  kuasa selama 2 saat untuk menghidupkannya dan suara akan mengumumkan "Perangkat mengurut telah dihidupkan". Tekan dan tahan butang  kuasa selama 2 saat untuk mematikan perangkat, dan suara akan mengumumkan "Mengurut telah selesai".

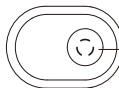

○ Tekan lama kuasa hidup/siap sedia

5. Selepas memulakan, kompres panas dihidupkan secara lalai, memasuki "Mod Eye Beauty", kemudian mengumumkan suara "Mod Eye Beauty", dan lampu kuasa berwarna oren; Muzik terbina dalam dimainkan secara lalai, dan lampu muzik berwarna hijau.




Dan memaparkan warna lampu oren



Biru terang

6. Tekan sejenak butang  kuasa untuk menukar mod secara bergilir-gilir yang sepadan dengan gesaan suara:
Mod Eye Beauty→Mod Eye Care →Mod Sleep-aid→Mod Eye Warming → Mod Music

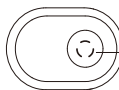

○ Tekan sejenak untuk menukar mod


*Kecuali untuk Mod Music, kompres panas dihidupkan secara lalai dalam mod lain. Klik dua kali butang kuasa untuk mematikan fungsi kompres panas dan lampu penunjuk bertukar berwarna hijau. Klik dua kali sekali lagi untuk menghidupkan kompres panas sekali lagi.

7. Selepas menghidupkan, maka perangkat akan mencari perangkat Bluetooth berpasangan secara automatik di punggung (Masa carian ialah 10 minit, dan lampu muzik akan menjadi warna hijau), dan bersambung secara automatik ke perangkat Bluetooth yang telah dipasangkan. Selepas pemasangan berjaya, lampu muzik bertukar menjadi warna biru, suara mengumumkan "Sambungan Bluetooth telah berjaya", dan audio perangkat yang dipasangkan akan dimainkan.



Lampu muzik bertukar daripada biru muda kepada biru tua

8. Apabila memainkan muzik terbina dalam, maka tekan sejenak butang  muzik untuk memainkan lagu selanjutnya; Tekan lama untuk mencari perangkat Bluetooth baharu; Klik dua kali untuk mematikan/menghidupkan muzik.

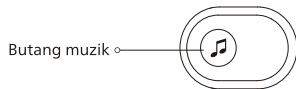

9. Apabila memainkan muzik terbina dalam, selepas bertukar kepada mod yang sepadan, maka perangkat akan dimatikan secara automatik selepas 15 minit secara lalai. Apabila memainkan muzik Bluetooth, selepas bertukar kepada mod yang sepadan, kecuali untuk mod kelonggaran muzik yang tidak memiliki fungsi mematikan secara automatik, mod lain akan ditutup secara automatik selepas 30 minit (15 minit mengurut+15 minit muzik normal).



10. Apabila kuasa lebih rendah daripada 10%, maka lampu penunjuk kuasa berada dalam keadaan Breathing Light warna merah, dan suara akan mengumumkan "Kuasa bateri rendah, sila cas tepat pada masanya" (Hanya sekali setiap kali perangkat dihidupkan).



Penunjuk Breathing Light

11. Apabila mesin berada dalam keadaan mengecas, lampu penunjuk kuasa akan menunjukkan keadaan Breathing Light, yang sesuai untuk standard kuasa semasa perangkat.

- Breathing Light warna merah: 0-9%
- Breathing Light warna oren: 10-50%
- Breathing Light warna hijau: 51-99%
- Breathing Light warna hijau dengan sentiasa menyala: 100%

- ❗ 1. Kali pertama menggunakan, dinasihatkan bahawa dimulai daripada gear rendah mengelakkan rangsangan.
2. Sila tutup mata Anda jika menggunakan produk ini. Penglihatan kabur mungkin akan berlaku jika Anda menanggalkan produk selepas digunakan secara langsung, dan kemudian dapat diletakkan dengan menutup mata Anda selama 1-3 minit.
3. Selepas digunakan, Anda dapat menggunakan kain lembap atau kapas alkohol untuk mengelap permukaan produk, jangan bilas terus-menerus dengan air.