

PHILIPS

sonicare



„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

6100

Pašalina iki 10 kartų daugiau
apnašų

2 režimai, 3 intensyvumai

Vaizdinis įspėjimas apie spaudimą

21 dienų baterijos veikimo laikas



HX7406/02

Švelnus valymas net turint jautrius dantis ir dantenas

Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*

„Philips Sonicare 6100“ pasižymi naujos kartos „Sonicare“ technologija, specialiu režimu „Sensitive“, šepetėlio galvute „S2 Sensitive“ ir mažu intensyvumu. Be to, spaudimo signalas įspėja, jei valote per stipriai. Pridedamas kelioninis dėklas.

Švelnus, nepriekaištingas valymas

- Švelnus valymas turintiems jautrius dantis ir dantenas

Pastangų nereikalaujantis dantų valymasis

- Vaizdinis įspėjimas apie spaudimą padeda apsaugoti dantenas
- Visada žinokite, kada laikas pakeisti šepetėlio galvutę
- 6 dantų valymo nustatymų, pritaikomų pagal jūsų valymo poreikius

Ypatingas švarumas

- Naujos kartos „Sonicare“ technologija

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą

- Suvirinta lazeriu, siekiant užtikrinti tvirtumą ir ilgaamžiškumą
- Optimizuokite dantų valymą su „SmarTimer“ ir „BrushPacer“
- Valymas iki 3 savaičių įkrovus vieną kartą
- Patogiai keliaukite su mūsų kompaktišku, itin patvariu kelioniniu dėklu


Ypatybės

Šepetėlio galvutė „S2 Sensitive“



„Philips Sonicare 6100“ švelniai valo net jautrius dantis ir dantenas. Naujoji šepetėlio galvutė „S2 Sensitive“, pagaminta naudojant „Sonicare“ minkščiausius šerelius, yra sukurta taip, kad valytų švelniai ir pašalintų iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose.**

Naujos kartos „Sonicare“ technologija

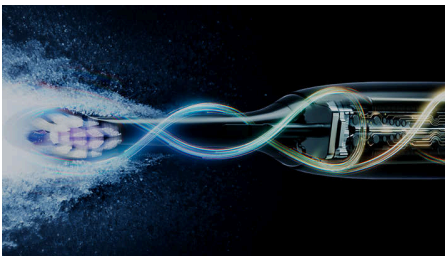

Mėgaukitės maloniu dantų valymo procesu ir nauju burnos priežiūros lygiu naudodami naujos kartos „Sonicare“ technologiją. Naujoviška dantų šepetėlio magnetinė sistema kiekvieno valymo seanso metu reguliuoja dantų valymo galią ir užtikrina optimalų 62 000 šerelių judesių per minutę našumą net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Tuo tarpu dinaminis skysčio poveikis padeda šepetėlio galvutei efektyviai valyti švelniai skalaujant danteną palei dantenų liniją ir tarpdančius, todėl kiekvieną kartą valydami dantis pajusite išskirtinę švarą.

6 dantų valymo nustatymų



Jautriems dantims ir dantenoms sukurta „Philips Sonicare 6100“ galima naudoti dviem valymo režimais. Naudojant „Sensitive“ režimą dantis valomi švelniai ir kruopščiai, o „Clean“ režimu orientuojamasi į apnašų pašalinimą, kad dantis

būtų itin švarūs. Valymą galite pritaikyti pagal savo poreikius, derindami bet kurį režimą su vienu iš 3 intensyvumo lygių, nuo „High“ (aukštas) iki „Low“ (žemas).

Šviečiantis žiedas, išspėjantis apie spaudimą



Patys galite nepastebėti, kad valote dantis per stipriai, tačiau tai nustatys šis dantų šepetėlis. Išmanusis optinis jutiklis tiksliai aptinka perteklinį šepetėlio spaudimą, pradeda šviesti violetine spalva ir sumažina vibraciją. Visada žinosite, kada pakoreguoti dantų valymą, ir jūsų dantenos bus apsaugotos.

„BrushSync“ keitimo priminimas



Svarbu reguliariai keisti šepetėlio galvutę, kad palaikytumėte gerą burnos sveikatą. „BrushSync“ technologija padeda užtikrinti, kad šepetėlio galvutė veiktų kuo geriau. Ši pažangi technologija stebi naudojimo dažnumą ir valymo intensyvumą bei primena, kada laikas keisti šepetėlio galvutę.


2 minučių ir valymo intervalų laikmatis



Dantims visiškai išsivalyti pakanka dviejų minučių, o apie tai informuoja mūsų „SmarTimer“ funkcija. Kad išsivalytumėte dantis

kruopščiai ir tolygiai, „BrushPacer“ funkcija suskirsto valymo procedūrą į kelis etapus, o nedidelė vibracijos pauzė yra ženklas, kad reikia pereiti prie kito etapo. Tai padeda tolygiai išsivalyti dantis kiekvieną kartą.

Sukurta ilgam

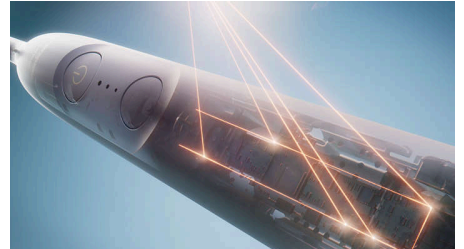

Sukūrėme „Philips Sonicare“ dantų šepetėlius taip, kad jie būtų tvirti, lengvi ir ilgaamžiški. Mūsų pažangi lazerinio suvirinimo procedūra užtikrina, kad dantų šepetėlius galėsite naudoti ilgus metus.

Iki 3 savaičių tarp įkrovimų



Šiame dantų šepetėlyje naudojamas didelio našumo akumuliatorius, kuris padeda užtikrinti dar efektyvesnį dantų valymą. Vienu įkrovimu galite reguliariai valyti dantis iki trijų savaičių.

Kompaktiškas kelioninis dėklas



Mūsų atnaujinto dizaino kelioninis dėklas yra pakankamai kompaktiškas, kad tilptų į krepšį, ir pakankamai tvirtas, kad apsaugotų jūsų „Philips Sonicare“ dantų šepetėlį kelionėje. Jis ne tik apsaugo jūsų dantų šepetėlį, bet jame taip pat patogiu laikyti dvi šepetėlio galvutes. Dabar galite drąsiai leistis į bet kokią kelionę.

Specifikacijos

Intensyvumo nustatymai

Aukštas: Gilesnis valymas

Vidutinis: Valymui kasdien

Žemas: Jautriems dantims ir dantenoms

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 21 diena

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Energijos sąnaudos: Budėjimo režimu be ekrano <0,5 W

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Šviesiai mėlyna

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“ funkcijos kruopščiam dantų valymui

USB-A įkrovimas: Maitinimo adapteris nepridedamas

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 6100 įkraunamas dantų šepetėlis

Šepetėlio galvutė: 1 „S2 Sensitive“

Kelioninis dėklas: 1 grakštus kelioninis dėklas

Įkroviklis: 1

Valymo veiksmingumas

Apnašų pašalinimas: Iki 10 kartų veiksmingesnis*

„Gum Health“: Iki 5 kartų sveikesnės dantenos**

Greitis: 62 000 šepetėlio judesių / min

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

„Sensitive“: Jautriems dantims ir dantenoms

Išmanioji jutiklinė technologija

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas šviečia violetine spalva, Mažesnė vibracija ir tylesnis pulsavimas

Pakeitimo priminimas: „BrushSync“ funkcija padeda suprasti, kada keisti šepetėlio galvutę

