

# PHILIPS

## sonicare



Επαναφορτιζόμενη  
οδοντόβουρτσα Sonic

7100

Αφαιρεί έως και 10 φορές  
περισσότερη οδοντική πλάκα

4 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης

Οπτική ειδοποίηση πίεσης

Εφαρμογή Philips Sonicare



HX7420/02

## Ιδανικός καθαρισμός με έως και 7 φορές πιο υγιή ούλα\*

Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα\*\*

Η Philips Sonicare 7100 διαθέτει τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, 4 λειτουργίες βουρτσίσματος, 3 επίπεδα έντασης, οπτική ειδοποίηση πίεσης και την κεφαλή βουρτσίσματος G3 Premium Gum Care.

### Κορυφαίος, απαλός καθαρισμός

- Έως και 7 φορές πιο υγιή ούλα σε μόλις 2 εβδομάδες\*

### Το βούρτσισμα έγινε παιχνιδάκι

- Θα ξέρετε πάντα πότε είναι ώρα να αλλάξετε την κεφαλή βουρτσίσματος
- Προστατέψτε τα ούλα σας με την οπτική ειδοποίηση πίεσης
- Εξατομικεύστε τον καθαρισμό σας με 12 ρυθμίσεις βουρτσίσματος
- Βελτιώστε τη ρουτίνα σας με την εφαρμογή Philips Sonicare

### Τέλειο καθαρίσμα

- Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

### Σχεδιασμένη για τον τρόπο ζωής σας

- Βελτιστοποιήστε το βούρτσισμα με τα SmarTimer και BrushPacer
- Έως και 3 εβδομάδες βουρτσίσματος με μία πλήρη φόρτιση
- Συγκολλημένη με λείζερ για αντοχή και ανθεκτικότητα
- Μετακινηθείτε χωρίς κόπο με την κορυφαία θήκη μεταφοράς και φόρτισης


# Χαρακτηριστικά

## Κεφαλή βουρτσίσματος G3 Premium Gum Care



Η Philips Sonicare 7100 σας βοηθά να αποκτήσετε πιο υγιή ούλα, για πιο υγιές χαμόγελο. Με την κεφαλή βουρτσίσματος G3 Premium Gum Care, οι τρίχες εργάζονται σκληρά για να απομακρύνουν την πλάκα κατά μήκος της γραμμής των ούλων, προσφέροντας έως και 7 φορές πιο υγιή ούλα σε μόλις 2 εβδομάδες\*. Χάρη στη μαλακή και εύκαμπτη σχεδίαση της κεφαλής βουρτσίσματος, προσαρμόζεται στα περιγράμματα των δοντιών και των ούλων σας για βαθύ καθαρισμό, ενώ αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες\*\*.

## Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

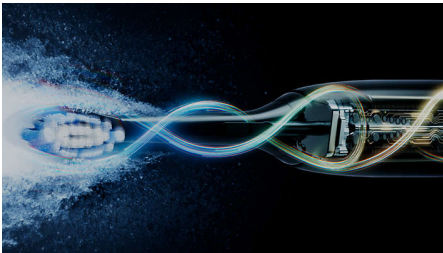

Ζήστε μια απολαυστική εμπειρία βουρτσίσματος και ένα νέο επίπεδο στοματικής φροντίδας με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς. Κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος, το πρωτοποριακό μαγνητικό σύστημα της οδοντόβουρτσας προσαρμόζει την ισχύ βουρτσίσματος σε κάθε καθαρισμό, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση με ακρίβεια 62.000 κινήσεων των τριχών το λεπτό, ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία. Επίσης, η δυναμική κίνηση των υγρών υποστηρίζει την απόδοση καθαρισμού της κεφαλής


βουρτσίσματος, ξεπλένοντας απαλά κατά μήκος της γραμμής των ούλων και ανάμεσα σε κάθε δόντι, βοηθώντας σας να επιτυγχάνετε πλήρη καθαρισμό κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας.

## 12 ρυθμίσεις βουρτσίσματος



Το βούρτσισμα που προτιμάτε βρίσκεται στα χέρια σας με τη Philips Sonicare 7100. Τέσσερις λειτουργίες βουρτσίσματος σας βοηθούν να φροντίζετε για την υγεία των ούλων, τη λεύκανση, την ευαισθησία και τον καθημερινό καθαρισμό. Η λειτουργία Gum Health υποστηρίζει τα υγιή ούλα, κάνοντας απαλό μασάζ στη γραμμή των ούλων. Η λειτουργία White απομακρύνει τους λεκέδες από την επιφάνεια και γυαλίζει τα δόντια για λευκότερο χαμόγελο. Η λειτουργία Sensitive παρέχει απαλό, σχολαστικό καθαρισμό, ενώ η λειτουργία Clean εστιάζει στην αφαίρεση της πλάκας για τέλειο καθαρισμό. Για εξατομικευμένο καθαρισμό, μπορείτε να συνδυάσετε οποιαδήποτε λειτουργία με ένα από τα 3 επίπεδα έντασης, από υψηλή έως χαμηλή, για ιδανικό για εσάς βούρτσισμα.


## Ειδοποίηση πίεσης φωτεινού δακτυλίου

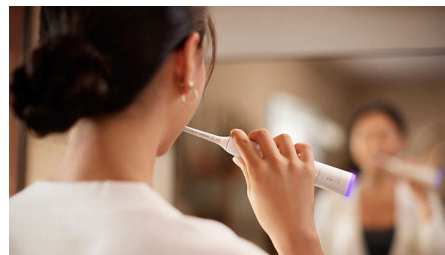

Μπορεί να μην παρατηρήσετε ότι βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, αλλά αυτή η οδοντόβουρτσα θα το καταλάβει. Ο έξυπνος

οπτικός αισθητήρας ανιχνεύει με ακρίβεια την υπερβολική πίεση βουρτσίσματος και αναβοσβήνει με μοβ χρώμα, μειώνοντας παράλληλα τη δόνηση. Θα ξέρετε πάντα πότε να προσαρμόσετε το βούρτσισμα, ενώ τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα.

## Εφαρμογή Philips Sonicare

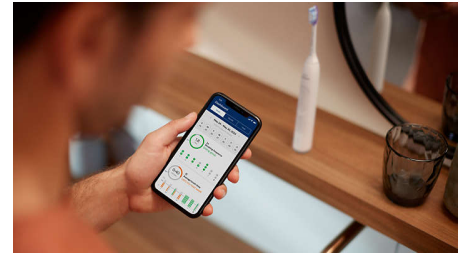

Η εφαρμογή Philips Sonicare συνδυάζεται άψογα με την οδοντόβουρτσα σας και σας υποστηρίζει στη βελτίωση και τη διατήρηση της στοματικής σας υγείας. Η εφαρμογή μας παρακολουθεί την πρόοδο του βουρτσίσματος, παρέχοντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και αναφορές προόδου, ώστε να έχετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το βούρτσισμα των δοντιών σας.

## Χρονόμετρο 2 λεπτών και αισθητήρας ρυθμού βουρτσίσματος



Το μόνο που χρειάζεστε για έναν πλήρη καθαρισμό είναι δύο λεπτά. Το SmartTimer σάς ενημερώνει πότε ολοκληρώνεται αυτό το χρονικό διάστημα. Για ομοιόμορφο καθαρισμό σε όλο το στόμα, το BrushPacer διαιρεί τη διαδικασία καθαρισμού σε τμήματα, με μια ελαφριά παύση της δόνησης ως ένδειξη ότι πρέπει να συνεχίσετε. Αυτό σας βοηθά να επιτυγχάνετε ομοιόμορφο καθαρισμό κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας.


# Χαρακτηριστικά

## Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync



Η τακτική αντικατάσταση της κεφαλής βουρτσίσματος αποτελεί σημαντικό μέρος της καλής στοματικής υγιεινής. Με την τεχνολογία BrushSync, μπορείτε εύκολα να διατηρείτε την κεφαλή βουρτσίσματος σε άριστη κατάσταση. Παρακολουθώντας τη συχνότητα χρήσης και την ένταση του βουρτσίσματος, η πρωτοποριακή τεχνολογία σας υπενθυμίζει πότε είναι ώρα να αλλάξετε την κεφαλή βουρτσίσματος.

## Ανθεκτική σχεδίαση

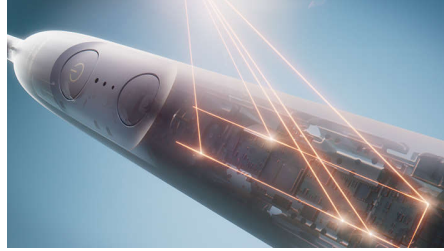

Σχεδιάσαμε ξανά τις οδοντόβουρτσες Philips Sonicare από μέσα προς τα έξω, ώστε να είναι ανθεκτικές, ελαφριές και μεγάλης διάρκειας. Χάρη στην προηγμένη διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ, οι οδοντόβουρτσές μας έχουν σχεδιαστεί για να βουρτσίζουν τα δόντια σας για πολλά χρόνια.

## Έως και 3 εβδομάδες μεταξύ των φορτίσεων



Αυτή η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί μια μπαταρία υψηλής απόδοσης που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει το βούρτσισμα. Με μία μόνο

φόρτιση, μπορείτε να απολαύσετε έως και τρεις εβδομάδες τακτικού βουρτσίσματος πριν χρειαστεί να την επαναφορτίσετε.

## Θήκη μεταφοράς και φόρτισης



Η ανασχεδιασμένη θήκη μεταφοράς και φόρτισης με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης και καλώδιο φόρτισης σας επιτρέπει να επαναφορτίσετε την οδοντόβουρτσά σας στις μετακινήσεις σας, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε τη θήκη. Όχι μόνο είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να διατηρεί την οδοντόβουρτσά σας ασφαλή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής της, αλλά είναι και αρκετά μικρή ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε τσάντα, καθιστώντας την τον τέλειο σύντροφο για τα ταξίδια σας.

# Προδιαγραφές

## Εντάσεις

**Δυνατά:** Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό

**Μέτρια:** Για καθαρισμό κάθε μέρα

**Χαμηλά:** Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

## Ενημέρωση προϊόντος

**Περίοδος υποστήριξης:** Η Philips θα παρέχει τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

## Ρεύμα

**Τάση:** 100-240 V

## Τεχνικές προδιαγραφές

**Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο):** 21 ημέρες

**Μπαταρία:** Επαναφορτιζόμενο

**Τύπος μπαταριών:** Ιόντων λιθίου

**Κατανάλωση ενέργειας:** Αναμονή χωρίς οθόνη <0.5 W

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

**Χρώματα:** Λευκό

## Σέρβις

**Εγγύηση:** Περιορισμένη διετής εγγύηση

## Συμβατότητα

**Συμβατότητα Android:** Τηλέφωνα Android με Bluetooth 4.0 και πάνω

**Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth:** Εφαρμογή βουρτσίσματος

**Συμβατότητα iOS:** iPhone με Bluetooth 4.0 και πάνω

## Ευκολία στη χρήση

**Συμβατότητα λαβής:** Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

**Λαβή:** Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

**Ενδειξη μπαταρίας:** Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας

**Χρονομετρητής:** SmartTimer και BrushPacer για ολοκληρωμένο και σχολαστικό βούρτσισμα

**Φόρτιση USB-A:** Δεν περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό

## Περιλαμβάνεται

**Λαβή:** 1 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 7100

**Κεφαλή βουρτσίσματος:** 2 G3 Premium Gum Care

**Θήκη ταξιδιού:** 1 Θήκη ταξιδιού φόρτισης

**Βάση σύνδεσης:** 1

**Καλώδιο USB-A:** 1

## Καθαριστική απόδοση

**Αφαίρεση της πλάκας:** Έως 10 φορές πιο αποτελεσματική\*\*

**Υγεία των ούλων:** Έως 7x υγιέστερα ούλα\*

**Ταχύτητα:** 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

## Λειτουργίες

**Καθαρισμός:** Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

**Λευκό:** Αφαίρεση κηλίδων από την επιφάνεια των δοντιών

**Υγεία των ούλων:** Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα σας

**Sensitive:** Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

## Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

**Πληροφορίες για την πίεση:** Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με μοβ χρώμα, Μειωμένη δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος

**Υπενθύμιση αντικατάστασης:** Με την τεχνολογία BrushSync θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος



\* στη λειτουργία Gum Health σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε 2 εβδομάδες.

\*\* Στη λειτουργία Gum Health σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε δυσπρόσιτα σημεία σε 2 εβδομάδες.