

PHILIPS

sonicare



Wiederaufladbare
Schallzahnbürste

7100

Bis zu 10 x mehr Plaque-
Entfernung

4 Putzmodi, 3 Intensitätsstufen

Visuelle Andruckkontrolle

Philips Sonicare App



HX7423/01

Perfekte Reinigung für bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch*

Bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung**

Die Philips Sonicare 7100 verfügt über Sonicare Technologie der nächsten Generation, 4 Putzmodi, 3 Intensitätsstufen, eine visuelle Andruckkontrolle und unseren G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf.

Bequeme, sanfte Reinigung

- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur 2 Wochen*

Zähneputzen leicht gemacht

- Schützt Ihr Zahnfleisch mit der visuellen Andruckkontrolle
- Sie wissen immer, wann es Zeit für einen neuen Bürstenkopf ist
- Verbessern Sie Ihre Routine mithilfe der Philips Sonicare App
- Personalisierte Reinigung mit 12 Putzeinstellungen

Außergewöhnliche Reinigung

- Sonicare Technologie der nächsten Generation

Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit SmarTimer und BrushPacer
- Lasergeschweißt für eine längere Haltbarkeit
- Bequem Reisen mit unserem Premium-Reiseladeetui
- Bis zu 3 Wochen Zähneputzen mit einer vollständigen Ladung


Besonderheiten

G3 Premium Gum Care Bürstenkopf



Die Philips Sonicare 7100 verhilft Ihnen zu gesünderem Zahnfleisch für ein gesünderes Lächeln. Mit dem G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf wird Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt und verhilft Ihnen zu bis zu 7 x gesünderem Zahnfleisch in nur 2 Wochen*. Dank des weichen, flexiblen Designs des Bürstenkopfes passt er sich den Konturen von Zähnen und Zahnfleisch an und sorgt so für eine gründliche Reinigung bei gleichzeitiger Entfernung von bis zu 10 x mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste**.

Sonicare Technologie der nächsten Generation

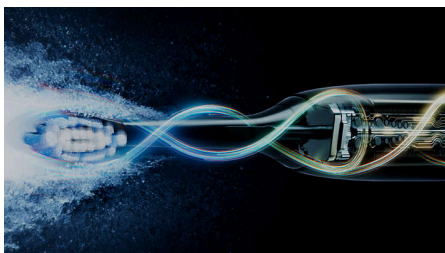

Genießen Sie ein einzigartiges Zahnputzerlebnis und ein neues Level der Mundhygiene mit der Sonicare Technologie der nächsten Generation. Während des Putzens passt das innovative Magnetsystem der Zahnbürste die Putzleistung automatisch an. So sorgt sie für eine gleichbleibend optimale Leistung von 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute – selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die


Borsten, um Plaque zu entfernen, sodass Sie bei jedem Zähneputzen eine umfassende Reinigung erhalten.

12 Putzeinstellungen



Reinigung auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten mit der Philips Sonicare 7100. 4 verschiedene Putzmodi unterstützen Sie bei gesundem Zahnfleisch, Zahnaufhellung, Empfindlichkeit und täglicher Reinigung. Der Modus "Gum Health" unterstützt gesundes Zahnfleisch, indem der Zahnfleischrand sanft massiert wird. Im Modus "White" werden oberflächliche Verfärbungen entfernt und die Zähne für ein strahlendes Lächeln poliert. Der Modus "Sensitive" bietet eine sanfte, gründliche Reinigung, während der Modus "Clean" den Fokus auf die Plaque-Entfernung und eine hervorragende Reinigung legt. Für eine personalisierte Reinigung können Sie jeden Modus mit einer von 3 Intensitätsstufen von hoch bis niedrig kombinieren, um das Zähneputzen individuell anzupassen.


Andruckkontrolle mit Leuchtring

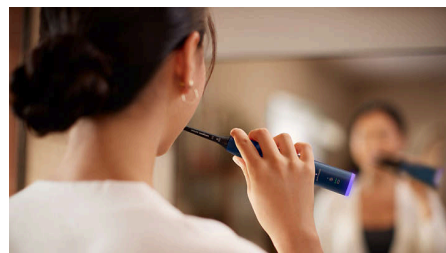

Vielleicht merken Sie es selbst nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber dieser Zahnbürste entgeht es nicht. Der intelligente

Sensor erkennt übermäßigen Druck präzise. Er blinkt dann violett und gleichzeitig wird die Vibration reduziert, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. So wissen Sie immer, mit wie viel Druck Sie putzen müssen.

Philips Sonicare App

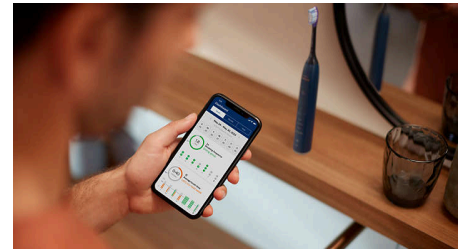

Die Philips Sonicare App ist der ideale Begleiter für Ihre Zahnbürste. Die App hilft Ihnen, Ihre Mundgesundheit zu verbessern und aufrechtzuerhalten. Unsere App verfolgt, wie Sie Ihre Zähne putzen, und liefert Ihnen personalisierte Anleitungen und Fortschrittsberichte mit wertvollen Einblicken in Ihre Putztechnik.


2-Minuten-Timer und BrushPacer



Für eine vollständige Reinigung Ihrer Zähne benötigen Sie nur zwei Minuten. Unser SmarTimer informiert Sie, wenn die Zeit abgelaufen ist. Für eine gleichmäßige Reinigung teilt der BrushPacer Ihren Mund in Segmente auf. Eine kurze Pause bei der Vibration signalisiert, dass es Zeit für das nächste Segment ist. Das hilft Ihnen, bei jedem Zähneputzen eine vollständige Reinigung zu erzielen.


Besonderheiten

BrushSync Erinnerungsfunktion

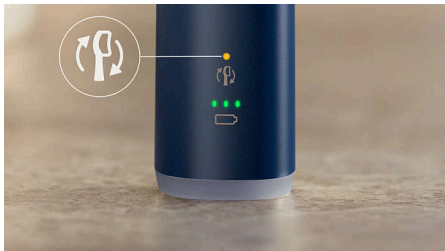


Für eine gute Mundgesundheit ist es wichtig, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Mit der BrushSync Technologie können Sie ganz einfach für eine optimale Leistung Ihres Bürstenkopfes sorgen. Die innovative Technologie zeichnet auf, wie häufig und wie intensiv die Zahnbürste genutzt wird, und informiert Sie, wenn ein neuer Bürstenkopf benötigt wird.

Langlebiges Design

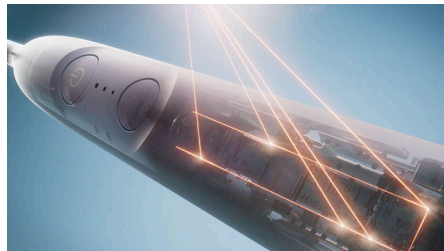

Wir haben das Design unserer Philips Sonicare Zahnbürsten von innen heraus überarbeitet, damit sie robust, leicht und langlebig sind. Dank unseres fortschrittlichen Laserschweißprozesses können Sie Ihre Zähne mit unseren Zahnbürsten jahrelang putzen.

Bis zu 3 Wochen sorglos Zähneputzen zwischen den Ladevorgängen

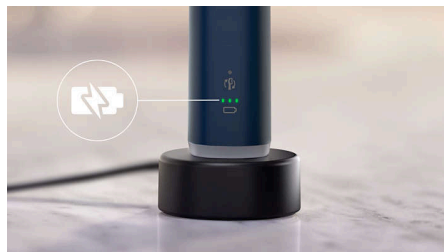

Diese Zahnbürste verwendet einen leistungsstarken Akku für bequemes Zähneputzen. Mit nur einer Akkuladung können

Sie sich die Zähne bis zu drei Wochen lang regelmäßig putzen, bevor Sie die Sonicare wieder aufladen müssen.

Reiseladeetui



Mit unserem überarbeiteten Reiseladeetui mit integriertem Ladeanschluss und Ladekabel können Sie Ihre Zahnbürste unterwegs aufladen, ohne das Etui öffnen zu müssen. Sie ist nicht nur robust genug, um Ihre Zahnbürste unterwegs zu schützen, sondern auch kompakt genug, um in jede Tasche zu passen – der perfekte Reisebegleiter.

Daten

Intensitätsstufen

Hoch: Für eine noch bessere Reinigung

Mittel: Für die tägliche Reinigung

Niedrig: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Produktaktualisierung

Supportzeitraum: Philips stellt die erforderlichen Sicherheits-Updates bis zum 31. Dezember 2026 bereit.

Leistung

Stromspannung: 100–240 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 21 Tage

Batterietyp: Lithium-Ionen

Consumer Trade Item

Height: 23.2 cm

Width: 6 cm

Length: 17.1 cm

Net weight: 0.378 kg

Gross weight: 0.489 kg

GTIN: 8720689021463

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85098000

Außenkarton

Height: 24.9 cm

Width: 18.5 cm

Length: 19.3 cm

Net weight: 1.134 kg

Gross weight: 1.601 kg

GTIN: 18720689021460

Palette

Height: 114 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 108.864 kg

Gross weight: 178.956 kg

GTIN: 68720689021465

Design und Materialausführung

Farbe: Marineblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Gewährleistung

Pallet Layer

Height: 24.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android-Telefone mit Bluetooth 4.0 oder höher

Kabellose Bluetooth-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

iOS-Kompatibilität: iPhone mit Bluetooth 4.0 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Timer: SmarTimer und BrushPacer, für eine umfassende und gründliche Reinigung

Laden über USB-A: Netzadapter nicht enthalten

Artikel enthalten

Handstück: 1 7100 wiederaufladbare Zahnbürste

Reiseetui: 1 Reiseladeetui

Bürstenkopf: 2 G3 Premium Gum Care

Ladegerät: 1

USB-A-Kabel: 1

Reinigungsleistung

Plaque-Entfernung: Bis zu 10 x effektiver**

Gesundes Zahnfleisch: Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch*

Geschwindigkeit:

62.000 Bürstenkopfbewegungen/min

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Gesundes Zahnfleisch: Massiert sanft das Zahnfleisch

Sensitive: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

Druck-Feedback: Leuchtring leuchtet violett, Abgeschwächte Vibration und pulsierendes Geräusch

Erinnerungsfunktion: BrushSync informiert Sie,, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

