

PHILIPS

sonicare



Επαναφορτιζόμενη
οδοντόβουρτσα Sonic

7100

Αφαιρεί έως και 20 φορές
περισσότερη οδοντική πλάκα

4 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης

Οπτική ειδοποίηση πίεσης

Εφαρμογή Philips Sonicare



HX7428/02

Ιδανικός καθαρισμός με έως και 7 φορές πιο υγιή ούλα**

Αφαιρεί έως και 20 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*

Η Philips Sonicare 7100 διαθέτει τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, 4 λειτουργίες βουρτσίσματος, 3 επίπεδα έντασης, οπτική ειδοποίηση πίεσης και την κεφαλή βουρτσίσματος G3 Premium Gum Care.

Κορυφαίος, απαλός καθαρισμός

- Μία κεφαλή βουρτσίσματος για πλήρη φροντίδα

Το βούρτσισμα έγινε παιχνιδάκι

- Προστατέψτε τα ούλα με τον οπτικό αισθητήρα πίεσης
- Θα ξέρετε πάντα πότε είναι ώρα να αλλάξετε την κεφαλή βουρτσίσματος
- Εξατομικεύστε τον καθαρισμό σας με 12 ρυθμίσεις βουρτσίσματος
- Βελτιώστε τη ρουτίνα των ασθενών σας με την εφαρμογή Philips Sonicare

Τέλειο καθαρίσμα

- Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

Σχεδιασμένη για τον τρόπο ζωής σας

- Απολαύστε ευκολότερα ταξίδια με τη μικρή και εξαιρετικά ανθεκτική θήκη ταξιδιού
- Συγκολλημένη με λείζερ για αντοχή και ανθεκτικότητα
- Βελτιστοποιήστε το βούρτσισμα με τα SmarTimer και BrushPacer
- Έως και 3 εβδομάδες βουρτσίσματος με μία πλήρη φόρτιση


Χαρακτηριστικά

Κεφαλή βουρτσίσματος A3 All-in-One +πολλά άλλα



Η κεφαλή βουρτσίσματος A3 Premium All-in-One σχεδιάστηκε με γνώμονα τους ασθενείς. Με την κεφαλή βουρτσίσματος A3, οι ασθενείς μπορούν να επιτύχουν έως και 20 φορές περισσότερη αφαίρεση οδοντικής πλάκας*, έως και 15 φορές πιο υγιή ούλα** και να αφαιρέσουν έως και 100% περισσότερους λεκέδες***. Περιλαμβάνεται επίσης: Η κεφαλή βουρτσίσματος S2 Sensitive που είναι η πιο απαλή και μαλακή κεφαλή μας και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι παρέχει απαλό καθαρισμό που αφαιρεί 10 φορές περισσότερη πλάκα σε δυσπρόσιτα σημεία* Η κεφαλή βουρτσίσματος G3 Premium Gum Care παρέχει έως και 7 φορές πιο υγιή ούλα σε μόλις 2 εβδομάδες****.

Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

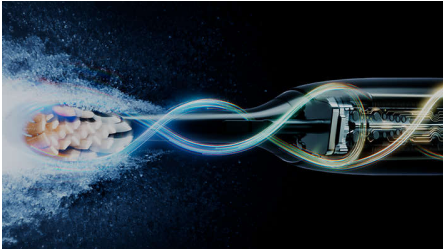

Ζήστε μια απολαυστική εμπειρία βουρτσίσματος και ένα νέο επίπεδο στοματικής φροντίδας με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς. Κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος, το πρωτοποριακό μαγνητικό σύστημα της οδοντόβουρτσας προσαρμόζει την ισχύ βουρτσίσματος σε κάθε καθαρισμό, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση με 62.000 κινήσεις των τριχών το λεπτό, ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία. Επίσης, η δυναμική κίνηση των υγρών υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό της πλάκας,


βοηθώντας σας να επιτυγχάνετε πλήρη καθαρισμό κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας.

12 ρυθμίσεις βουρτσίσματος



Το βούρτσισμα που προτιμούν οι ασθενείς βρίσκεται στα χέρια τους με τη Philips Sonicare 7100. Τέσσερις λειτουργίες βουρτσίσματος βοηθούν στη φροντίδα της υγείας των ούλων, της λεύκανσης, της ευαισθησίας και του καθημερινού καθαρισμού. Η λειτουργία Gum Health υποστηρίζει τα υγιή ούλα, κάνοντας απαλό μασάζ στη γραμμή των ούλων. Η λειτουργία White απομακρύνει τους λεκέδες από την επιφάνεια και γυαλίζει τα δόντια για λευκότερο χαμόγελο. Η λειτουργία Sensitive παρέχει απαλό, σχολαστικό καθαρισμό, ενώ η λειτουργία Clean εστιάζει στην αφαίρεση της πλάκας για τέλειο καθαρισμό. Για εξατομικευμένο καθαρισμό, οι ασθενείς μπορούν να συνδυάσουν οποιαδήποτε λειτουργία με ένα από τα τρεις επίπεδα έντασης, από υψηλή έως χαμηλή, για απόλυτα ιδανικό βούρτσισμα.

Αισθητήρας πίεσης με φωτεινό δακτύλιο

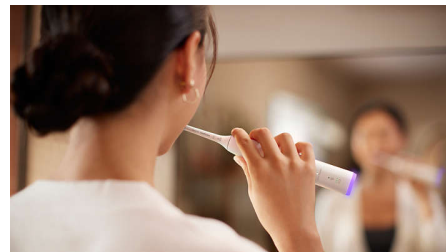

Οι ασθενείς μπορεί να μην παρατηρήσουν ότι βουρτσίζουν τα δόντια τους πολύ δυνατά, αλλά αυτή η οδοντόβουρτσα θα το καταλάβει. Ο έξυπνος οπτικός αισθητήρας ανιχνεύει με ακρίβεια την υπερβολική πίεση βουρτσίσματος

και αναβοσβήνει με μοβ χρώμα, μειώνοντας παράλληλα τη δόνηση. Οι ασθενείς θα ξέρουν πάντα πότε να προσαρμόσουν το βούρτσισμα, ενώ τα ούλα τους θα παραμείνουν προστατευμένα.

Εφαρμογή Philips Sonicare



Η εφαρμογή Philips Sonicare συνδυάζεται άψογα με την οδοντόβουρτσα και υποστηρίζει τους ασθενείς στη βελτίωση και τη διατήρηση της στοματικής τους υγείας. Η εφαρμογή μας παρακολουθεί την πρόοδο του βουρτσίσματος, παρέχοντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και αναφορές προόδου, ώστε οι ασθενείς να έχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το βούρτσισμα των δοντιών τους.

Χρονόμετρο 2 λεπτών και αισθητήρας ρυθμού βουρτσίσματος



Το μόνο που χρειάζονται όλοι οι ασθενείς για έναν πλήρη καθαρισμό είναι δύο λεπτά. Το SmartTimer ενημερώνει τους ασθενείς πότε ολοκληρώνεται αυτό το χρονικό διάστημα. Για ομοιόμορφο καθαρισμό σε όλο το στόμα, το BrushPacer χωρίζει τη διαδικασία καθαρισμού σε τμήματα, με μια ελαφριά παύση της δόνησης ως ένδειξη ότι πρέπει να συνεχίσουν. Έτσι, οι ασθενείς πετυχαίνουν ομοιόμορφο καθαρισμό κάθε φορά που βουρτσίζουν τα δόντια τους.


Χαρακτηριστικά

Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync



Η τακτική αντικατάσταση της κεφαλής βουρτσίσματος αποτελεί σημαντικό μέρος της καλής στοματικής υγιεινής. Με την τεχνολογία BrushSync, οι ασθενείς μπορούν εύκολα να διατηρούν την κεφαλή βουρτσίσματος σε άριστη κατάσταση. Παρακολουθώντας τη συχνότητα χρήσης και την ένταση του βουρτσίσματος, η πρωτοποριακή τεχνολογία υπενθυμίζει στους ασθενείς πότε είναι ώρα να αλλάξουν την κεφαλή βουρτσίσματος.

Ανθεκτική σχεδίαση

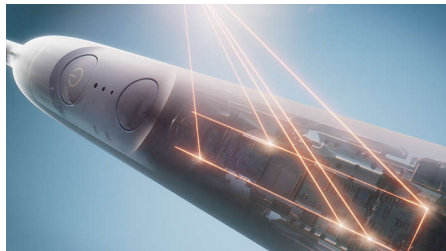

Σχεδιάσαμε ξανά τις οδοντόβουρτσες Philips Sonicare από μέσα προς τα έξω, ώστε να είναι ανθεκτικές, ελαφριές και μεγάλης διάρκειας. Χάρη στην προηγμένη διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ, οι οδοντόβουρτσές μας έχουν σχεδιαστεί για να βουρτσίζουν τα δόντια των ασθενών για πολλά χρόνια.

Έως και 3 εβδομάδες μεταξύ των φορτίσεων



Αυτή η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί μια μπαταρία υψηλής απόδοσης που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει το βούρτσισμα των ασθενών.

Με μία μόνο φόρτιση, οι ασθενείς μπορούν να απολαύσουν έως και τρεις εβδομάδες τακτικού βουρτσίσματος πριν χρειαστεί να την επαναφορτίσουν.

Μικρή θήκη μεταφοράς



Η επανασχεδιασμένη θήκη ταξιδιού είναι αρκετά μικρή ώστε να χωρά σε μια τσάντα και αρκετά ανθεκτική ώστε να προστατεύει την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Όχι μόνο προστατεύει την οδοντόβουρτσα, αλλά επίσης χωράει άνετα δύο κεφαλές βουρτσίσματος. Τώρα οι ασθενείς μπορούν να ταξιδεύουν με σιγουριά όπου κι αν θέλουν.

Προδιαγραφές

Εντάσεις

Δυνατά: Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό

Μέτρια: Για καθαρισμό κάθε μέρα

Χαμηλά: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Ενημέρωση προϊόντος

Περίοδος υποστήριξης: Η Philips θα παρέχει τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 21 ημέρες

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Κατανάλωση ενέργειας: Αναμονή χωρίς οθόνη <0.5 W

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώματα: Λευκό

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Συμβατότητα

Συμβατότητα Android: Τηλέφωνα Android με Bluetooth 4.0 και πάνω

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth: Εφαρμογή βουρτσίσματος

Συμβατότητα iOS: iPhone με Bluetooth 4.0 και πάνω

Ευκολία στη χρήση

Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Ενδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας

Χρονομετρητής: SmartTimer και BrushPacer για ολοκληρωμένο και σχολαστικό βούρτσισμα

Φόρτιση USB-A: Δεν περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό

Περιλαμβάνεται

Λαβή: 1 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 7100

Κεφαλή βουρτσίσματος: 1 A3 Premium All-in-One, 1 S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

Θήκη ταξιδιού: 1 λεπτή θήκη ταξιδιού

Βάση σύνδεσης: 1

Καλώδιο USB-C: 1

Καθαριστική απόδοση

Αφαίρεση της πλάκας: Έως 20 φορές πιο αποτελεσματική*

Υγεία των ούλων: Έως 15 φορές πιο υγιή ούλα***

Λεύκανση: Έως 100% λιγότερες κηλίδες**

Ταχύτητα: 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Λευκό: Αφαίρεση κηλίδων από την επιφάνεια των δοντιών

Υγεία των ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα σας

Sensitive: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

Πληροφορίες για την πίεση: Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με μοβ χρώμα, Μειωμένη δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος

Υπενθύμιση αντικατάστασης: Με την τεχνολογία BrushSync θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος

