

PHILIPS

sonicare



Series 6100

Mitarbeiterertestmodell

Bis zu 20 x mehr Plaque-Entfernung*

2 Modi, 3 Intensitätsstufen

Visuelle Andruckkontrolle

21 Tage Akkulaufzeit



HX7408/02

Sanfte Reinigung, selbst für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Bis zu 20 x mehr Plaque-Entfernung*

Die Philips Sonicare 6100 mit Next-Generation Sonicare Technologie verfügt über einen speziellen Sensitive-Modus, 2x den A3 All-in-One Bürstenköpfe sowie 1x den S2 Sensitive Bürstenkopf und 3 Intensitätsstufen. Außerdem wissen Sie dank visueller Andruckkontrolle, wenn Sie zu viel Druck verwenden.

Sanfte, außergewöhnliche Reinigung

- Komplettpflege für eine gesunde Mundhygiene

Zähneputzen leicht gemacht

- Schützt das Zahnfleisch mit der visuellen Andruckkontrolle
- Sie wissen immer, wann es Zeit für einen neuen Bürstenkopf ist
- Personalisierte Reinigung mit 6 Putzeinstellungen

Außergewöhnliche Reinigung

- Sonicare Technologie der nächsten Generation

Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Bis zu 3 Wochen Zähneputzen mit einer vollständigen Ladung
- Lasergeschweißt für Festigkeit und Haltbarkeit
- Optimierung des Putzvorgangs mit SmarTimer und BrushPacer

Besonderheiten

A3 All-in-One-Bürstenkopf +mehr



Der A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf wurde speziell für Patienten entwickelt. Mit dem A3 Bürstenkopf können Ihre Patienten bis zu 20 x mehr Plaque entfernen*, bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch** erzielen und bis zu 100 % mehr Verfärbungen*** entfernen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: Dank des neuen S2 Sensitive Bürstenkopfes mit den weichsten Sonicare Borsten wird eine sanfte Reinigung erzielt, bei der bis zu 10 x mehr Plaque an schwer erreichbaren Stellen entfernt wird*.

Sonicare Technologie der nächsten Generation



Genießen Sie ein einzigartiges Zahnputzerlebnis und ein neues Level der Mundhygiene mit der Sonicare Technologie der nächsten Generation. Während des Putzens passt das innovative Magnetsystem der Zahnbürste die Putzleistung


automatisch an. So sorgt sie für eine gleichbleibend optimale Leistung von 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute – selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten, um Plaque zu entfernen, sodass Sie bei jedem Zähneputzen eine umfassende Reinigung erhalten.

6 Putzeinstellungen



Die Philips Sonicare 6100 wurde für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch entwickelt und gibt Ihnen die Wahl zwischen 2 Putzmodi. Der Modus "Sensitive" bietet eine sanfte, gründliche Reinigung, während das Programm "Clean" sich auf die Plaque-Entfernung konzentriert, um ein herausragendes Putzergebnis zu erzielen. Für eine personalisierte Reinigung können Sie jeden Modus mit einer von 3 Intensitätsstufen von hoch bis niedrig kombinieren. Eine Zahnbürste, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Andruckkontrolle mit Leuchtring

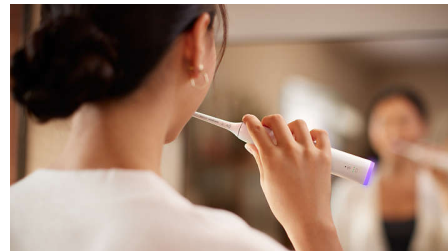

Vielleicht merken Sie es selbst nicht, wenn sie beim Zähneputzen zu fest drücken, aber dieser Zahnbürste entgeht es nicht. Der intelligente Sensor erkennt übermäßigen Druck präzise. Er blinkt dann violett und gleichzeitig wird die Vibration reduziert, um das Zahnfleisch zu schützen. So wissen Sie immer, mit wie viel Druck sie putzen müssen.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Für eine gute Mundgesundheit ist es wichtig, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Mit der BrushSync Technologie können Sie ganz einfach für eine optimale Leistung ihres Bürstenkopfes sorgen. Die innovative Technologie zeichnet auf, wie häufig und wie intensiv Sie putzen, und informiert Sie, wenn ein neuer Bürstenkopf benötigt wird.


Besonderheiten

2-Minuten-Timer und BrushPacer



Für eine vollständige Reinigung der Zähne benötigt man nur zwei Minuten. Unser SmarTimer informiert den Benutzer, wenn die Zeit abgelaufen ist. Für eine gleichmäßige Reinigung teilt der BrushPacer den Mund in Segmente auf. Eine kurze Pause bei der Vibration signalisiert, dass es Zeit für das nächste Segment ist. Das hilft dem Benutzer, bei jedem Zähneputzen eine gleichmäßige Reinigung zu erzielen.

Langlebiges Design

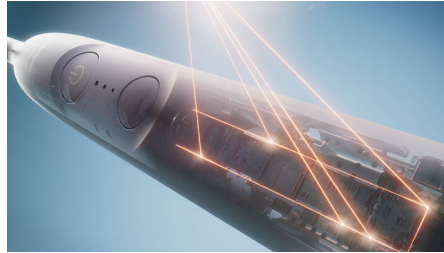

Wir haben das Design unserer Philips Sonicare Zahnbürsten grundlegend überarbeitet, damit sie robust, leicht und langlebig sind. Dank unseres fortschrittlichen Laserschweißprozesses ermöglichen Sie problemloses Zähneputzen über Jahre hinweg.

Bis zu 3 Wochen sorglos Zähneputzen zwischen den Ladevorgängen



Diese Zahnbürste verwendet einen leistungsstarken Akku für bequemes Zähneputzen. Mit nur einer Akkuladung können Benutzer sich die Zähne bis zu drei Wochen lang regelmäßig putzen, bevor Sie die Zahnbürste wieder aufladen müssen.

Daten

Intensitätsstufen

Hoch: Für eine noch bessere Reinigung

Mittel: Für die tägliche Reinigung

Niedrig: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Technische Daten

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 21 Tage

Batterie: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Energieverbrauch: Standby ohne Anzeige

<0,5 W

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt

Akkustand an

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare

Bürstenköpfe

Timer: SmarTimer und BrushPacer für eine

umfassende und gründliche Reinigung

Laden über USB-A: Netzadapter nicht enthalten

Artikel enthalten

Handstück: 1 6100 wiederaufladbare Zahnbürste

Bürstenkopf: 1 x A3 Premium All-in-One, 1 S2

Sensitive, 1 W2 Optimal White

Ladegerät: 1

Reinigungsleistung

Plaque-Entfernung: Bis zu 20 x effektiver*

Gesundes Zahnfleisch: Bis zu 15 x gesünderes
Zahnfleisch***

Weißer Zähne: Bis zu 100 % weniger

Verfärbungen**

Geschwindigkeit:

62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Sensitive: Für empfindliche Zähne und
Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

Druck-Feedback: Leuchtring leuchtet violett,
Abgeschwächte Vibration und pulsierendes
Geräusch

Erinnerungsfunktion: BrushSync informiert Sie,
wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden
sollte

Consumer Trade Item

Height: 23.2 cm

Width: 6 cm

Length: 11 cm

Net weight: 0.267 kg

Gross weight: 0.346 kg

GTIN: 8720689021401

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85098000

Außenkarton

Height: 24.9 cm

Width: 12.4 cm

Length: 19.2 cm

Net weight: 0.801 kg

Gross weight: 1.136 kg

GTIN: 18720689021408

Pallet Layer

Height: 24.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Palette

Height: 114 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 118.548 kg

Gross weight: 193.388 kg

GTIN: 68720689021403

