

PHILIPS

sonicare



Wiederaufladbare
Zahnbürste

Sonicare

Bis zu 7 x mehr Plaque-
Entfernung

Bis zu 2 x weißere Zähne**

Sonicare Technologie der
nächsten Generation

Drucksensor



HX7110/02

Fortschrittliche Pflege für weißere Zähne**

Entfernt bis zu 7x mehr Plaque im Vergleich zu einer
Handzahnbürste

Die Philips Sonicare 5500 verfügt über die Next-Generation Sonicare-Technologie, einen speziellen Reinigungsmodus zur Zahnaufhellung sowie eine integrierte Andruckkontrolle. Mit Reisetui.

Putzen leicht gemacht

- Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis
- Angeleitete Putzeinheiten
- Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes

Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Pflege zum Mitnehmen – für überall
- 21 Tage für regelmäßiges Zähneputzen

Fühlen Sie die Pflege von Sonicare

- Bis zu 2 x weißere Zähne**
- Sonicare Technologie der nächsten Generation
- Zusätzliche Unterstützung zum Schutz Ihres Zahnfleisches


Besonderheiten

Weißere und hellere Zähne



Mit dem mittigen Pad im W-Bürstenkopf für Zahnaufhellung zur Entfernung von Verfärbungen sind weiße Zähne in greifbarer Nähe für Sie. Die diamantförmigen Borsten wurden entwickelt, um den Oberflächenkontakt zu verbessern und Verfärbungen effektiver zu entfernen. Sie haben bis zu 2 x weißere Zähne in nur einer Woche.* Dank der dicht gepackten Borsten wird 7 x mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste, während der gesamte Mund erfrischend gereinigt wird.

Sonicare Technologie der nächsten Generation

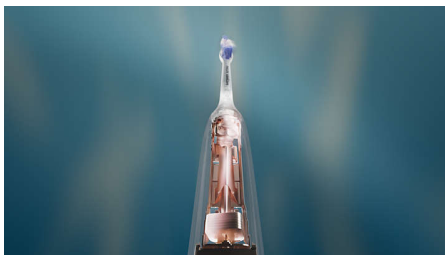

Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie der nächsten Generation, die ein zuverlässiges und gleichmäßiges Putzerlebnis mit stets hervorragenden Ergebnisse bietet. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer zu reinigende Stellen gelangen. Genießen Sie eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Sonicare Fluid Action unterstützt die Reinigung der Borsten, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gepresst wird.

Drucksensor



Da es einfach ist, zu hart zu putzen, verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Der Sensor informiert Sie über haptische Vibrationen, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Entspannen Sie sich und Ihr Zahnfleisch bleibt geschützt!

Putzmodi und Intensitätsstufen



Optimieren Sie Ihre Putzroutine mit 2 Putzmodi. Egal, ob Sie etwas mehr Kraft oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen, Sie können es haben. Wählen Sie zwischen dem Clean- und dem White-Modus.

Reiseetui



Mit unserem Reiseetui können Sie Ihr Gerät auch auf Reisen mitnehmen. Es ist robust genug, um Ihre Sonicare Zahnbürste zu schützen, aber dennoch so kompakt, dass sie in jede Tasche passt und somit der perfekte Reisebegleiter ist.

SmartTimer und BrushPacer



Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 20 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.

Erinnerungsfunktion



Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

21 Tage Akkulaufzeit



Eine vollständige Ladung hält bis zu 21 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Routine.

Daten

Intensitätsstufen

Hoch: Für eine noch bessere Reinigung

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 21 Tage

Energieverbrauch: Standby ohne Anzeige

<<0,5 W

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Timer: BrushPacer und SmartTimer

Artikel enthalten

Handstück: 1 5500 Wiederaufladbare Zahnbürste

Reiseetui: 1

Bürstenkopf: 1 W Optimal White

Ladegerät: 1

Reinigungsleistung

Plaque-Entfernung: Bis zu 7 x effektiver*

Weißer Zähne: Bis zu 2 x weißere Zähne**

Geschwindigkeit:

62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Intelligente Sensor-Technologie

Druck-Feedback: Vibration und pulsierendes Geräusch

Erinnerungsfunktion: Erinnerung zum Austausch des Bürstenkopfes informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden muss

Consumer Trade Item

Height: 23.2 cm

Width: 17.1 cm

Length: 6 cm

Net weight: 0.352 kg

Gross weight: 0.463 kg

GTIN: 8720689021678

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85098000

Außenkarton

Height: 24.9 cm

Width: 18.5 cm

Length: 19.3 cm

Net weight: 1.056 kg

Gross weight: 1.527 kg

GTIN: 18720689021675

Pallet Layer

Height: 24.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Palette

Height: 114 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 90.144 kg

Gross weight: 160.236 kg

GTIN: 68720689021670

Sonstiges

Height: 114 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68720689021670

