

# PHILIPS

## sonicare



Wiederaufladbare  
Schallzahnbürste

5500

Bis zu 7 x mehr Plaque-  
Entfernung

2 Putzmodi

Integrierte Andruckkontrolle

21 Tage Akkulaufzeit



HX7119/01

## Effektive Reinigung und bis zu 2 x weißere Zähne \*

Entfernt bis zu 7x mehr Plaque im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Die Philips Sonicare 5500 verfügt über die Next-Generation Sonicare-Technologie, einen speziellen Reinigungsmodus zur Zahnaufhellung sowie eine integrierte Andruckkontrolle. Mit Reiseetui.

### Zähneputzen leicht gemacht

- Schützt Ihr Zahnfleisch mit der integrierten Andruckkontrolle
- Personalisierte Reinigung mit 2 Putzmodi
- Sie wissen immer, wann es Zeit für einen neuen Bürstenkopf ist

### Außergewöhnliche Reinigung

- Next-Generation Sonicare Technologie
- Fortschrittliche Reinigung gegen Verfärbungen und für weiße Zähne

### Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Reisen einfach gemacht mit unserem kompakten, extrem robusten Reiseetui
- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit SmarTimer und BrushPacer
- Lasergeschweißt für eine längere Haltbarkeit
- Bis zu 3 Wochen Zähneputzen mit einer vollständigen Ladung


# Besonderheiten

## W2 Optimal White Bürstenköpfe



Die Philips Sonicare 5500 geht über eine gründliche Reinigung hinaus und entfernt oberflächliche Verfärbungen für ein strahlendes, weißeres Lächeln. Mit dem W2 Optimal White Bürstenkopf bleiben die Zähne zwischen professionellen Aufhellungsbehandlungen bis zu 2 x weißer\*. Und im Vergleich zu einer Handzahnbürste wird bis zu 7 x mehr Plaque entfernt\*\*.

## Next-Generation Sonicare Technologie

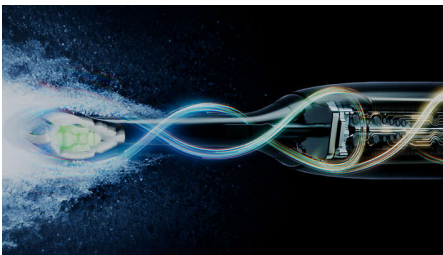

Genießen Sie ein einzigartiges Zahnputzerlebnis und ein neues Level der Mundhygiene mit der Next-Generation Sonicare Technologie. Während des Putzens passt das innovative Magnetsystem der Zahnbürste die Putzleistung automatisch an. So sorgt sie für eine gleichbleibend optimale Leistung von 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute – selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung des Bürstenkopfes indem sie sanft Flüssigkeit


zwischen die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands pulsiert. So erhalten Sie bei jedem Zähneputzen eine umfassende Reinigung.

## 2 Putzmodi



Damit Sie Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch optimal pflegen können, bietet die Philips Sonicare 5500 zwei Putzmodi zur Auswahl. Der Clean-Modus konzentriert sich auf die Plaque-Entfernung für eine hervorragende Reinigungsleistung, während im White-Modus oberflächliche Verfärbungen besser entfernt werden, um ein strahlendes Lächeln zu erzielen.

## Integrierte Andruckkontrolle

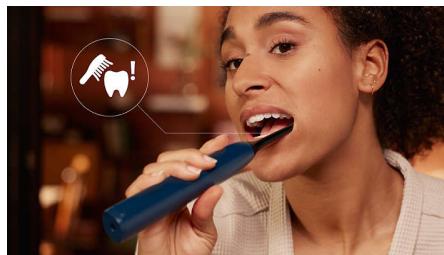

Vielleicht merken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu viel Druck ausüben, aber dieser Zahnbürste entgeht es nicht. Der intelligente optische Sensor erkennt übermäßigen Druck präzise. Er gibt dann ein pulsierendes Geräusch aus und reduziert die Vibration. So wissen Sie immer, wann Sie Ihre Putztechnik anpassen müssen, und Ihr Zahnfleisch bleibt geschützt.

## BrushSync Erinnerungsfunktion



Für eine gute Mundgesundheit ist es wichtig, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Mit der BrushSync Technologie können Sie ganz einfach für eine optimale Leistung Ihres Bürstenkopfes sorgen. Die innovative Technologie zeichnet auf, wie häufig und wie intensiv die Zahnbürste genutzt wird, und informiert Sie, wenn ein neuer Bürstenkopf benötigt wird.

## 2-Minuten-Timer und BrushPacer



Für eine vollständige Reinigung benötigen Sie nur zwei Minuten. Unser SmarTimer informiert Sie, wenn die Zeit abgelaufen ist. Für eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund teilt der BrushPacer Ihren Putzzyklus in Segmente auf. Eine kurze Pause bei der Vibration signalisiert, dass es Zeit für das nächste Segment ist. Das hilft Ihnen, bei jedem Zähneputzen eine gleichmäßige Reinigung zu erzielen.


5500

Wiederaufladbare Schallzahnbürste

HX7119/01

# Besonderheiten

## Langlebiges Design

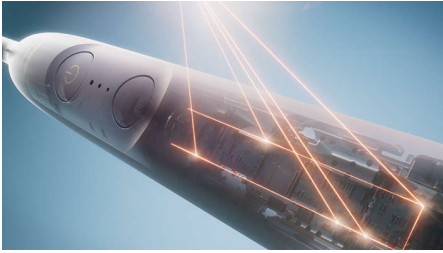

Wir haben das Design unserer Philips Sonicare Zahnbürsten von innen heraus überarbeitet, damit sie robust, leicht und langlebig sind. Dank unseres fortschrittlichen Laserschweißprozesses können Sie Ihre Zähne mit unseren Zahnbürsten jahrelang putzen.

## Bis zu 3 Wochen sorglos Zähneputzen zwischen den Ladevorgängen



Diese Zahnbürste verwendet einen leistungsstarken Akku für bequemes Zähneputzen. Mit nur einer Akkuladung können Sie sich die Zähne bis zu drei Wochen lang regelmäßig putzen, bevor Sie die Sonicare wieder aufladen müssen.

## Kompaktes Reiseetui



Unser überarbeitetes Reiseetui ist kompakt genug, um in die Tasche zu passen, und robust genug, um Ihre Philips Sonicare Zahnbürste unterwegs zu schützen. Im Etui ist nicht nur Platz für Ihre Zahnbürste, sondern auch bequem für zwei Bürstenköpfe – der perfekte Reisebegleiter

# Daten

## Intelligente Sensor-Technologie

**Erinnerungsfunktion:** BrushSync informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden sollte

## Intelligente Sensor-Technologie

**Druck-Feedback:** Abgeschwächte Vibration und pulsierendes Geräusch

## Leistung

**Stromspannung:** 100–240 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** 21 Tage

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß und Marineblau

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Timer:** SmarTimer und BrushPacer für eine umfassende und gründliche Reinigung

**Laden über USB-A:** Netzadapter nicht enthalten

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Handstück:** 2 5500 Wiederaufladbare Zahnbürste

**Reiseetui:** 2 schlanke Reiseetuis

**Bürstenkopf:** 2 W2 Optimal White

## Reinigungsleistung

**Plaque-Entfernung:** Bis zu 7 x effektiver\*\*

**Geschwindigkeit:**

62.000 Bürstenkopfbewegungen/min

**Weißer Zähne:** Bis zu 2 x weißere Zähne\*

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

