

PHILIPS

sonicare

Oppladbar sonisk
tannbørste

5300

Fjerner opptil sju ganger så mye
plakk

To intensiteter

Innebygd trykkvarsel

21 dagers batterilevetid



HX7101/01



Overlegen plakkfjerning og hvitere tenner*

Fjerner opptil sju ganger så mye plakk*

Philips Sonicare 5300 har neste generasjons Sonicare-teknologi, to intensitetsnivåer og trykkvarsel når du pusser for hardt. Med hvitgjørende børstehode.

Tannpussen blir enkel

- Tilpass tannpussen med to intensitetsnivåer
- Beskytt tannkjøttet med innebygd trykkvarsel
- Få beskjed når det er på tide med et nytt børstehode

Uovertruffen rengjøring

- Avansert rengjøring som fjerner misfarging og gir hvitere tenner
- Neste generasjons Sonicare-teknologi

Utformet etter livsstilen din

- Opptil tre ukers børsting med én full opplading
- Optimaliser tannpussen med SmarTimer og BrushPacer
- Lasersveiset for styrke og holdbarhet


Høydepunkter

W2 Optimal White-børstehode



Philips Sonicare 5300 går enda litt lenger for å fjerne misfarging på en enkel måte for et strålende, hvitere smil. Med W2 Optimal White-børstehodet er det enkelt å opprettholde hvitheten i perioden mellom profesjonelle tannblekingsbehandlinger, samtidig som du fjerner opptil syv ganger mer plakk sammenlignet med en manuell tannbørste.

Neste generasjons Sonicare-teknologi

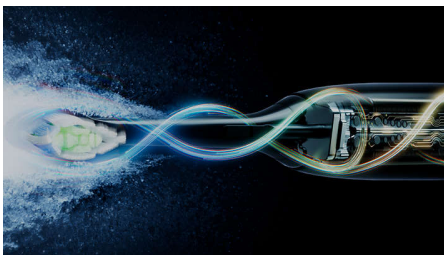


Gled deg over en herlig pusseopplevelse og et nytt nivå av tannpleie med neste generasjons Sonicare-teknologi. Mens du pusser, justerer tannbørstens innovative magnetsystem børstens børstekraft under hver tannpuss, noe som gir optimal ytelse med nøyaktig 62 000 børstebevegelser per minutt, selv i vanskelig tilgjengelige områder. Samtidig støtter dynamisk væskehandling børstehodets rengjøringsytelse ved å skylle forsiktig skyllelans tannkjøttet og mellom hver tann, slik at du får en fullstendig rengjøring hver gang du pusser.

To intensitetsnivåer



Med Philips Sonicare 5300 kan du velge mellom to intensitetsnivåer for å hjelpe deg med å ta best mulig vare på tenner og tannkjøttet. Enten du foretrekker forbedret rengjøringseffekt med den høye innstillingen eller foretrekker en skånsom, men grundig rengjøring med den lave innstillingen, har denne tannbørsten det du trenger.

Innebygd trykkvarsel

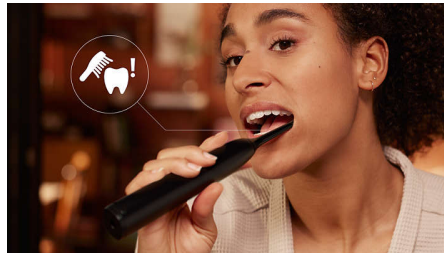

Du merker kanskje ikke når du pusser for hardt, men denne tannbørsten vil gjøre det. Den smarte optiske sensoren registrerer overdrevent pussetrykk og gir deg beskjed med en pulserende lyd samtidig som vibrasjonen reduseres. Du vil alltid vite når du skal justere pussingen, og tannkjøttet vil holde seg beskyttet.

Byttepåminnelse med BrushSync



Det å bytte børstehodet regelmessig er en viktig del av å opprettholde god tannhelse. Med BrushSync-teknologi er det enkelt å holde børstehodet i tipp topp stand. Ved å


spore bruksfrekvens og pusseintensitet, minner den innovative teknologien deg på når det er på tide med et nytt børstehode.

To minutters timer og børstetidtaker



To minutter er alt du trenger for en fullstendig rengjøring, så vår SmarTimer gir deg beskjed når tiden er ute. For at hele munnen skal bli ren, deler BrushPacer pussingen inn i økter, der en liten pause i vibrasjonen er et tegn på at du skal bevege deg videre. Slik får du en jevn rengjøring hver gang du pusser.

Utformet for å vare

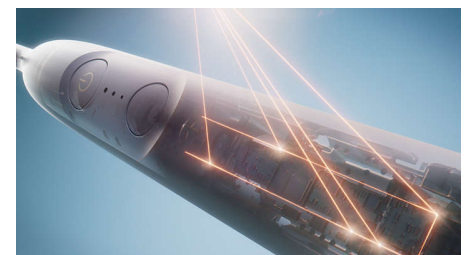

Vi har redesignet Philips Sonicare-tannbørstene fra innsiden og ut for å være sterke, lette og holdbare. Takket være vår avanserte lasersveiseprosess er tannbørstene våre designet for å pusse med deg i mange år fremover.

Opptil tre uker mellom hver lading



Denne tannbørsten bruker et batteri med høy ytelse som er utviklet for å forbedre pusseopplevelsen. Med én lading kan du bruke tannbørsten i opptil tre uker med regelmessig børsting før du må lade den.

Spesifikasjoner

Deler som medfølger

Håndtak: 1 5300 oppladbar tannbørste
Børstehoder: 1 W2 Optimal White
Lader: 1

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Intensitetsnivåer

Høy: For å forbedre tannpussen
Lav: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Rengjøring

Plakkfjerning: Opptil sju ganger mer effektiv*
Tannbleking: Fjerner misfarging
Hastighet: 62 000 børstebevegelser/min.

Brukervennlighet

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass
Håndtak: Slank, ergonomisk form
Tidsbryter: SmarTimer og BrushPacer for

komplett og grundig børsting
Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets levetid

Teknologi med Smart-sensor

Tilbakemelding om pussetrykk: Redusert vibrasjon og pulserende lyd
Påminnelse-symbol: Med BrushSync får du beskjed når det er på tide å bytte børstehode

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar
Batteritype: Litium-ION
Driftstid (full til tom): 21 dager

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Drift

Spenning: 100–240 V

Utforming og utseende

Farge: Svart

Consumer Trade Item

Height: 23.2 cm
Width: 6 cm
Length: 11 cm
Net weight: 0.237 kg
Gross weight: 0.315 kg
GTIN: 8720689021425
Country of origin: NL
Harmonized system code: 85098000

Pappkartong

Height: 24.9 cm
Width: 12.4 cm
Length: 19.2 cm
Net weight: 0.711 kg
Gross weight: 1.043 kg
GTIN: 18720689021422

Annet

Height: 114 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
GTIN: 68720689021427



* vs. a manual toothbrush.