

PHILIPS

sonicare



Szónikus elektromos fogkefe

6100

Akár 20-szor több
lepedékeltávolítás

2 üzemmód, 3 intenzitási szint

Látható nyomásriasztás

21 napos akkumulátor-élettartam



HX7408/01

Gyengéd tisztítás, még az érzékeny fogak és íny számára is

Akár 20-szor több lepedékeltávolítás*

A Philips Sonicare 6100 új generációs Sonicare technológiával, egy speciális Sensitive (Érzékeny) üzemmóddal, 3 kefefejjel (a lepedékeltávolításhoz, az érzékeny fogakhoz és a fogfehérítéshez) és alacsony intenzitási beállítással rendelkezik. Ezenfelül nyomásriasztással arra az esetre, amikor a páciensek túl erősen mosnak fogat.

Gyengéd, kiváló tisztítás

- Teljes körű rendszer az egészségesebb szájüregért

Erőfeszítés nélküli fogmosás

- Védje ínyét a látható nyomásérzékelés segítségével
- Szabja személyre a tisztítást a 6 fogmosási beállítás segítségével
- Mindig tudja, mikor kell kefefejet cserélni

Kiváló tisztítás

- Új generációs Sonicare technológia

Életmódjához tervezve

- Optimalizálja a fogmosást a SmarTimer és a BrushPacer segítségével
- Akár 3 hét fogmosás egy teljes feltöltéssel
- Lézerrel hegesztve az erősség és a tartósság érdekében

Fénypontok

A3 All-in-One és S2 Sensitive



Az A3 Premium All-in-One kefefejét a pácienseket szem előtt tartva tervezték. Az A3 kefefej segítségével a pácienseknél akár 20-szor több lepedékeltávolítás*, akár 15-ször egészségesebb fogíny** érhető el, az elszíneződések eltávolítása pedig akár 100%-kal nagyobb lehet***. Emellett: A Sonicare legpuhább sörtéiből készült új S2 Sensitive kefefejnek köszönhetően a páciensek kíméletesen végezhetik a tisztítást, amellyel akár 10-szer több lepedéket távolíthatnak el a nehezen elérhető helyekről*.

Új generációs Sonicare technológia



Élvezze a kellemes fogmosási élményt és a szájjápolás új szintjét az új generációs Sonicare technológia segítségével. Fogmosás közben a fogkefe innovatív mágneses rendszere minden tisztítás során beállítja a fogmosás erejét, így a


percenkénti 62 000 sörtemozdulattal optimális teljesítményt biztosít még a nehezen elérhető helyeken is. Eközben a dinamikus folyadékos tisztítás segíti a sörtéket a lepedék eltávolításában, így minden egyes fogmosáskor teljes tisztaságot érhet el.

6 fogmosási beállítás



Az érzékeny fogakra és ínyre tervezett Philips Sonicare 6100 két fogmosási üzemmódot biztosít a páciensek számára. A Sensitive üzemmód gyengéd, alapos tisztítást biztosít, míg a Clean üzemmód a kiváló tisztítás érdekében a lepedék eltávolítására összpontosít. A személyre szabott tisztítás kialakításához a páciensek bármelyik üzemmódot kombinálhatják a magastól az alacsonyig terjedő három intenzitási szint egyikével, a pont megfelelő fogmosás beállításához.

Fénygyűrűs nyomásérzékelő

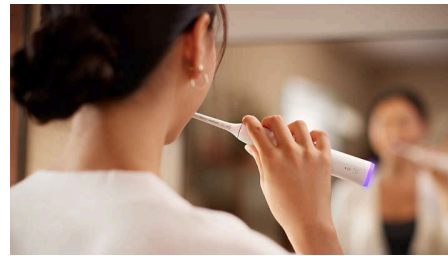

A páciensek talán észre sem veszik, hogy túl erősen mossák a fogait, a fogkefe viszont észlelni fogja. Az intelligens optikai érzékelő pontosan érzékeli az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást, és lila fénnel villog, miközben csökkenti a rezgést. A páciensek mindig tudni fogják, mikor kell korrigálni a fogmosást, fogínyük pedig védve marad.


BrushSync csere-émlékeztető



A fogkefe rendszeres cseréje fontos része a megfelelő szájüregi egészség megőrzésének. A BrushSync technológia segítségével a páciensek könnyen fenntarthatják a kefefej maximális teljesítményét. Az innovatív technológia nyomon követi a használat gyakoriságát és a fogmosás intenzitását, valamint emlékezteti a pácienseket, hogy mikor kell kefejét cserélni.


Fénypontok

2 perces időzítő és fogmosás-ütemező

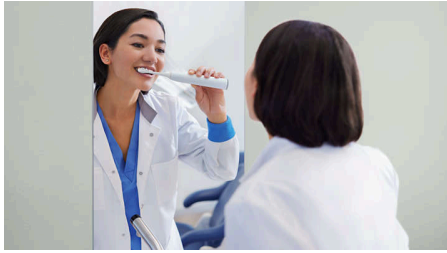

Két perc elegendő a teljes tisztításhoz, így a SmarTimer jelzi a pácienseknek, ha lejár az idő. A teljes szájüreg egyenletes tisztítása érdekében a BrushPacer szakaszokra osztja a fogmosás menetét, a következő szakaszba való belépést pedig egy rövid rezgésszünet jelzi. Ez segít a pácienseknek abban, hogy minden egyes fogmosáskor egyenletes tisztaságot érjenek el.

Elsődleges szempont a tartósság

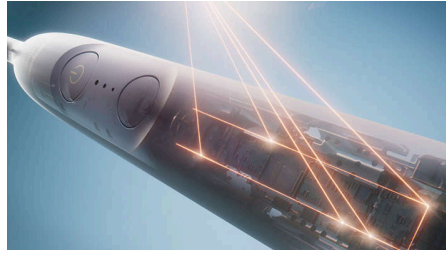

Philips Sonicare fogkeféinket teljes egészében átalakítottuk, hogy erősek, könnyűek és tartósak legyenek. Fejlett lézeres hegesztési eljárásunknak köszönhetően fogkeféinket úgy terveztük, hogy pácienseink még évekig használhassák.

Akár 3 hét a feltöltések között



Ehhez a fogkeféhez egy nagy teljesítményű akkumulátor tartozik, amelyet úgy terveztek, hogy javítson a fogmosás élményén. Egyetlen feltöltéssel a páciensek akár három hétig is élvezhetik a rendszeres fogmosást, mielőtt újra fel kellene tölteniük.

Műszaki adatok

Intenzitási szintek

Magas: A hatékonyabb tisztításért

Közepes: A mindennapos tisztaságért

Alacsony: Érzékeny fogakhoz és ínyhez

Tápellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 21 nap

Akkumulátor: Újratölthető

Energiafogyasztás: Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápattintható kefefejek

Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát

Időzítő: SmarTimer és BrushPacer a teljes körű és alapos fogmosásért

USB-A töltés: A hálózati adapter nem tartozék

Tartozékok

Markolat: 1 6100 tölthető fogkefe

Fogkefefej: 30 S2 Sensitive, 30 A3 Premium, univerzális

Töltő: 1

Fogmosási teljesítmény

Lepedék eltávolítás: Akár 20-szor hatékonyabb*

Egészséges íny: Akár 15-ször egészségesebb fogíny***

Fehérités: Akár 100%-kal kevesebb elszíneződés**

Sebesség: 62 000 tisztító mozdulat percenként

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Sensitive: Érzékeny fogakhoz és ínyhez

Intelligens érzékelőtechnológia

Nyomásvisszajelzés: A gyűrű lila színben világít, csökkentett rezgés és pulzáló hang

Csere- emlékeztető: A BrushSync segítségével mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a kefefejet



* Kézi fogkefével szemben.

** Clean üzemmódban, egy kézi fogkeféhez képest.

*** Kézi fogkefével szemben. Laboratóriumi vizsgálat esetén.
In vitro vizsgálat; a tényleges eredmények eltérőek lehetnek.