

PHILIPS

sonicare



Laetav Sonic-
hambahari

6100

Kuni kümme korda rohkem
hambakatu eemaldust

Kaks režiimi, kolm intensiivsust

Nähtav survehoiatus

21 päeva vastupidav aku



HX7403/01

Õrn puhastus isegi tundlike hammaste ja igemete jaoks

Kuni 10 x rohkem hambakatu eemaldust*

Philips Sonicare 6100 tutvustab järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogiat, spetsiaalset Sensitive'i (tundlikku) režiimi, harjapead S2 Sensitive ja madalat intensiivsust. Lisaks veel rõhuhoiatus, juhul kui te liiga tugevasti harjate. Tarnitakse koos reisikarbiga.

Õrn ja esmaklassiline puhastamine

- Õrn puhastamine tundlikele hammastele ja igemetele

Lihtne ja tõhus hambapesu

- Teate täpselt, millal on aeg uus harjapea kasutusele võtta
- Igemete kaitse nähtava survehoiatusega
- Kohandage puhastamist kuue harjamisseadistuse abil

Ülim puhtus


- Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia

Sobib täiuslikult teie eluviisiga

- Optimeerige harjamist funktsioonide SmarTimer ja BrushPacer abil
- Tugev ja vastupidav
- Ühe laadimisega kuni kolm nädalat hambapesu
- Meie kompaktne ja ülivastupidav reisivutlar muudab reisimise lihtsaks


Esiletõstetud tooted

Harjapea S2 Sensitive

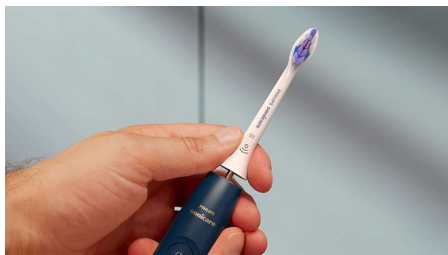

Philips Sonicare 6100 pakub õrna harjamist, mis sobib ka tundlikele hammastele ja igemetele. Tänu uuele harjapeale S2 Sensitive, mis on valmistatud Sonicare'i kõige pehmematest harjastest, pakub see unikaalselt disainitud hari õrna puhastust, mis eemaldab raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni kümme korda rohkem kattu.**

Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia

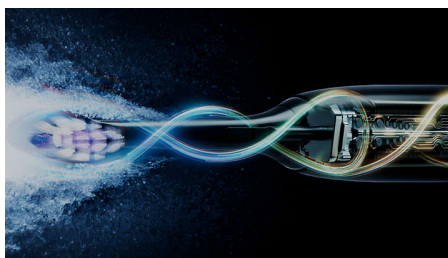

Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia võimaldab nautida meeldivat hambapesu kogemust ja suutervise järgmist taset. Samal ajal kui teie harjate, kohandab hambaharja uuenduslik magnetiline süsteem iga hambapesu ajal harjamisvõimsust, tagades optimaalse jõudluse täpselt 62 000 liigutust minutis, ja seda isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Samal ajal toetab dünaamiline vedelikuvoog harjapea


puhastusjõudlust, loputades õrnalt hambaservasid ja iga hambavahe, et tagada põhjalik puhastamine iga hambapesu ajal.

6 harjamisseadistust



Tundlike hammaste ja igemete jaoks välja töötatud Philips Sonicare 6100 võimaldab valida kahe harjamisrežiimi vahel. Režiim Sensitive pakub õrna, ent tõhusat puhastust ning režiim Clean keskendub katu eemaldamisele, et tulemus oleks eriti puhas. Isikupärastatud puhastamine võimaldab kombineerida kumbagi režiimi kolme intensiivsustasemega, et saaksite just teile sobiva harjamiskorra.

Valgusrõngaga survehoiatus

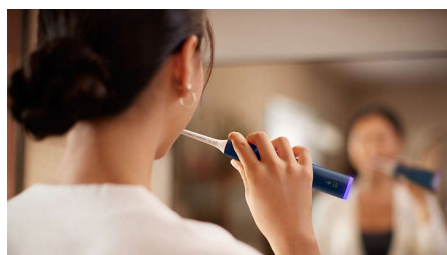

Võib-olla te ei märkagi, et harjate liiga tugevasti, kuid see hambahari märkab seda kindlasti. Nutikas optiline andur tuvastab täpselt liiga tugeva harjamise, seejärel vilgub see vibreerimise vähendamise ajal lillalt. Teate alati, millal harjamist reguleerida, ja teie igemed on kaitstud.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Harjapea regulaarne väljavahetamine on hea suuhügieeni oluline osa. BrushSync-tehnoloogiaga on lihtne säilitada harjapea parimat toimivust. Uuenduslik tehnoloogia jälgib kasutussagedust ja harjamise intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg kasutusele võtta uus harjapea.


Kaheminutiline taimer ja harjamistsükliid



Täieliku puhastamise jaoks kulub vaid kaks minutit ja meie SmarTimer annab teile teada, kui aeg on täis. Terve suu veelgi põhjalikumaks puhastamiseks jagab funktsioon BrushPacer teie hambapesu segmentideks: lühike vibreerimise paus annab märku, et on aeg edasi liikuda. See tagab iga harjamiskorra ajal veelgi tõhusama puhastamise.

Esiletõstetud tooted

Loodud kestma

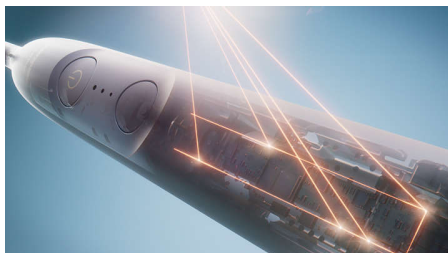

Kujundasime ümber Philips Sonicare'i hambaharjad nii seest kui ka väljast, et tagada nende tugevus, kergus ja pikk kasutusaeg. Tänu täiustustele saate meie hambaharju kasutada pikkade aastate jooksul.

Kasutusaeg laadimiste vahepeal on kuni kolm nädalat



Hambahari kasutab suure jõudlusega akut, mis on loodud kestma. Ainult ühe laadimise abil saate nautida igapäevast hambapesu kuni kolme nädala jooksul, enne kui hambaharja on vaja uuesti laadida.

Kompaktne reisivutlar



Meie uue kujundusega reisivutlar on piisavalt kompaktne kotis kandmiseks, samuti on see küllaldaselt tugev Philips Sonicare'i hambaharja kaitsmiseks. Peale hambaharja kaitsmise mahutab see mugavalt ka kaks harjapead. Nüüd saate reisida enesekindlalt ükskõik millisesse sihtpunkti.

Spetsifikatsioon

Intensiivsusi

Kõrge: Tõhusama puhastamise jaoks

Keskmine: Igapäevaseks puhastamiseks

Madal: Tundlikele hammastele ja igemetele

Võimsus

Pinge: 100-240 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 21 päeva

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Meresinine

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Taimer: SmarTimer ja BrushPacer täieliku ning põhjaliku harjamise jaoks

USB-A laadimine: Vooluadapter ei kuulu komplekti

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 6100 laetav hambahari

Reisivutlar: 1 õhuke reisivutlar

Laadija: 1

Harjapea: 3 S2 Sensitive'i

Puhastusjõudlus

Katu eemaldamine: Kuni kümme korda tõhusam*

Kiirus: 62 000 harjaliigutust minutis

Igemete tervis: Kuni viis korda tervemad igemed*

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Tundlik: Tundlikele hammastele ja igemetele

Nutikate anduritega tehnoloogia

Tagaside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Vähendatud vibreerimine ja pulseeriv heli

Asendamise meeldetuletus: BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

