

PHILIPS

sonicare



Zestaw sonicznych
szczoteczek do zębów

5300

Nowa generacja soniczności

1 program, 2 intensywności

2x Końcówka W2 Optimal White

Czujnik siły nacisku



HX7109/01

Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Zestaw szczoteczek sonicznych Philips Sonicare 5300 jest wyposażony w technologię soniczną nowej generacji, 2 poziomy intensywności i czujnik siły nacisku zapobiegający zbyt mocnemu szczotkowaniu.

Szczotkowanie bez wysiłku

- Spersonalizuj swoje czyszczenie za pomocą 2 poziomów intensywności
- Chroń swoje dziąsła dzięki wbudowanemu czujnikowi siły nacisku
- Nigdy nie przegap momentu wymiany końcówki szczoteczki na nową

Najlepsze czyszczenie

- Zaawansowane czyszczenie pozwala usunąć powierzchniowe przebarwienia i zapewnić efekt wybielenia zębów
- Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

Zaprojektowany dla Twojego stylu życia

- Ułatw sobie podróżowanie dzięki naszemu kompaktowemu, bardzo wytrzymałemu futerałowi podróżnemu
- Do 3 tygodni szczotkowania na jednym pełnym naładowaniu
- Laserowo zespolony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość
- Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer


Zalety

Końcówka szczoteczki Optimal White W2



Szczoteczka Philips Sonicare 5300 wykracza poza głębokie czyszczenie, aby bez wysiłku usuwać przebarwienia powierzchniowe, zapewniając promienny, bielszy uśmiech. Dzięki główce szczoteczki W2 Optimal White łatwo jest zachować jasność między profesjonalnymi zabiegami wybielania, jednocześnie usuwając do 7 razy więcej płytki nazębnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

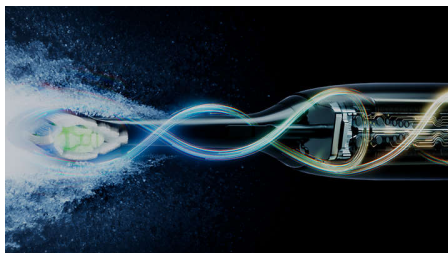


Doświadcz przyjemności doczyszczenia zębów i zdrowia dziąseł dzięki nowej generacji soniczności od Philips Sonicare. Soniczna moc Philips Sonicare wytwarza mikrobąbelki, które wtłacza głęboko w przestrzeń międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł.

2 poziomy intensywności



Aby pomóc Ci jak najlepiej dbać o zęby i dziąsła, Philips Sonicare 5300 ma do wyboru 2 poziomy intensywności. Niezależnie od tego, czy wolisz większą moc czyszczenia przy wysokim ustawieniu, czy wolisz delikatne, ale dokładne czyszczenie przy niskim ustawieniu, ta szczoteczka do zębów jest dla Ciebie.

Wbudowany alert siły nacisku

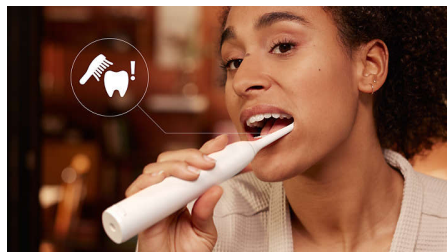

Możesz nie zauważyć, kiedy szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale ta szczoteczka to zrobi. Inteligentny czujnik optyczny precyzyjnie wykrywa nadmierny nacisk podczas szczotkowania i informuje o tym za pomocą pulsującego dźwięku, jednocześnie redukując wibracje. Zawsze będziesz wiedzieć, kiedy dostosować szczotkowanie, a Twoje dziąsła pozostaną chronione.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Regularna wymiana końcówki szczoteczki jest ważnym elementem dbania o zdrowie jamy ustnej. Dzięki technologii BrushSync łatwo jest utrzymać najlepszą wydajność końcówki szczoteczki. Innowacyjna technologia przypomina, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Dla najlepszych rezultatów końcówkę wymieniaj co 3mc.

2-minutowy timer i segmentowy zegar



Dwie minuty to wszystko, czego potrzebujesz do całkowitego doczyszczenia, więc nasza funkcja SmartTimer poinformuje Cię, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, funkcja BrushPacer dzieli sesję na segmenty, a lekka przerwa w wibracjach jest sygnałem do przejścia dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.


5300

Zestaw sonicznych szczoteczek do zębów

HX7109/01

Zalety

Szczoteczka stworzona z myślą o trwałości

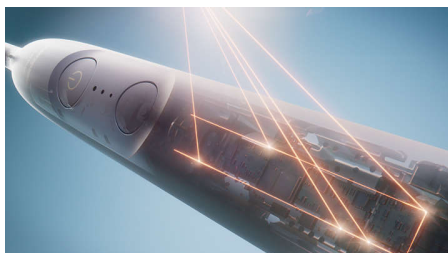

Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi laserowego zespojenia napędu nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć Ci przez wiele lat.

Do 3 tygodni między ładowaniami



Ta szczoteczka do zębów wykorzystuje wysokowydajny akumulator, który został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu szczotkowania. Po jednym naładowaniu można cieszyć się nawet trzema tygodniami regularnego szczotkowania przed koniecznością ponownego naładowania.

Poręczny futerał podróżny



Nasz przeprojektowany futerał podróżny jest wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się w torbie i wystarczająco mocny, aby chronić szczoteczkę Philips Sonicare podczas podróży. Nie tylko chroni szczoteczkę, ale także wygodnie mieści dwie główki szczoteczki. Teraz możesz bez obaw podróżować, dokądkolwiek zaprowadzi Cię przygoda.

Dane techniczne

Poziomy intensywności

Wysoki: Aby poprawić skuteczność czyszczenia

Niski: Do wrażliwych zębów i dziąseł

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki:

Przypomnienie BrushSync informuje, kiedy należy wymienić końcówkę szczoteczki

Technologia Smart Sensor

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Zmniejszone wibracje i cichszy dźwięk

Moc

Napięcie: 100–240 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: 21 dni

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylizyka i wykończenie

Kolor: Czarno-białe

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Funkcje SmarTimer i BrushPacer zapewniają kompletne i

dokładne szczotkowanie

Ładowanie przez USB-A: Zasilacz nie jest dołączony

Elementy zestawu

Etui podróżne: 2 kompaktowe futerały podróżne

Ładowarka: 1

Rączka: 2 ładowana szczoteczka do zębów 5300

Główka szczoteczki: 2 W2 Optimal White

Skuteczność czyszczenia

Usuwanie płytki nazębnej: Do 7x skuteczniejsza¹

Szybkość: 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wybielanie: Usuwanie przebarwień

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

