

PHILIPS

sonicare



Įkraunamas ultragarsinis
dantų šepetėlis

7100

Pašalina iki 10 kartų daugiau
apnašų

4 režimai, 3 intensyvumai

Vaizdinis įspėjimas apie spaudimą
„Philips Sonicare“ programėlė



HX7420/01

Tobulas valymas ir iki 7 kartų sveikesnės dantenos*

Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų**

„Philips Sonicare 7100“ pasižymi naujos kartos „Sonicare“ technologija, 4 valymo režimais, 3 intensyvumo lygiais, matomu spaudimo signalu ir mūsų šepetėlio galvute „G3 Premium Gum Care“.

Švelnus aukščiausios kokybės valymas

- Iki 7 k. sveikesnės dantenos vos per 2 savaites*

Pastangų nereikalaujantis dantų valymasis

- Vaizdinis įspėjimas apie spaudimą padeda apsaugoti danteną
- 12 dantų valymo nustatymų, pritaikomų pagal jūsų valymo poreikius
- Pagerinkite dantų valymo įpročius naudodamiesi „Philips Sonicare“ programėle
- Visada žinokite, kada laikas pakeisti šepetėlio galvutę

Ypatingas švarumas

- Naujos kartos „Sonicare“ technologija

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą

- Suvirinta lazeriu, siekiant užtikrinti tvirtumą ir ilgaamžiškumą
- Optimizuokite dantų valymą su „SmarTimer“ ir „BrushPacer“
- Valymas iki 3 savaičių įkrovus vieną kartą
- Keliaukite be vargo su mūsų aukščiausios kokybės kelioniniu krovimo dėklu


Ypatybės

Šepetėlio galvutė „G3 Premium Gum Care“



„Philips Sonicare 7100“ padeda turėti sveikesnes dantenų ir sveiką šypseną. Šepetėlio galvutės „G3 Premium Gum Care“ šereliai intensyviai šalina apnašas ties dantenų linija ir užtikrina 7 kartus sveikesnes dantenų vos per 2 savaites*. Dėl šepetėlio galvutės minkšto, lankstaus dizaino, ji prisitaiko prie jūsų dantų ir dantenų kontūrų bei kruopščiai išvalo iki 10 kartų daugiau apnašų nei paprastas dantų šepetėlis**.

Naujos kartos „Sonicare“ technologija

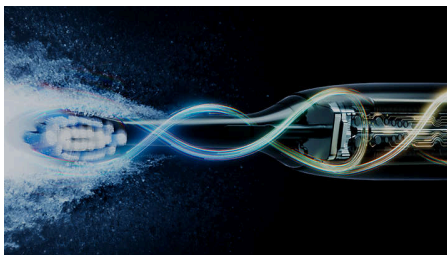


Mėgaukitės maloniu dantų valymo procesu ir nauju burnos priežiūros lygiu naudodami naujos kartos „Sonicare“ technologiją. Naujoviška dantų šepetėlio magnetinė sistema kiekvieno valymo seanso metu reguliuoja dantų valymo galią ir užtikrina optimalų 62 000 šerelių judesių per minutę našumą net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Tuo tarpu dinaminis skysčio poveikis padeda šepetėlio galvutei efektyviai valyti švelniai skalaujant danteną palei dantenų liniją ir tarpdančius, todėl kiekvieną kartą valydami dantis pajusite išskirtinę švarą.

12 dantų valymo nustatymų




Jūsų pageidavimus atitinkantis dantų valymas su „Philips Sonicare 7100“. 4 valymo režimai padeda pasirūpinti dantenų sveikata, dantų balinimu, jautrumu ir kasdieniu valymu. Naudojant „Gum Health“ režimą išsaugomos sveikos dantenos švelniu masažavimu palei dantenų liniją. Naudojant „White“ režimą pašalinami paviršiaus nešvarumai ir nublizginami dantys, kad šypseną būtų dar baltesnė. Naudojant „Sensitive“ režimą dantys valomi švelniai ir kruopščiai, o „Clean“ režimu pašalinamos apnašos, kad dantys būtų itin švarūs. Valymą galite pritaikyti pagal savo poreikius, naudodami 3 intensyvumo lygius, nuo „High“ (aukštas) iki „Low“ (žemas).

Šviečiantis žiedas, įspėjantis apie spaudimą

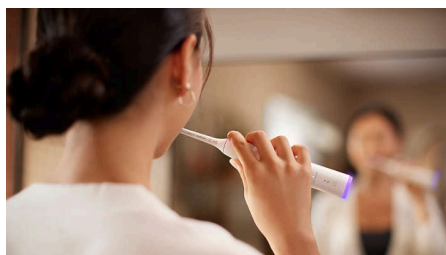

Patys galite nepastebėti, kad valote dantis per stipriai, tačiau tai nustatys šis dantų šepetėlis. Išmanusis optinis jutiklis tiksliai aptinka perteklinį šepetėlio spaudimą, pradeda šviesti violetine spalva ir sumažina vibraciją. Visada žinosite, kada pakoreguoti dantų valymą, ir jūsų dantenos bus apsaugotos.

„Philips Sonicare“ programėlė

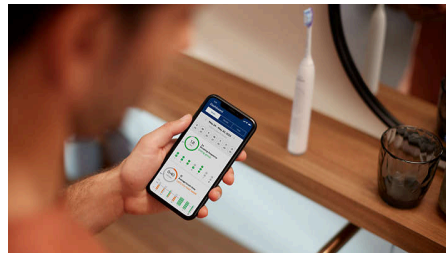

„Philips Sonicare“ programėlė sklandžiai susieja jūsų dantų šepetėlį ir padeda gerinti bei palaikyti burnos sveikatą. Mūsų programėlė stebi jūsų dantų valymo procedūras, teikia asmenines rekomendacijas ir pažangos ataskaitas, kad gautumėte vertingų įžvalgų apie dantų valymą.

2 minučių ir valymo intervalų laikmatis



Dantims visiškai išsivalyti pakanka dviejų minučių, o apie tai informuoja mūsų „SmarTimer“ funkcija. Kad išsivalytumėte dantis kruopščiai ir tolygiai, „BrushPacer“ funkcija suskirsto valymo procedūrą į kelis etapus, o nedidelė vibracijos pauzė yra ženklas, kad reikia pereiti prie kito etapo. Tai padeda tolygiai išsivalyti dantis kiekvieną kartą.

„BrushSync“ keitimo priminimas



Svarbu reguliariai keisti šepetėlio galvutę, kad palaikytumėte gerą burnos sveikatą. „BrushSync“ technologija padeda užtikrinti, kad šepetėlio galvutė veiktų kuo geriau. Ši pažangi technologija stebi naudojimo dažnumą ir valymo intensyvumą bei primena, kada laikas keisti šepetėlio galvutę.


7100

Įkraunamas ultragarsinis dantų šepetėlis

HX7420/01

Ypatybės

Sukurta ilgam

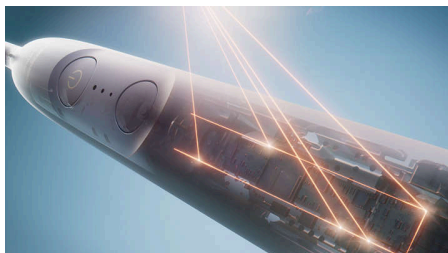

Sukūrėme „Philips Sonicare“ dantų šepetėlius taip, kad jie būtų tvirti, lengvi ir ilgaamžiški. Mūsų pažangi lazerinio suvirinimo procedūra užtikrina, kad dantų šepetėlius galėsite naudoti ilgus metus.

Iki 3 savaičių tarp įkrovimų



Šiame dantų šepetėlyje naudojamas didelio našumo akumulatorius, kuris padeda užtikrinti dar efektyvesnį dantų valymą. Vienu įkrovimu galite reguliariai valyti dantis iki trijų savaičių.

kelioninis krovimo dėklas.



Mūsų atnaujinto dizaino kelioninis krovimo dėklas su integruotu įkrovimo lizdu ir laidu suteikia galimybę įkrauti dantų šepetėlį kelionėje, neatidarant dėklo. Jis yra ir pakankamai tvirtas, kad apsaugotų jūsų dantų šepetėlį keliaujant, ir pakankamai kompaktiškas, kad tilptų į bet kokį krepšį, todėl yra puikus kelionių palydovas.

Specifikacijos

Intensyvumo nustatymai

Aukštas: Gilesnis valymas

Vidutinis: Valymui kasdien

Žemas: Jautriems dantims ir dantenoms

Produkto atnaujinimas

Palaikymo laikotarpis: „Philips“ iki 2026 m.

gruodžio 31 d. teiks būtinus saugumo atnaujinimus.

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 21 diena

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“ telefonai su „Bluetooth 4.0“ arba vėlesne versija „Bluetooth“ belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

Suderinamumas su „iOS“: „iPhone“ su „Bluetooth 4.0“ arba vėlesne versija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“ funkcijos kruopščiam dantų valymui

USB-A įkrovimas: Maitinimo adapteris nepridedamas

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 7100 įkraunamas dantų šepetėlis

Įkroviklis: 1

Kelioninis dėklas: 1 kelioninis krovimo dėklas

Šepetėlio galvutė: 1 „G3 Premium Gum Care“

USB-A kabelis: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: 62 000 šepetėlio judesių / min

Apnašų pašalinimas: Iki 10 kartų veiksmingesnis**

„Gum Health“: Iki 7 kartų sveikesnės dantenos*

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Balta: Paviršinėms dėmėms šalinti

„Gum Health“: Švelniai masažuoja danteną

„Sensitive“: Jautriems dantims ir dantenoms

Išmanioji jutiklinė technologija

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas šviečia violetine spalva, Mažesnė vibracija ir tylesnis pulsavimas

Pakeitimo priminimas: „BrushSync“ funkcija padeda suprasti, kada keisti šepetėlio galvutę

