

PHILIPS

sonicare



Atkārtoti uzlādējama
Sonic zobu birste

6100

Notīra līdz 10 reizēm vairāk
aplikuma

2 režīmi, 3 intensitātes līmeņi

Vizuāls brīdinājums par spiedienu

Akumulatora kalpošanas laiks: 21
diena



HX7403/01

Saudzīga tīrīšana, pat jutīgiem zobiem un smaganām

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma*

Philips Sonicare 6100 piedāvā nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju, īpašo režīmu Sensitive, zobu suku galviņu S2 Sensitive, zemu tīrīšanas intensitāti, turklāt arī brīdinājumu par spiedienu, ja tīrāt, pārāk spēcīgi spiežot. Komplektācijā ietverts ceļojumu futrālis.

Maiga, izcila tīrīšana

- Saudzīga tīrīšana jutīgiem zobiem un smaganām

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Sargājiet savas smaganas, pateicoties redzamajam spiediena brīdinājumam
- Vienmēr ziniet, kad ir jānomaina birstes uzgalis
- Personalizējiet tīrīšanu ar 6 birstes iestatījumiem

Izcila tīrīšana

- Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija

Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam

- Atvieglējiet ceļošanu ar mūsu kompakto, īpaši izturīgo ceļojumu futrāli
- Lāzera lodējums gādā par izturību un ilgnoturību
- Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām ar vienu pilnu uzlādi
- Optimizējiet zobu tīrīšanu ar SmarTimer un QuadPacer


Izceltie produkti

S2 Sensitive birstes uzgalis



Philips Sonicare 6100 nodrošina saudzīgu zobu tīrīšanas pieredzi, arī jutīgiem zobiem un smaganām. Pateicoties jaunajam S2 Sensitive birstes uzgalim, kas izgatavots no Sonicare maigākajiem sariņiem, tas ir unikāli veidots, lai nodrošinātu saudzīgu tīrīšanu, kas noņem līdz 10 reizēm vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās.**

Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija

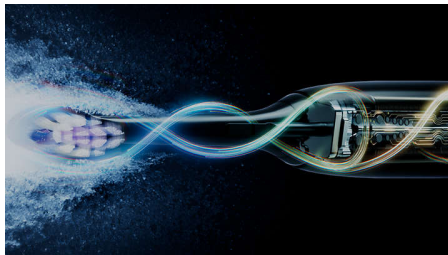


Baudiet patīkamu zobu tīrīšanas pieredzi un jaunu mutes dobuma tīrīšanas līmeni, izmantojot nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju. Katrā zobu tīrīšanas reizē zobu sukas inovatīvā magnētiskā sistēma pielāgo tīrīšanas jaudu, nodrošinot optimālu sniegumu ar precīzām 62 000 sariņu kustībām minūtē pat grūti aizsniedzamās vietās. Turklāt dinamiskā darbība ar šķidrumu papildina sukas uzgaļa tīrīšanas sniegumu, veicot maigu skalošanu gar smaganu līniju un starp zobiem, tādējādi nodrošinot pilnīgu tīrīšanu katrā zobu tīrīšanas reizē.

6 birstes iestatījumi



Izstrādāts jutīgiem zobiem un smaganām, Philips Sonicare 6100 ļauj izvēlēties starp diviem tīrīšanas režīmiem. Jutīgais (Sensitive) režīms nodrošina maigu, rūpīgu tīrīšanu, bet tīrīšanas (Clean) režīms koncentrējas uz aplikuma noņemšanu labākam rezultātam. Lai personalizētu tīrīšanu, varat apvienot jebkuru režīmu ar kādu no 3 intensitātes līmeņiem no augsta uz zemu, lai izveidotu sev piemērotāko režīmu.

Spiediena brīdinājums — izgaismots aplis

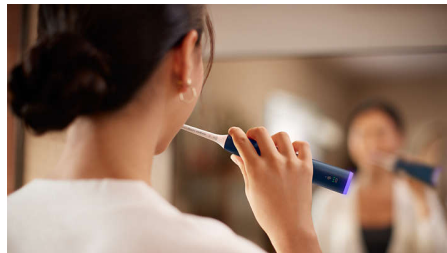

Jūs varat arī nejūt, ja tīrāt zobus pārāk stipri, taču šī zobu birste to zinās. Viedais optiskais sensors precīzi nosaka pārmērīgu tīrīšanas spiedienu, pēc tam mirgo violetā krāsā, samazinot vibrāciju. Jūs vienmēr zināsiet, kad pielāgot tīrīšanas spiedienu, un jūsu smaganas tiks pasargātas.

BrushSync uzgaļa nomainīšanas atgādinājums



Birstes uzgaļa regulāra nomainīšana ir svarīga labas mutes dobuma higiēnas uzturēšanas daļa. Izmantojot BrushSync tehnoloģiju, ir viegli nodrošināt birstes uzgaļa labāko sniegumu. Sekojot līdz lietošanas biežumam un tīrīšanas intensitātei, inovatīvā tehnoloģija atgādina jums, kad ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgali.

2 minūšu taimeris un zobu tīrīšanas sinhronizators



Pilnīgai tīrīšanai ir nepieciešamas tikai divas minūtes, un mūsu SmarTimer paziņo, kad laiks ir pagājis. Lai mutes dobums visur tiktu iztīrīts vienlīdz labi, BrushPacer sadala tīrīšanas sesiju posmos, un neliela pauze vibrācijā ir kā signāls pāriet pie nākamā zobu segmenta. Tādējādi katrā reizē viss tiks iztīrīts vienmērīgi.

Izceltie produkti

Radīta ilgstošai darbībai



Mēs esam pilnībā pārstrādājuši mūsu Philips Sonicare zobu birsti no iekšpuses un no ārpuses, lai tās būtu izturīgas, vieglas un kalpotu ilgu laiku. Mūsu inovatīvais lāzera lodēšanas process nodrošina, ka varēsiet izmantot mūsu zobu birsti daudzu gadu garumā.

Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām no vienas uzlādes līdz nākamajai



Ši zobu birste izmanto augstas veiktspējas bateriju, kas ir izstrādāta, lai uzlabotu zobu tīrīšanas pieredzi. Viena uzlādes reize nodrošina līdz trim nedēļām ilgu darbību, regulāri tīrot zobus, pirms zobu birste atkal ir jāuzlādē.

Kompakts ceļojumu futrālis



Mūsu uzlabotais ceļojumu futrālis ir pietiekami kompakts, lai to varētu ielikt somā, un pietiekami izturīgs, lai pasargātu Philips Sonicare zobu birsti. Tas ne tikai aizsargā zobu birsti, bet tajā var arī ērti ielikt divus birstes uzgaļus. Tagad varat ceļot ar pārliecību.

6100

Atkārtoti uzlādējama Sonic zobu birste

HX7403/01

Specifikācijas

Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Vidēja: Tīrīšanai ikdienā

Zema: Jutīgiem zobiem un smaganām

Strāvas padeve

Spriegums: 100–240 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 21 diena

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Jūras zils

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Taimeris: SmarTimer un BrushPacer nodrošina pilnīgu un rūpīgu tīrīšanu

USB-A uzlāde: Nav iekļauts strāvas adapteris

Komplektā iekļautie piederumi

Lādētājs: 1

Rokturis: 1 6100 atkārtoti uzlādējama zobu suka

Ceļojumu futrālis: 1 Plāns ceļojumu futrālis

Birstes uzgalis: 3 S2 Sensitive

Tīrīšanas veikspēja

Ātrums: 62 000 sukas kustību/min

Nosēdumu noņemšana: Līdz 10 reizēm efektīvāka*

Smaganu veselība: Līdz 5 reizēm veselīgākas smaganas*

Režimi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Jutīgais režīms: Jutīgiem zobiem un smaganām

Smart sensoru tehnoloģija

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Gaismas gredzens izgaismojas violetā krāsā, Mazāka vibrācija un pulsējoša skaņa

Nomaiņas atgādinājums: BrushSync informē, kad jānomaina sukas uzgalis

