

PHILIPS



Dispositivo de depilación
IPL con SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Sensor SmartSkin

4 accesorios inteligentes: cuero,
cara, zona del bikini y axilas

Funciones exclusivas de la
aplicación con IA

Uso con y sin cable



BRI951/01

Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses*

Disfruta de un tratamiento personalizado y sin complicaciones con la versión sin cable de nuestro dispositivo IPL de Lumea más rápido. La tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y la orientación de la aplicación IPL de Lumea garantizan una piel suave durante más tiempo.

Suavidad y eficacia para conseguir una piel sedosa por más tiempo

- Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos
- Uso con o sin cable para disfrutar de mayor comodidad
- Desarrollado con dermatólogos para ser fácil y efectivo

Solución completa para cara y cuerpo

- Solución completa para la cara y el cuerpo con 4 accesorios inteligentes
- Adecuado para la mayoría de tonos de piel y colores de vello

Tratamiento personalizado IPL para eliminar el vello

- Suavidad y comodidad con SenseIQ
- Análisis inteligente del vello corporal con SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

BRI951/01

Destacados

2 veces al mes para obtener resultados rápidos




Para empezar, sesiones cada dos semanas (la mitad de tratamientos que otras marcas), seguido de un retoque una vez al mes: eso es todo. Depilar ambas piernas solo requiere 8,5 minutos.

Tecnología SenseIQ



Lumea serie 9900 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Uso con o sin cable para disfrutar de mayor comodidad

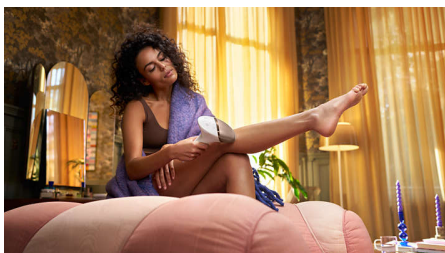

Philips Lumea está diseñada para resultar cómoda y fácil de usar. Utiliza el dispositivo con el cable para tratar rápido zonas del cuerpo más

amplias, como las piernas, o de forma inalámbrica con la batería para tratar con precisión las zonas del cuerpo de difícil acceso.

4 accesorios inteligentes




Los accesorios especialmente diseñados se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y activan los programas más eficaces para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Cara: diseño plano y pequeña ventana con filtro UV. Cuerpo: curvado hacia dentro con una ventana grande. Bikini y axilas: curvado hacia fuera para zonas de difícil acceso.

Desarrollado junto con dermatólogos



Como líderes en la tecnología sanitaria, en Philips han desarrollado Lumea IPL consultándolo con dermatólogos, para un uso fácil y efectivo en la seguridad de tu hogar. Derivado de la tecnología utilizada en los salones profesionales, Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

Funciones exclusivas de SkinAI

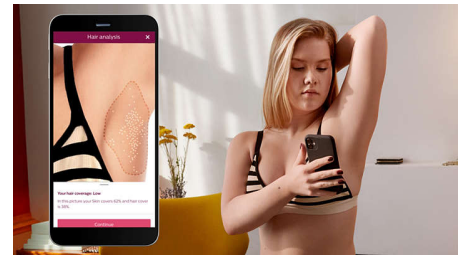

Nuestra aplicación de asesoramiento gratuita ofrece indicaciones paso a paso, ahora con la exclusiva tecnología SkinAI, para analizar tu vello corporal y hacer un seguimiento de la reducción del vello.

Para la mayoría de tipos de piel y vello



IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a oscuro (I- V).

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para tratamiento del cuerpo: Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm², Tratamiento personalizado para el cuerpo: piernas, brazos y abdomen

Accesorio para tratamiento de la cara: Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm², filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara: labio superior, barbilla y mandíbula

Accesorio para el tratamiento de la zona del bikini: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para la sensible zona del bikini

Accesorio para el tratamiento en las axilas: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para las axilas

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a

tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsaciones de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a petición

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para aplicación rápida

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas pequeñas

Uso con/sin cable: Uso con y sin cable

Especificaciones técnicas

Tipo de batería: Batería recargable

Tensión: 100-240 V

Bombilla de alto rendimiento: Diseño duradero, proporciona 450.000 pulsos, equivalente a 39 años de vida útil de la lámpara**

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa y 1 año adicional de garantía al registrar el producto en 90 días

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de lujo

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8,5 min.

Axilas: 2,5 minutos

Línea del bikini: 2 min

Zonas de la cara: 1,5 minutos

