

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhed

Lumea IPL 7000
Series

5 manuelle
intensitetsindstillinger

2 tilbehørsdele: krop, ansigt

Lumea IPL-app

Brug med ledning

BRI922/00



Fantastiske resultater, fantastisk værdi

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud*

Opnå hårfri, glat hud med vores Lumea IPL 7000-serie. Behandlinger er nænsomme og effektive med tilbehør til hvert kropsområde.

Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Hurtige resultater med behandlinger kun hver 2. uge
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv
- Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Komplet løsning til ansigt og krop


- Komplet løsning til ansigt og krop med 2 tilbehørsdele
- Leveres med VisaPure-mini-ansigtsrenser
- Velegnet til en lang række hudfarver og hårfarver

Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Sensor for hudtone og 5 intensitetsindstillinger
- Optimer din rutine med Philips Lumea IPL-appen


Vigtigste nyheder

2x om måneden for hurtige resultater

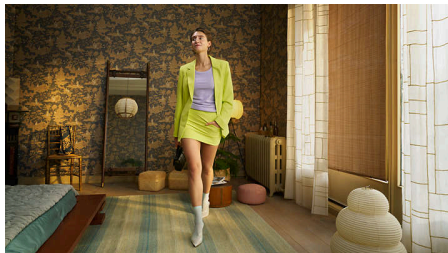


Kom i gang med den indledende fase med 4 behandlinger kun hver 2. uge – det er halvt så mange behandlinger som andre mærker. Derefter skal du blot følge op hver måned for at bevare resultatet.

Hudfarvesensor

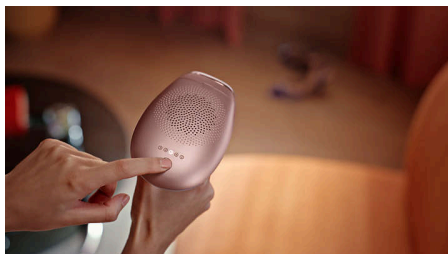


Vælg mellem 5 intensitetsindstillinger for at få en behagelig oplevelse. Hudfarvesensoren forhindrer dig i at behandle områder af din hud, der er for mørke til IPL-behandling.

Ekstra langt kabel

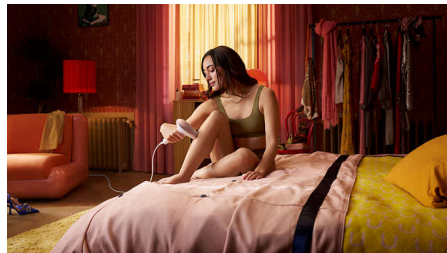


Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvrerdygtighed.

2 dedikerede tilbehørsdele

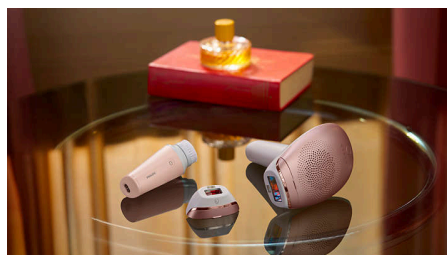

Forskellige hoveder til arbejde på kroppen og i ansigtet med hastighed og præcision til skånsom brug, selv på sensitive områder. Ansigtstilbehøret har et integreret lysfilter, som giver præcis behandling.


Udviklet i samarbejde med dermatologer

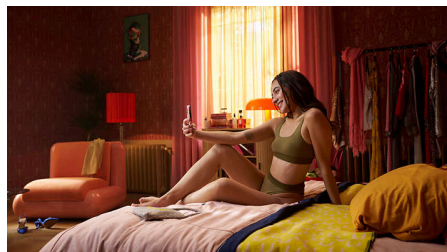

Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem,

effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

Philips Lumea IPL-appen

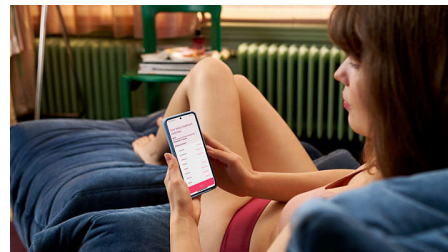


Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.

VisaPure-mini-ansigtsrenser

Fuldfør din skønhedspleje: VisaPure-mini-ansigtsrenseren er en kompakt og nem enhed til rensning af huden, der giver synligt frisk og blød hud.

Til mange hud- og hårtyper

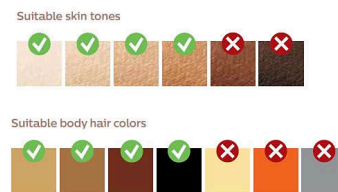

IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mellembrown (I-IV).

Specifikationer

Tekniske specifikationer for tilbehør

Kropstilbehør: Vinduesstørrelse: 4,0 cm²,
Behandling af kroppen: ben, arme, mave og
under armene

Ansigtstilbehør: Vinduesstørrelse: 2 cm², ekstra
filter, Behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og
kæbelinje

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filter: Beskytter huden mod UV-lys
5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din
hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgår utilsigtede
blink

Programtilstand

Slide and Flash: For hurtig anvendelse

Stamp and Flash: Til behandling på små områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Brug med
ledning

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Bygget til at holde,
250.000 blink, svarende til 20 års pærelevetid**

Spænding: 100-240 V

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti
ved produktregistrering inden for 90 dage

Medfølgende dele

Instructions for use: Brugervejledning

Opbevaring: Skønhedsetui

Adapter: 24 V/1500 mA

Anvendelsestid

Underben: 15 min.

Under armene: 2,5 min.

Bikini line: 4 min

Face areas: 2 min

VisaPure-mini-ansigtsrenser

Tilbehør: Børstehoved til normal hud,

Strømadapter

Strøm: Strømadapter

