

PHILIPS



Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Sensor SmartSkin

4 acessórios inteligentes: corpo, rosto, linha do biquíni, axilas

Funcionalidades exclusivas da aplicação com tecnologia AI

Utilização com e sem fios



BRI951/01

Versão sem fios para um tratamento personalizado com SenseIQ

Desfrute de uma pele macia sem pelos durante 12 meses*

Desfrute de um tratamento personalizado e sem complicações com a versão sem fios do nosso dispositivo Lumea IPL mais rápido. Tecnologia SenseIQ com acessórios inteligentes e orientação na aplicação Lumea IPL para lhe proporcionar uma pele macia de longa duração.

Suave e eficaz para uma pele macia de longa duração

- Resultados rápidos com tratamentos apenas a cada duas semanas
- Para maior comodidade com as opções com e sem fios
- Desenvolvido em colaboração com dermatologistas para ser fácil e eficaz

Solução completa para rosto e corpo

- Solução completa para rosto e corpo com 4 acessórios inteligentes
- Adequado para a maioria dos tons de pele e cores de pelo

Tratamento personalizado para a remoção dos pelos através de IPL

- Suave e confortável com tecnologia SenseIQ
- Análise de pelo corporal inteligente com SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

Destaques

2 vezes por mês para obter resultados rápidos



Comece a fase inicial de quatro tratamentos apenas a cada duas semanas, o que representa metade do número de tratamentos das outras marcas. Depois, retoque mensalmente para manter os resultados.

Tecnologia SenseIQ



O Lumea Prestige da série 9900 tem cinco definições de luz facilmente ajustáveis. O nosso sensor SmartSkin deteta o seu tom de pele e ajuda-o a encontrar a definição mais confortável. Os acessórios inteligentes adaptam o tratamento a cada zona do corpo.

Para maior comodidade com as opções com e sem fios



A Philips Lumea foi concebida para ser conveniente e fácil de usar. Utilize o dispositivo com cabo para um tratamento rápido em zonas

do corpo de grandes dimensões, como as pernas, ou utilize o modo de bateria sem cabo para tratar áreas do corpo de difícil acesso com precisão.

4 acessórios inteligentes



Acessórios especialmente concebidos adaptam-se perfeitamente às curvas do corpo e acionam os programas mais eficazes para cada zona do corpo quando estão ligados. Rosto: design plano e janela pequena com filtro UV. Corpo: interior curvado com uma janela grande. Linha do biquíni e axilas: exterior curvado para áreas de difícil acesso.


Desenvolvido por dermatologistas



Como líder em tecnologia de saúde, a Philips desenvolveu o Lumea IPL em consulta com dermatologistas, para uma utilização fácil e eficaz na segurança da sua casa. Baseado na tecnologia utilizada em cabeleiros profissionais, o Lumea IPL oferece um tratamento suave, mesmo em zonas sensíveis.

BRI951/01

Funcionalidades SkinAI exclusivas

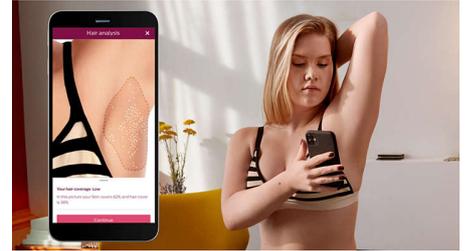

A nossa aplicação de treino gratuita oferece orientação passo a passo com a tecnologia exclusiva SkinAI para analisar o seu pelo e monitorizar a redução dos pelos.

Para a maioria de tipos de pele e pelos



A IPL precisa de contraste entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele, por isso, funciona em pelos louros escuros, castanhos e pretos naturais e em tons de pele de castanho claro a escuro (I-IV).

Lumea IPL 9900 Series

Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

BRI951/01

Especificações

Anexos de especificações técnicas

Acessório para tratamento corporal: Formato: curvo convexo, Tamanho da janela: 4,1 cm², Tratamento adaptado para o corpo: pernas, braços e abdómen

Acessório para tratamento facial: Formato: plano, Tamanho da janela: 2 cm², filtro extra, Tratamento adaptado para o rosto: buço, queixo e maxilar

Acessório para tratamento na linha do biquíni: Formato: curvo côncavo, Tamanho da janela: 3 cm², Tratamento adaptado para linha sensível do biquíni

Acessório para tratamento nas axilas: Formato: curvo côncavo, Tamanho da janela: 3 cm², Tratamento adaptado para axilas

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV
5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evita impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Deteta o seu tom de pele
Sensor SmartSkin: Indicação de intensidade de luz sempre visível

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para aplicação rápida

Marcas e pulsar: Para tratamento em áreas pequenas

Utilização com/sem fios: Utilização com e sem fios

Especificações técnicas

Voltagem: 100-240 V

Tipo de pilha: Bateria recarregável

Lâmpada de alto desempenho: Construído para durar, 450 000 impulsos de luz, equivalentes a 39 anos de vida útil da lâmpada**

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global + 3 anos extra de garantia após o registo do produto no prazo de 90 dias

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa de luxo

Adaptador: 19,5 V / 4000 mA

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8,5 min

Axilas: 2,5 min

Linha do biquíni: 2 min

Zonas do rosto: 1,5 min

