

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
rechargeable

Confident Clean

Technologie Sonique

Capteur de pression

3 modes de brossage

QuadPacer et SmarTimer



HX3696/62

Dites adieu au brossage manuel : adoptez la technologie sonique.

Jusqu'à 7 fois plus efficace pour éliminer la plaque dentaire*

La technologie sonique associée à notre action de brossage est jusqu'à 7 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Programme Easy-Start pour faciliter la transition
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Longue autonomie de 14 jours

Assure un nettoyage optimal

- Élimination de la plaque jusqu'à 7 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

Optimisez votre brossage

- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

Protège vos gencives

- Le capteur de pression intégré protège vos dents et vos gencives


Caractéristiques

Technologie avancée Philips Sonicare




Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

7 fois plus efficace pour éliminer la plaque dentaire*

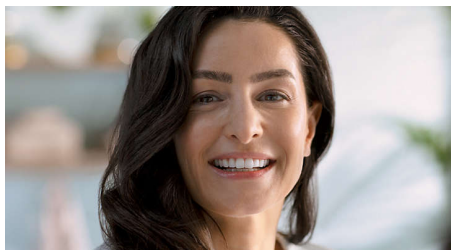

Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Philips Sonicare, dotée d'une technologie sonore avancée, élimine la plaque dentaire jusqu'à 7 fois plus efficacement* qu'une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire au niveau des dents et du liseré gingival tout en protégeant vos gencives.

Protège vos gencives

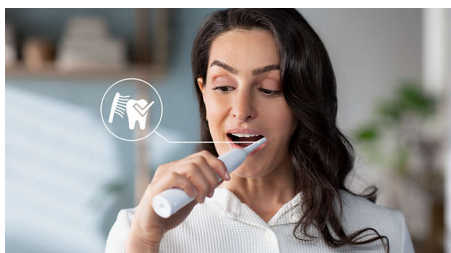

Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous

rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.

SmartTimer et QuadPacer




La fonction SmartTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

3 modes de brossage



La brosse à dents Philips Sonicare Series 5000 propose 3 modes de brossage adaptés à tous vos besoins. Elle vous permet de basculer facilement entre les modes Sensitive, Clean et Whitening afin d'optimiser votre expérience de brossage.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™

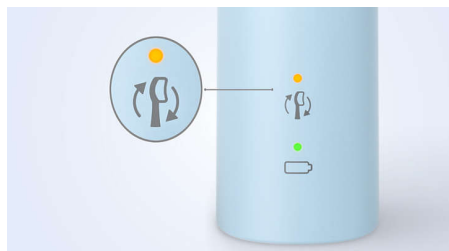

Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement

BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.

Fonction Easy-Start



Notre programme Easy-Start vous offre la possibilité d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.

Une batterie longue durée



Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

Coffret de voyage avec assainisseur UV



Notre coffret de voyage haut de gamme vous permet de ranger votre brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre socle de charge USB compact maintient son autonomie lors de vos déplacements. Une simple charge offre deux semaines d'utilisation régulière, et le chargeur est idéal pour les déplacements prolongés. De plus, il est doté d'une fonction d'assainissement UV qui élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries présentes sur la tête de brosse*.

Spécifications

Alimentation

Tension: DC5V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 14 jours

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc et bleu ciel

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Rappel de remplacement de la tête avec la

technologie BrushSync: Pour garantir des

résultats optimaux, Le symbole de rappel

s'allume

Accessoires inclus

Étui de voyage: 1

Chargeur: 2

Manche: 2 Confident Clean / 5000 Series

Tête de brosse: 2 C2 Optimal Plaque Defense, 2 W DiamondClean

Coffret de voyage UV: 1

Adaptateur secteur USB: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Modes: Clean, Sensitive, Éclaircissement

Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir

quand, remplacer les têtes de brosse

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

