

PHILIPS



IPL prístroj na odstránenie
chĺpkov s tech. SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Senzor SmartSkin

2 inteligentné nastavce: telo,
tvár

Exkluzívne funkcie aplikácie
založené na umelej inteligencii

Používanie bez kábla aj s káblom



BRI950/01

Naše najinteligentnejšie IPL s exkluzívnymi funkciami SkinAI

Tešte sa z hladkej pokožky bez chĺpkov až 12 mesiacov*

Objavte naše najinteligentnejšie riešenie IPL pre dlhotrvajúci pocit hladkej pokožky. Naše najrýchlejšie bezkáblové zariadenie Lumea IPL s technológiou SenseIQ teraz obsahuje exkluzívne funkcie SkinAI v aplikácii Lumea IPL na analýzu vašej pokožky a sledovanie pokroku.

Šetrné a účinné pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku

- Rýchle výsledky s ošetrením len každé 2 týždne
- Pohodlné používanie s káblom aj bez kábla
- Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi s ohľadom na jednoduchosť a účinnosť

Kompletné riešenie pre tvár a telo

- Kompletné riešenie na ošetrovanie tváre a tela s 2 nastavcami
- Vhodné pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chĺpkov

Personalizované ošetrovanie epiláciou IPL

- Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ
- Inteligentná analýza ochlpenia tela so SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

IPL prístroj na odstránenie chlpkov s tech. SenseIQ

BRI950/01

Hlavné prvky

2x mesačne pre rýchle výsledky




Začnite s úvodnou fázou 4 ošetrení len každé 2 týždne – to je o polovicu menej ošetrení ako u iných značiek. Potom každý mesiac upravte, aby ste si udržali výsledky.

Technológia SenseIQ



Séria Lumea 9900 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomáha vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nadstavce prispôbujú ošetrovanie každej oblasti tela.

Pohodlné používanie s káblom aj bez kábla

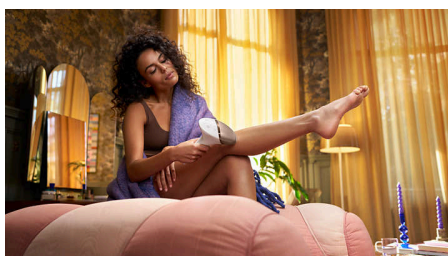

Zariadenie Philips Lumea je navrhnuté tak, aby sa pohodlne a jednoducho používalo. Používajte zariadenie s káblom na rýchle ošetrovanie veľkých

častí tela, napríklad nôh, alebo využite bezdrôtový batériový režim na presné ošetrovanie ťažko dostupných oblastí tela.

2 inteligentné nadstavce




Špeciálne navrhnuté nadstavce sa dokonale hodia ku krivkám vášho tela a spustia najúčinnnejšie programy pre každú oblasť tela, keď sú pripojené. Tvár: plochý dizajn a malý prierez s UV filtrom. Telo: zakrivený smerom dovnútra s veľkým prierezom.

Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi



Spoločnosť Philips ako líder v oblasti zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne používanie v bezpečnosti vášho domova. Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe technológie používanej v profesionálnych salónoch, ponúka jemné ošetrovanie aj v citlivých oblastiach.

Exkluzívne funkcie SkinAI

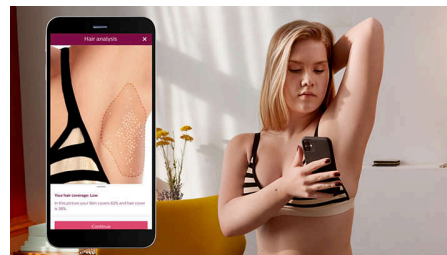

Naša bezplatná sprievodná aplikácia teraz ponúka podrobné pokyny s exkluzívnou technológiou SkinAI na analýzu vášho ochlpenia tela a sledovanie redukcie chlpkov.

Pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chlpkov



IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo farbe chlpkov a pigmentom v odtieni pokožky, preto funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých aj čiernych chlpkoch a na odtieňoch pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – V).

Technické údaje

Technické špecifikácie, nastavce

Nadstavec na ošetrovanie tela: Tvar: konvexný,
Plocha priezoru: 4,1 cm², Prispôsobená na
ošetrovanie tela: nohy, ruky a brucho

Nadstavec na ošetrovanie tváre: Tvar: plochý,
Plocha priezoru: 2 cm², prídavný filter,
Prispôsobená na ošetrovanie tváre: horná pera,
brada a čelusť

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Zabudovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV
žiarením

5 nastavení intenzity ošetrenia: Prispôsobiteľné
typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje
neúmyselnej aktivácii zábleskov

Senzor odtieňa pokožky: Rozpoznáva odtieň

vašej pokožky

Senzor SmartSkin: Indikácia vhodného
nastavenia na požiadanie

Druh použitia

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní: Na
rýchle použitie

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie
malých oblastí

Použitie s káblom aj bez kábla: Používanie bez
kábla aj s káblom

Technické údaje

Typ batérie: Nabíjateľná batéria

Napätie: 100-240 V

Vysokovýkonná lampa: Vyrobené pre dlhú
životnosť, 450 000 zábleskov, čo zodpovedá 39
rokom životnosti lampy***

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok
záruky navyše po registrácii produktu do 90 dní

Pribalené príslušenstvo

Pokyny pre použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Luxusné puzdro

Adaptér: 19,5 V/4 000 mA

Čas aplikácie

Spodná časť nôh: 8,5 min

Podpazušie: 2,5 min

Oblasť bikín: 2 min

Tvár: 1,5 min

