

PHILIPS



IPL epilátor s funkcí
SenselQ

Lumea IPL 9900
Series

Senzor SmartSkin

2 chytré nastavce: na tělo, na
obličej

Exkluzivní funkce aplikace na
základě umělé inteligence

Použití s kabelem i bez něj



BRI950/01

Náš nejchytřejší systém IPL s exkluzivními funkcemi SkinAI

Užijte si 12 měsíců hladké pokožky bez chloupků*

Objevte náš dosud nejchytřejší přístroj IPL pro dlouhotrvající hladkou pokožku. Naše nejrychlejší bezdrátové zařízení Lumea IPL s technologií SenselQ je nyní vybaveno funkcemi SkinAI v aplikaci Lumea IPL pro analýzu pokožky a sledování postupu.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Rychlé výsledky s ošetřením pouze každé 2 týdny
- Pro pohodlí s možností napájení kabelem i bezdrátově
- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné, bezpečné a účinné použití

Kompletní ošetření těla i obličeje

- Kompletní ošetření těla i obličeje se 2 chytrými nastavci
- Vhodné pro většinu odstínů pokožky a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Šetrnost a pohodlí díky technologii SenselQ
- Inteligentní analýza chloupků na těle pomocí technologie SkinAI

Přednosti

2x měsíčně pro rychlé výsledky




Začněte s počáteční fází 4 ošetření pouze každé 2 týdny – to je polovina ošetření oproti jiným značkám. Poté každý měsíc provádějte drobné úpravy, abyste si zachovali výsledky.

Technologie SenseIQ



IPL epilátor Lumea 9900 nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nástavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.

Pro pohodlí s možností napájení kabelem i bezdrátově

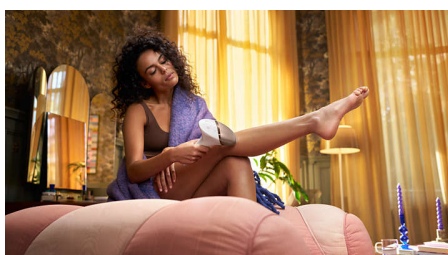

Philips Lumea je navržen tak, aby byl pohodlný a snadno se používal. Používejte přístroj s kabelem pro rychlé ošetření velkých ploch těla,

jako jsou nohy, nebo využijte bezdrátový bateriový režim pro přesné ošetření těžko přístupných oblastí těla.

2 chytré nástavce




Speciálně navržené nástavce jsou dokonale přizpůsobeny křivkám vašeho těla a po připojení spustí ten nejefektivnější program pro každou oblast. Obličej: Plochý design a malé okénko s UV filtrem. Tělo: Zakřivený směrem dovnitř s velkým okénkem.

Vyvinuto ve spolupráci s dermatology



Společnost Philips je přední výrobce zdravotnických technologií a ve spolupráci s dermatology vyvinula IPL epilátor Lumea pro snadné, bezpečné a efektivní použití v soukromí vašeho domova. Zařízení Lumea IPL je založeno na technologiích používaných v profesionálních salonech a nabízí jemné ošetření i v citlivých oblastech.

Exkluzivní funkce SkinAI

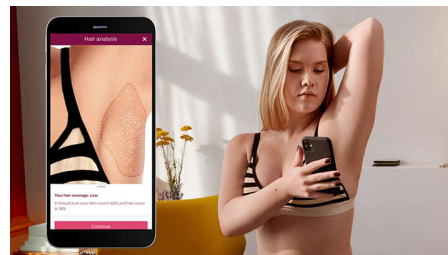

Naše bezplatná asistenční aplikace vám poskytne podrobné pokyny a je nyní vybavena exkluzivní technologií SkinAI, díky které dovede analyzovat chloupky na těle a sledovat redukci chloupků.

Pro většinu typů pokožky a chloupků



Přístroj IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupků a pigmentem pleti, proto nejlépe funguje na přirozeně hnědých a černých chloupkách a světlých až tmavě hnědých odstínech pleti (I-V).

Specifikace

Přílohy s technickými údaji

Nástavec pro epilaci těla: Tvar: konvexní zakřivení, Velikost okénka: 4,1 cm², Ošetření na míru pro tělo: nohy, paže a břicho

Nástavec pro epilaci tváře: Tvar: plochý, Velikost okénka: 2 cm², speciální filtr, Ošetření na míru pro obličej: horní ret, brada a oblouk čelisti

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabraňuje nechtěným zábleskům

Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší

pokožky

Snímač SmartSkin: Indikace vhodného nastavení podle potřeby

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro rychlé použití

Přítlačení a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Použití s kabelem / bezdrátové: Použití s kabelem i bez něj

Technické údaje

Typ baterie: Nabíjecí baterie

Napětí: 100–240 V

Vysoce výkonná lampa: Dlouhodobá výdrž, 450 000 záblesků pulzního světla, což odpovídá 39 letům životnosti lampy****

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Včetně položek

Návod k obsluze: Uživatelská příručka

Skladování: Luxusní pouzdro

Adaptér: 19,5 V / 4 000 mA

Doba aplikace

Holeň: 8,5 min

Podpaží: 2,5 min

Linie bikin: 2 minuty

Oblast tváře: 1,5 min

