



PHILIPS

AVENT

Produkty dla rodziców i dziecka

Jesień/zima
2024/2025

Spis treści

4	Laktatory
6	Nianie elektroniczne
7	Sterylizatory
8	Urządzenia do przygotowywania pokarmów
9	Podgrzewacze do butelek
10	Notatki

Efektywny i komfortowy sposób na odciąganie mleka

Zainspirowany przez naturę, efektywny dla mamy

Elektryczny laktator Philips Avent zapewnia skuteczny wypływ pokarmu i dostosowuje się do rozmiaru i kształtu brodawki sutkowej. Charakteryzuje go najnowsza technologia Natural Motion, w której ssanie i nacisk na sutek perfekcyjnie odwzorowują zachowanie dziecka w trakcie karmienia.



SCF396/31

Laktator elektryczny



Technologia Natural Motion zapewnia szybszy wypływ pokarmu*

Odciągaj więcej pokarmu w krótszym czasie* dzięki nakładce, która stymuluje brodawkę i odciąga mleko tak, jak dziecko. Urządzenie płynnie przechodzi z trybu stymulacji do trybu odciągania pokarmu i odpowiednio stymuluje brodawkę oraz rozpoczyna ssanie, aby uzyskać maksymalny wypływ pokarmu.

W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu. (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER)



Jeden rozmiar nakładki laktatora pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek sutkowych, aż do 30mm średnicy.

Dzięki temu nie ma potrzeby próbowania różnych rozmiarów lejków.



Cichy

Akumulator pozwala na komfortowe użytkowanie laktatora w pracy lub w podróży.



Spersonalizowana obsługa, 8-16 poziomów ustawień

Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu, co pozwala uzyskać spersonalizowaną obsługę.



Wposażony w akumulator dla bezprzewodowego odciągania.

Bezproblemowe odciąganie

Odciągaj mleko przyjemnie, efektywnie i bez wysiłku

Szybkość, komfort i wygoda dla każdej świeżo upieczonej mamy. Dzięki systemowi zamkniętego odciągania pokarm odciągany jest bezpośrednio do butelki. Mniejsza liczba części sprawia, że montaż i demontaż urządzenia jest bardzo łatwy. Dodatkowo, superlekka konstrukcja ułatwia przenoszenie urządzenia. Laktator zapewnia 4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu, co pozwala dobrać sposób odciągania do własnych potrzeb i preferencji. Urządzenie automatycznie zapamiętuje ostatnie ustawienia, więc wystarczy usiąść i nacisnąć start.



SCF323/11 Laktator elektryczny Philips Avent Essential



Miękka silikonowa uniwersalna nakładka dostosowująca się do kształtu i rozmiaru piersi.



Spersonalizowana obsługa 4+4
4 poziomy stymulacji brodawki, 4 poziomy odciągania pokarmu.



Funkcja pamięci ulubionych ustawień siły ssania. Przedni panel dotykowy ze wskaźnikiem LED



Lekka i kompaktowa konstrukcja – tylko 185g
Intuicyjne użytkowanie, łatwe czyszczenie i złożenie

nowość

Podwójny laktator



Model	SCF397/31	SCF396/31	SCF391/11	SCF323/11
Specyfikacja				
Uniwersalny lejek dopasowujący się do 99,89% kształtów i rozmiarów brodawki	•	•	•	•
Technologia Natural Motion odwzorowująca naturalny sposób ssania piersi przez dziecko	•	•	•	
Smoczek i butelka Natural w zestawie	•	•	•	Butelka bez smoczka
Bezprzewodowość (wbudowany akumulator)	Możliwość zasilania przez powerbank	•	Możliwość zasilania przez powerbank	Możliwość zasilania przez powerbank
2 fazy: stymulacja/odciąganie	•	•	•	•
Ilość trybów pracy	24 (8+16)	24 (8+16)	24 (8+16)	8 (4+4)
Wyświetlacz LED		•		
Funkcja pamięci	•	•	•	•
Wkładki laktacyjne w zestawie	• Podwójne	•	•	

Spokój i pewność, nieważne gdzie jesteś

Monitorowanie o dużym zasięgu

Zawsze bądź spokojny o bezpieczeństwo maluszka – nieważne, co robisz i gdzie jesteś, dzięki inteligentnej Niani Video Premium z darmową aplikacją Baby Monitor+, doskonałym obrazem full HD i komunikacją dwukierunkową będzie to łatwe i proste.

SCD923/26 Niania Video Premium Full HD



Bezpieczne i pewne połączenie

Videoniania Premium od Philips Avent wykorzystuje sieć Wi-Fi, a także kanał na falach radiowych, aby zapewnić stabilne i pewne połączenie w domu oraz jego okolicy także w razie braku dostępu do Internetu.



Aplikacja Baby Monitor+

Nianie Philips z łatwością połączysz też z aplikacją mobilną Baby Monitor+, dzięki czemu zasięg staje się nieograniczony. Możesz pozostać w bliskim kontakcie ze swoim dzieckiem, niezależnie gdzie jesteś i co robisz wykorzystując mobilny Internet lub sieć Wi-Fi. Aplikacja dostępna na systemy iOS i Android.



Kamera Full HD z funkcją noktowizora i cyfrowym powiększeniem

Najwyższej jakości obraz dla największej wygody z ekranem o przekątnej 4.3 cala.



Komunikacja w czasie rzeczywistym

Urządzenie daje możliwość dwukierunkowej komunikacji w tym samym czasie. Możesz mówić do maluszka i słuchać go w tym samym czasie, bez zbędnego opóźnienia, a nie na zasadzie walkie-talkie.



Model	SCD923/26	SCD835/52	SCD502/26
Specyfikacja			
Technologia	Direct link/Wi-Fi	FHSS	DECT
Obraz video	•	•	
Wielkość ekranu w jednostce rodzica	4,3"	2,7"	
Zasięg (do)	400 m	300 m	300 m
Tryb ECO	•	•	•
Wyświetlacz (jednostka rodzica)	•	•	
Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym	•	•	
Wbudowana Lampka nocna	•		•
Wbudowane kołysanki	•	•	
Czas działania	do 12 godz.	do 10 godz.	do 24 godz.
Czujnik temperatury	•		
Połączenie z aplikacją Baby Monitor+	•		


Sterylizacja parowa, suszenie i przechowywanie w jednym urządzeniu

Skuteczna sterylizacja w 10 minut

Przygotuj się na kolejne karmienie dziecka w 40 minut. Sterylizator do butelek i suszarka Premium wykorzystuje strumień filtrowanego powietrza do suszenia butelek przed wyłączeniem. Sterylizator jest szybki i higieniczny, zabija 99,9% zarasków* i zapewnia spokój podczas każdego karmienia.

SCF291/00

Sterylizator parowy

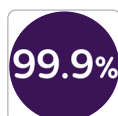

Philips Avent zabija 99,99% bakterii *

Sterylizator jest szybki i higieniczny, przed każdym wyłączeniem zabija automatycznie bakterie, zapewniając spokój podczas każdego karmienia, bez użycia środków chemicznych.



Pełny cykl sterylizacji i suszenia trwa zaledwie 40 minut

10 minut – tyle czasu potrzeba aby urządzenie wykonało pełen proces sterylizacji parą.

30 minut – strumień przefiltrowanego powietrza osuszy w tym czasie urządzenie.

Przygotowanie butelek do następnego karmienia zajmuje zaledwie 40 minut. Po przeprowadzeniu sterylizacji czystą parą intensywny strumień przefiltrowanego powietrza suszy butelki i akcesoria, dzięki czemu są one gotowe do natychmiastowego użycia.



Pojemność i możliwość regulacji wielkości sterylizatora

W sterylizatorze zmieszczą się wszystkie podstawowe akcesoria, od smoczków do ręcznego laktatora lub nawet sześć butelek Philips Avent. Wymienne części wewnętrzne pozwalają dostosować wielkość urządzenia do własnych potrzeb i ilości sterylizowanych akcesoriów, zapewniając kompaktowość i wygodę oraz szybkie i proste czyszczenie.



Zachowuje sterylność przez 24 godziny

Dokładne czyszczenie sterylizatora bez użycia środków chemicznych pozwoli Ci zachować sterylność jego zawartości do 24 godzin. Jak? Trzymaj pokrywkę zamkniętą.

Nowa tacka ociekowa chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, zmniejszając ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych zapachów.



Model	SCF293/00	SCF291/00	SCF281/02
Specyfikacja			
Typ	Elektryczny sterylizator parowy	Elektryczny sterylizator parowy	Parowy sterylizator do mikrofal
Czas sterylizacji	10 min	10 min	2 min
Funkcja suszenia	•		
Czas suszenia	30 min		
Długość utrzymania sterylności (z założoną pokrywką)	24 godz.	24 godz.	24 godz.
Pojemność	Do 6 butelek z akcesoriami	Do 6 butelek z akcesoriami	Do 4 butelek
Konstrukcja optymalizująca przestrzeń	•	•	
Wbudowana tacka do ociekania	•	•	
Automatyczne wyłączenie	•	•	

*Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Wyniki testów są dostarczane przez niezależne laboratorium testowe.

Sposób na zdrowy i prosty posiłek dla dziecka

Urządzenie do przygotowywania pokarmów 4 w 1

Parowaro-blender 4 w 1 pozwala na gotowanie na parze, odmrażanie, podgrzewanie i rozdrabnianie. Komponuj pożywne domowe posiłki w jednym naczyniu.



SCF885/01

Parowaro-blender 4 w 1



Gotuj na parze i blenduj

Kiedy składniki są już ugotowane na parze, wystarczy, że obrócisz dzbanek do góry dnem, zablokujesz w odpowiednim miejscu i zmiksujesz składniki do wybranej konsystencji.



Pojemność dostosowana do potrzeb

Dzbanek ma pojemność 1000 ml, więc możesz przygotować w nim nawet cztery porcje jednocześnie.



Łatwe i wygodne użytkowanie

Nie musisz czekać ani pilnować urządzenia. Charakterystyczny dźwięk poinformuje Cię, gdy jedzenie będzie idealnie ugotowane.



Model	SCF885/01	SCF870/20
Specyfikacja		
Technologia równego gotowania na parze	•	•
Gotowanie na parze	•	•
Rozdrabnianie	•	•
Rozmrażanie	•	
Podgrzewanie	•	
Moc	400 W	400 W
Pojemność kielicha	1000 ml	800 ml
Pojemnik na pokarm	•	
Sygnal dźwiękowy	•	
Książka kucharska	•	

Szybkie i równomierne podgrzewanie pokarmu

Podgrzewa mleko szybko i równomiernie

Łagodne rozmrażanie i podgrzewanie pokarmu zapewnia zachowanie wszystkich wartości odżywczych mleka matki.



SCF355/07

Podgrzewacz do butelek



Pokarm gotowy do podania w 3 minuty

Podgrzewa butelkę mleka o pojemności 150ml w 3 minuty!



Równomierne podgrzewanie i cyrkulacja pokarmu

Równomierne podgrzewanie z cyrkulacją pokarmu zapobiega powstawaniu wysp gorącego pokarmu, dzięki czemu zapobiega poparzeniom.



Inteligentny czujnik temperatury

Wbudowany czujnik temperatury automatycznie wykrywa początkową temperaturę pokarmu i odpowiednio podgrzewa go do optymalnego poziomu lub rozmraża do płynnej postaci, a następnie podgrzewa.



Funkcja rozmrażania

Delikatnie rozmroź zamrożone mleko lub przygotowany posiłek.



Model	SCF358/00	SCF355/09
Specyfikacja		
Równomierne podgrzewanie (bez gorących wysp)	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła	•	•
Funkcja stopniowego rozmrażania	•	•
Uniwersalny kształt pasujący do wszystkich butelek i pojemników na pokarm Avent	•	•
Funkcja podgrzewania stałego pokarmu	•	•
Sygnalizacja wizualna ukończonego podgrzewania	•	•
Funkcja szybkiego podgrzewania	•	•
Automatyczne wyłączanie	•	
Automatyczne ustawianie czasu podgrzewania dopasowane do wielkości butelki	•	



www.philips.pl