

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
elétrica sónica

ProtectiveClean 4700

Sensor de pressão integrado

2 modos de limpeza

1 x funcionalidade BrushSync



HX6483

Dentes mais limpos, suave para a boca.

Remove até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto remove até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Proven to improve oral health

- Maior contacto com a superfície para eliminar a placa bacteriana

Innovative technology

- Um leve lembrete para escovar mais suavemente
- Os pacientes tiram o máximo partido das suas cabeças de escova
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

Optimize your brushing


- Modo Clean e Gum Care

Designed around your patient

- Uma ótima forma para se habituar à sua nova escova de dentes
- Incentivo para uma escovagem completa

Destaques

Remove até 10x mais placa bacteriana*

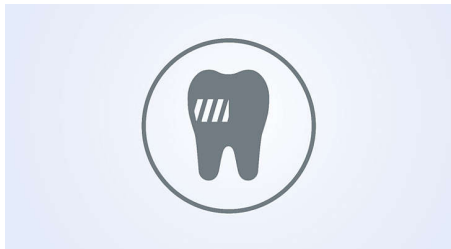


A cabeça de escova C3 Premium Plaque Control proporciona a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com laterais macias e flexíveis, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior** e a remover até 10x mais placa bacteriana das áreas difíceis de alcançar*.

Demasiada pressão?



Os pacientes podem não saber que estão a escovar com demasiada força, mas a escova de dentes sabe. Se os pacientes começarem a pressionar as gengivas, a escova de dentes emitirá um som pulsante como lembrete para aliviar a pressão.

Modo Clean e Gum Care

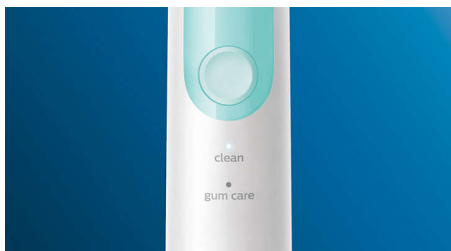

Quer pretenda focar-se na remoção da placa dentária ou na saúde das suas gengivas e na preservação da mesma, esta escova tem um

modo para si: o modo Clean proporciona uma limpeza superior, enquanto o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as gengivas.

Tecnologia BrushSync




A tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega. A pega inteligente e a cabeça inteligente da escova são uma combinação poderosa que fornece avisos de substituição inteligentes.

Avisos de substituição inteligentes




Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas também pensámos nisso: a nossa tecnologia inteligente de reconhecimento de escovas monitoriza há quanto tempo os pacientes estão a utilizar a cabeça da escova e a força que exercem ao escovar. Quando é altura de a substituir, uma luz na pega informa o paciente. Assim, o paciente pode estar seguro de que a cabeça da escova está a fazer um trabalho fantástico de forma consistente.

Programa Easy-start

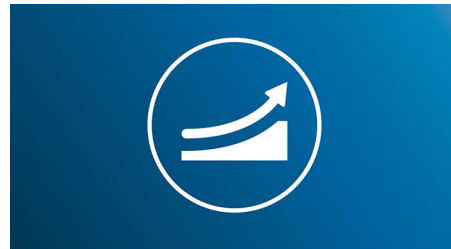

Adaptar-se a algo novo pode demorar algum tempo. É por isso que o nosso programa de início fácil oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

Temporizadores úteis

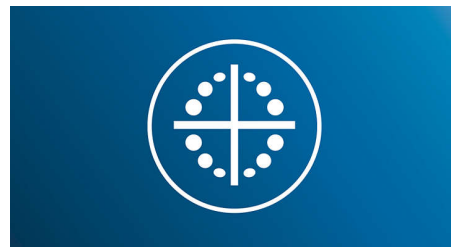

O nosso Quadpacer permite aos pacientes saberem quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando devem terminar o período recomendado de dois minutos.

Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

ProtectiveClean 4700

Escova de dentes elétrica sónica

HX6483/52

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): até 2 semanas

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo de energia: Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

Design e acabamento

Cor: Branco hortelã

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Tempo de escovagem: até 2 semanas

Itens incluídos

Pega: 1 ProtectiveClean

Cabeças de escova: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White padrão

Estojo de viagem: Estojo de viagem rígido

Carregador: 1

Desempenho de limpeza

Benefícios para a saúde: Ajuda a reduzir as cáries

Performance: Remove até 10x mais placa bacteriana*

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excecional

Cuidado das gengivas: Massaja suavemente as gengivas

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

