

PHILIPS

sonicare



Oppladbar sonisk
tannbørste

6100

Fjerner opptil 20 ganger så mye
plakk

To modi, tre intensitetsnivåer

Synlig trykkvarsel

21-dagers batteritid



HX7408/02

Skånsom rengjøring selv for sensitive tenner og tannkjøtt

Fjerner opptil 20 ganger så mye plakk*

Philips Sonicare 6100 har neste generasjons Sonicare-teknologi, en egen Sensitive-modus, tre børstehoder for plakk, følsomhet og bleking, i tillegg til lav intensitet og en trykksensor for pasienter som pusser for hardt.

Skånsom, førsteklasses pussing

- Komplett pleie for en sunnere munn

Tannpussen blir enkel

- Du vil alltid vite når det er på tide med et nytt børstehode
- Tilpass pussingen med 6 børsteinnstillinger
- Beskytt tannkjøttet med synlig trykksensor

Uovertruffen rengjøring

- Neste generasjons Sonicare-teknologi

Utformet etter livsstilen din

- Lasersveiset for styrke og holdbarhet
- Optimaliser tannpussen med SmarTimer og BrushPacer
- Opptil 3 ukers børsting på én full opplading

Høydepunkter

A3 alt-i-ett-børstehode +mer



A3 Premium alt-i-ett-børstehode er designet med tanke på pasientene. Med A3-børstehodet kan pasientene oppnå opptil 20 ganger mer plakkfjerning*, opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt** og fjerne opptil 100 % flere flekker***. Også inkludert: Takket være det nye S2 Sensitive-børstehodet laget av Sonicare mykeste børstehår, kan pasientene oppnå en skånsom rengjøring som fjerner opptil 10 ganger mer plakk i områder som er vanskelige å nå*.

Neste generasjons Sonicare-teknologi



Få en herlig pusseopplevelse og opplev et nytt nivå på tannpleien med neste generasjons Sonicare-teknologi. Mens du børster, tilpasser det innovative magnetsystemet kraften som tannbørsten bruker ved hver tannpuss, noe som gir optimal ytelse med 62 000 børstebevegelser per minutt, selv i vanskelig tilgjengelige områder. Samtidig bidrar de dynamiske, jevne bevegelsene til å fjerne plakk, slik at du får en komplett rengjøring ved hver tannpuss.


6 børsteinnstillinger



Philips Sonicare 6100 er utformet for følsomme tenner og tannkjøtt, og lar pasienten velge mellom 2 børstemoduser. Sensitive-modus gir

skånsom, grundig rengjøring, mens Clean-modus fokuserer på fjerning av plakk for førsteklasses rengjøring. For persontilpasset pussing kan pasienten kombinere modusene med ett av tre intensitetsnivåer, fra høy til lav, for å oppnå en tannpuss som passer for dem.

Lysring for trykksensor

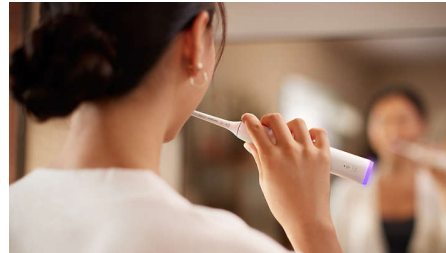


Pasienter merker kanskje ikke at de pusser for hardt, men denne tannbørsten vil gjøre det. Den smarte optiske sensoren registrerer overdreven børstetrykk med nøyaktighet, og blinker lilla mens den reduserer vibrasjonene. Pasienter får vite når de trenger å tilpasse pussingen, slik at tannkjøttet beskyttes.

Byttepåminnelse med BrushSync




Å bytte børstehodet regelmessig er en viktig del av å opprettholde en god tannhelse. Med BrushSync-teknologien er det enkelt for pasienter å sikre best mulig ytelse på børstehodet. Ved å spore bruksfrekvens og pusseintensitet minner den innovative teknologien pasienten på når det er på tide med et nytt børstehode.

2-minutters tidtaking og børsterytme

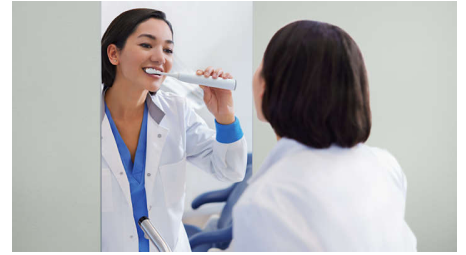

To minutter er alt pasientene trenger for en komplett pussing, og SmarTimer gir dem beskjed når tiden er ute. For å få en jevn rengjøring i hele munnen deler BrushPacer økten inn i segmenter og gir pasientene tegn med et lite opphold i vibrasjonene når det er på tide å gå videre i pussingen. Dette hjelper til, slik at pasientene oppnår en jevn pussing hver gang de børster tennene.

Utformet for å vare

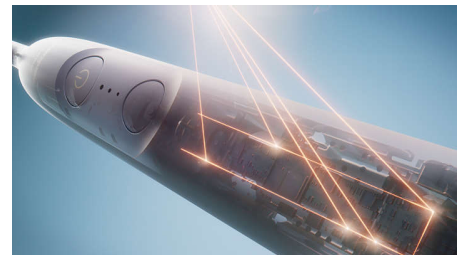

Vi har redesignet Philips Sonicare-tannbørstene fra innsiden og ut for å være sterke, lette og holdbare. Takket være vår avanserte lasersveiseprosess er tannbørstene våre designet for å pusse med pasienten i mange år fremover.

Opptil 3 uker mellom hver ladeøkt



Denne tannbørsten bruker et batteri med høy ytelse som er utviklet for å forbedre pusseopplevelsen. Etter én ladeøkt har pasientene opptil tre uker med regelmessig pussing før de trenger å lade på nytt.

6100

Oppladbar sonisk tannbørste

HX7408/02

Spesifikasjoner

Intensitetsnivåer

Høy: For å bedre pussingen

Middels stor: For hverdagspussing

Lav: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Drift

Spenning: 100–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 21 dager

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets levetid

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Tidsbryter: SmarTimer og BrushPacer for en komplett og grundig pussing

USB-A-lading: Strømadapter følger ikke med

Deler som medfølger

Håndtak: 1 6100 oppladbar tannbørste

Lader: 1

Børstehode: 1 A3 Premium Alt-i-ett, 1 S2

Sensitive, 1 W2 Optimal White

Rengjøring

Plakkfjerning: Opptil tjue ganger mer effektiv*

Hastighet: 62 000 børstebevegelser/min

For sunt tannkjøtt: Opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt***

Tannbleking: Opptil 100 % mindre misfarging**

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Sensitive: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Teknologi med Smart-sensor

Tilbakemelding om pussetrykk: Lysringen lyser i lilla, Redusert vibrasjon og pulserende lyd

Påminnelssymbol: BrushSync gir deg beskjed når det er på tide å bytte børstehode



* sammenlignet med en manuell tannbørste.

** gjelder Clean-modus sammenlignet med en manuell tannbørste.

*** sammenlignet med en manuell tannbørste. I in vitro-undersøkelse, faktiske resultater kan variere.