

PHILIPS



IPL hårfjerningsenhet
med SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehør: kropp,
ansikt, bikini, armhuler

Eksklusiv AI-drevne app-
funksjoner

Både trådløs bruk og bruk med
ledning



BRI951/01

Enkel, trådløs og personlig tilpasset behandling med SenseIQ

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Få problemfri og personlig tilpasset behandling med den trådløse versjonen av vår raskeste Lumea IPL-enhet. SenseIQ-teknologi med smart tilbehør og veiledning i Lumea IPL-appen gir deg langvarig glatt hud.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke
- For enkelhets skyld med ledning- og batteridrevne alternativer
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsgre
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenseIQ
- Smart kroppshåranalyse med SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

IPL hårfjerningsenhet med SenselQ

BRI951/01

Høydepunkter

2 ganger i måneden for raske resultater




Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.

SenselQ-teknologi



Lumea 9900-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Intelligent tilbehør tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

For enkelhets skyld med ledning- og batteridrevne alternativer

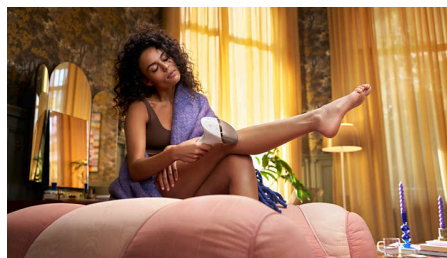

Philips Lumea er utformet for å være praktisk og enkel å bruke. Bruk enheten med ledning for rask behandling på store kroppsområder, som bena, eller bruk batterimodusen for å behandle områder som er vanskelige å nå, med presisjon.

Fire smarte tilbehørsdeler




Spesialdesignet tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for de ulike kroppsområdene når det er koblet til. Ansikt: flatt design og lite vindu med UV-filer. Kropp: kurvet innover med stort vindu. Bikini og armhule: kurvet utover for vanskelig tilgjengelige områder.

Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Eksklusive SkinAI-funksjoner

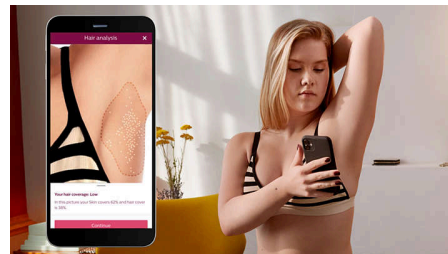

Den gratis veilednings-appen vår gir steg-for-steg veiledning, nå med eksklusiv SkinAI-teknologi for å analysere kroppshåret ditt og spore hårreduksjon.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

Tilbehør for bikinibehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for følsomt bikiniområde

Tilbehør for underarmbehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for armhuler

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktet blinking

Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen

SmartSkin-probe: Rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Bruk med kabel / trådløs bruk: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Tekniske spesifikasjoner

Batteritype: Oppladbart batteri

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Luksusetui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Legg: 8,5 min

Underarmer: 2,5 min

Bikiniinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min



* Median for hårreduksjon etter 12 behandlinger: 86 % på leggene, 70 % på bikini, 67 % på armhulene

* * Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikiniinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti