

PHILIPS



IPL-hårfjerningsenhed
med SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-sensor

3 intelligente tilbehørsdele: krop,
ansigt, præcision

Eksklusive AI-drevne app-
funktioner

Til brug med eller uden ledning



BRI953/02

Vores smarteste IPL med eksklusive SkinAI-funktioner

Nyd 18 måneder med glat og hårfri hud*

Opdag vores smarteste IPL-løsning nogensinde til blød hud rigtig længe. Vores hurtigste, trådløse Lumea IPL-enhed med SenseIQ-teknologi fås nu med eksklusive SkinAI-funktioner i Lumea IPL-appen til at analysere din hud og spore dine fremskridt.

Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater
- Praktisk takket være både ledning og ledningsfri muligheder
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv

Komplet løsning til ansigt og krop

- Komplet løsning til ansigt og krop med 3 smarte tilbehørsdele
- Velegnet til de fleste hudfarver og hårfarver

Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Skånsomt og behageligt med SenseIQ
- Smart kropshårsanalyse med SkinAI


Lumea IPL 9900 Series

IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

BRI953/02

Vigtigste nyheder

2x om måneden for hurtige resultater

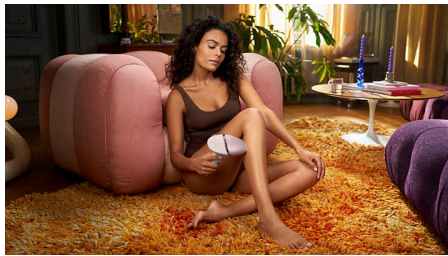


Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 8,5 minut at dække begge underben.

SenseIQ-teknologi



Lumea 9900-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente tilbehørsdele tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.

Praktisk takket være både ledning og ledningsfri muligheder

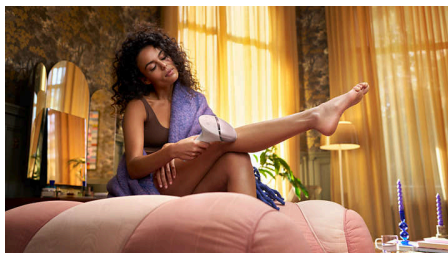

Philips Lumea er designet til at være praktisk og nem at bruge. Brug enheden med ledning til en hurtig behandling på store kropsområder, f.eks.

dine ben, eller brug den trådløse batteritilstand til at behandle svært tilgængelige kropsområder med præcision.

3 smarte tilbehørsdele




Specialdesignede tilbehørsdele passer perfekt til kroppens kurver og udløser de mest effektive programmer for hvert kropsområde, når de er tilsluttet. Ansigt: fladt design og lille vindue med UV-filter. Krop: buer indad med et stort vindue. Præcision: buer udad til områder, der er svære at komme til.

Udviklet i samarbejde med dermatologer



Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem, effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

Eksklusive SkinAI-funktioner

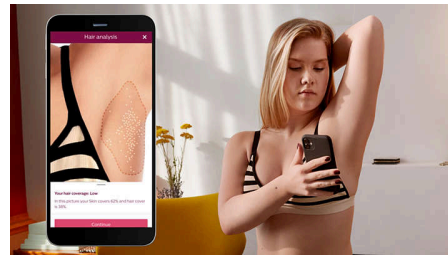

Vores gratis coaching-app giver trinvis vejledning nu med eksklusiv SkinAI-teknologi til at analysere din kropsbehåring og registrere hårreduktion.

Til de fleste hud- og hårtyper



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mørkebrun (I-IV).

Specifikationer

Tekniske specifikationer for tilbehør

Kropsbehandlingstilbehør: Form: Konvekst buet, Vinduesstørrelse: 4,1 cm², Skræddersyet behandling af krop: Ben, arme og mave

Ansigtsbehandlingstilbehør: Form: Flad, Vinduesstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Skræddersyet behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og kæbelinje

Præcisionsbehandlingstilbehør: Form: Konkavt buet, Vinduesstørrelse: 3 cm², Skræddersyet behandling af bikiniområdet og armhulerne

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys
5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgår utilsigtede blink

Hudfarvesensor: Registrerer din hudfarve

SmartSkin-sensor: Den rigtige indstillingsangivelse ved behov

Programtilstand

Slide and Flash: For hurtig anvendelse

Stamp and Flash: Til behandling på små områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Til brug med eller uden ledning

Tekniske specifikationer

Spænding: 100-240 V

Batteritype: Genopladeligt batteri

Højeffektivt lys: Bygget til at holde, 450.000 blink, svarende til 39 års pærelevetid**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti ved produktregistrering inden for 90 dage

Medfølgende dele

Brugervejledning: Brugervejledning

Opbevaring: Luksusetui

Adapter: 19,5 V / 4.000 mA

Anvendelsestid

Underben: 8,5 min

Under armene: 2,5 min.

Bikiniinje: 2 min

Ansigtsområder: 1,5 min.

