

PHILIPS

AVENT



Двойна електрическа
помпа за кърма

Hands-free

Имитира ритъма на пиене на
бебето

Свобода по време на
изцеждане

Лесни за ползване, почистване
и сглобяване

Пълно, безпроблемно
прилягане



SCF532/11

Освободете ръцете си. Освободете времето си. Имитира ритъма на пиене на вашето бебе

Двойната електрическа помпа за кърма Philips Avent за използване със свободни ръце е създадена за ефективна* и удобна употреба. Тя имитира ритъма на вашето бебе, а с мощта, нежността и лекотата си е идеалният ви спътник за изпомпване без ръце.

Свобода на движението, докато изцеждате

- Движете се свободно с ултралеките чашки за събиране на кърма
- Комфорт при носене за максимално движение

Имитира ритъма на пиене на бебето

- Ефективно изцеждане* с ритъм, който имитира този на вашето бебе
- Тихо и мощно изпомпване

Лесна за използване, за почистване и сглобяване

- Проследявайте потока на млякото с напълно прозрачните чашки за събиране
- Лесна за почистване и сглобяване с няколко части
- Персонализирайте сесията си с 24 режима

Пълно, безпроблемно прилягане

- Силиконовите предпазители нежно пасват на гърдите ви
- Гама от размери на предпазители за гърди и приставки за всяка майка

Hands-free

Двойна електрическа помпа за кърма

SCF532/11

Акценти

Имитира ритъма на пиене на бебето



Бebetата знаят как да сучат най-добре! Ето защо нашата електрическа помпа за кърма, която работи сама, имитира техния естествен ритъм на сучене – така че можете да намерите своя собствен ритъм за ефективно* изцеждане и оптимален поток на млякото. Изцеждайки до 85 пъти в минута, електрическата помпа за кърма Philips Avent е 2 пъти по-бърза от повечето други помпи**.

Мощен мотор




Почти безшумният мотор осигурява мощност, която очаквате от традиционна помпа за кърма, но същевременно от компактен и преносим модул. Със своята акумулаторна батерия безжичният задвижващ блок помпа мощно и дискретно навсякъде.

Уникални предпазители SkinSense



Нашите уникални силиконови предпазители за гърди SkinSense са проектирани за максимален комфорт, нежно пасващи на гърдите ви, използвайки естествената топлина на тялото ви. Предпазителите за гърди са направени от силикон, подходящ за хранителни продукти, за ваше спокойствие.

Прозрачни чашки за събиране

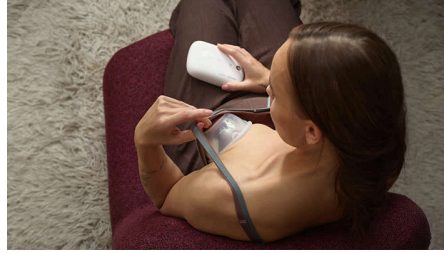

Прозрачните чашки за събиране ви позволяват да следите процеса на изцеждане. Те ви помагат да поставите правилно зърната си за най-добър поток на млякото и визуално да проследявате процеса на изцеждане на кърмата. За уверено напмпване от първата капка до последната.

Ултралека чашка за събиране



Една чаша за събиране на кърма тежи малко над 100 грама, когато е празна – до 3 пъти по-лека от помпа за кърма, която се използва цяла. Чашките стоят удобно в сутиена, без да се забелязват.

Носете я, както ви е удобно




Нашата помпа се доставя с кабел с оплетка за носене и щипка за облекло за носене на задвижващия блок на тялото или прикрепен към колана ви. Поради свободата на носене, която ви позволява помпата, вие контролирате потока на мляко. Използвайте приставката на фунията и регулатора на кабела, за да настроите прецизно прилягането.

Персонализирано изпмпване




Извлечете максимума от всяка сесия с 8 режима за стимулиране на притока на мляко и 16 режима за изцеждането му. Можете да настройвате допълнително, докато помпате, и с автоматично запомнената идеална настройка помпата ще е винаги готова за ползване.

Лесна за почистване и сглобяване

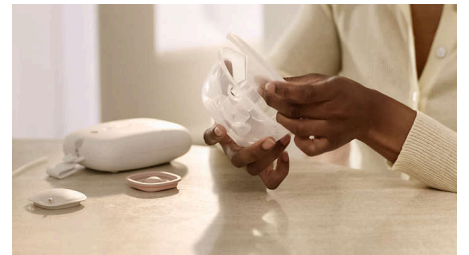

Създадохме нашата помпа и аксесоари да бъдат възможно най-лесни за работа. Само с няколко приставки всяка чаша за събиране лесно се разглобява, почиства (на ръка или в съдомиялна машина), дезинфекцира и сглобява отново.

Намерете правилния размер

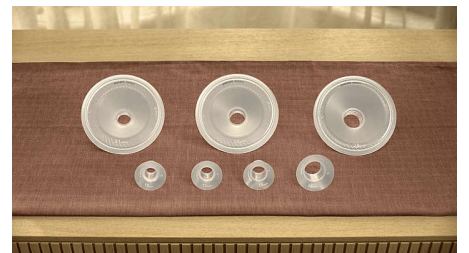

Подкрепяме всяка майка да се чувства най-добре и правилният размер е съществена част от това. Нашата гама от предпазители за гърди и размери на приставки за предпазители е подходяща за 99% от майките. Предлага се за закупуване отделно, можете да се чувствате комфортно, докато се изцеждате.

Спецификации

Захранване

Източник: Акумулаторна батерия/ USB-C (адаптерът не е включен)

Материал

Чашка, предно капаче, капак на предпазителя за гърди: Полипропилен
Предпазител за гърди, мембрана, клапа, приставка: Течен силикон
Силиконова тръба: Силикон

Какво включва

USB-C кабел: 1 бр.
Кабел за носене: 1 бр.
Съединител на фунията: 1 бр.

Задвижващ блок с акумулаторни батерии

(със сменяема щипка): 1 бр.

Чашка за събиране (сглобена): 2 бр.

Силиконови тръби: 2 бр.

Капак (против прах) на предпазителя за гърди: 2 бр.

Предпазител за гърди (21 мм, 24 мм): 2 бр. всяка

Карта за определяне на размер на зърната: 1 бр.

Приставка 19 мм: 2 бр.

Лесна употреба

Използване на помпата за кърма: Лесна за използване, за почистване и сглобяване

Функции

Гъвкавост при движение: Изпомпване без ръце

Настройки за персонализиране: 16 степени на засмукване в режим на изцеждане, 8 степени на засмукване в режим на стимулация

Задвижващ блок: Акумулаторна батерия/USB-C, Пълното зареждане на батерията отнема до 1,5 часа и продължава припл. 5 сесии на изцеждане

Особености на предпазителя за гърди и приставката: Предлагат се няколко размера за най-добро прилягане

