

PHILIPS

AVENT



Единична електрическа
помпа за кърма

Hands-free

Имитира ритъма на пиене на
бебето

Свобода при изцеждане

Лесно ползване, почистване и
сглобяване

Пълно, безпроблемно
прилягане



SCF531/11

Освободете ръцете си. Освободете времето си.

Имитира ритъма на пиене на вашето бебе

Единичната електрическа помпа за кърма Philips Avent за използване със свободни ръце е създадена за ефективна* и удобна употреба. Тя имитира ритъма на вашето бебе, а с мощта, нежността и лекотата си е идеалният ви спътник за изпомпване без ръце.

Свобода на движението, докато изцеждате

- Движете се свободно с ултралеката чашка за събиране на кърма
- Комфорт при носене за максимално движение

Имитира ритъма на пиене на бебето

- Ефективно изцеждане* с ритъм, който имитира този на вашето бебе
- Тихо и мощно изпомпване

Лесна за използване, за почистване и сглобяване

- Проследявайте потока на млякото благодарение на напълно прозрачната чашка за събиране
- Персонализирайте сесията на изцеждане
- Лесна за почистване и сглобяване с няколко части

Пълно, безпроблемно прилягане

- Гама от размери на предпазители за гърди и приставки за всяка майка
- Силиконовите предпазители нежно пасват на гърдите ви

Акценти

Имитира ритъма на пиене на бебето



Бebetата знаят как да сучат най-добре! Ето защо нашата електрическа помпа за кърма, която работи сама, имитира техния естествен ритъм на сучене – така че можете да намерите своя собствен ритъм за ефективно* изцеждане и оптимален поток на млякото. Изцеждайки до 85 пъти в минута, електрическата помпа за кърма Philips Avent е 2 пъти по-бърза от повечето други помпи**.

Мощен мотор




Почти безшумният мотор осигурява мощност, която очаквате от традиционна помпа за кърма, но същевременно от компактен и преносим модул. Със своята акумулаторна батерия безжичният задвижващ блок помпа мощно и дискретно навсякъде.

Уникални предпазители SkinSense



Нашият уникален силиконов предпазител за гърди SkinSense е проектиран за максимален комфорт, нежно пасващ на гърдите ви, използвайки естествената топлина на тялото ви. Предпазителят за гърди е направен от силикон, подходящ за хранителни продукти, за ваше спокойствие.

Прозрачни чашки за събиране

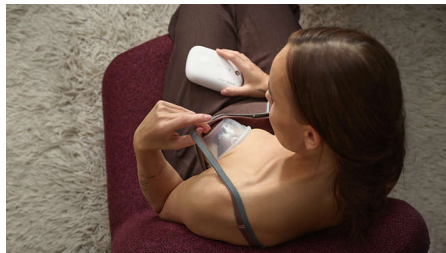

Прозрачната чашка за събиране ви позволява да следите процеса на изцеждане. Тя ви помага да поставите правилно зърното си за най-добър поток на млякото и визуално да проследявате процеса на изцеждане на кърмата. За уверено напompване от първата капка до последната.

Ултралека чашка за събиране




Една чаша за събиране на кърма тежи малко над 100 грама, когато е празна – до 3 пъти по-лека от помпа за кърма, която се използва цяла. Чашката стои удобно в сутинена, без да се забелязва.

Носете я, както ви е удобно



Нашата помпа се доставя с кабел с оплетка за носене и щипка за облекло за носене на задвижващия блок на тялото или прикрепен към колана ви. Поради свободата на носене, която ви позволява помпата, вие контролирате потока на мляко. Използвайте приставката на фунията и регулатора на кабела, за да настроите прецизно прилягането.

Персонализирано изпompване

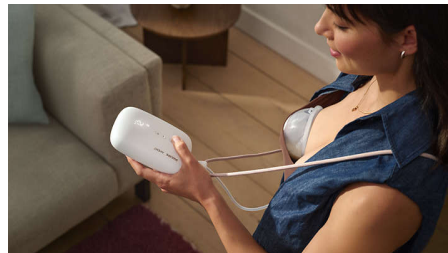

Извлечете максимума от всяка сесия с 8 степени на стимулиране на притока на мляко и 16 степени на изцеждането му. Можете да настройвате допълнително, докато помпате, и с автоматично запомнената идеална настройка помпата ще е винаги готова за ползване.

Лесна за почистване и сглобяване



Създадохме нашата помпа и аксесоари да бъдат възможно най-лесни за работа. Само с няколко приставки всяка чаша за събиране лесно се разглобява, почиства (на ръка или в съдомиялна машина), дезинфекцира и сглобява отново.

Намерете правилния размер



Подкрепяме всяка майка да се чувства най-добре и правилният размер е съществена част от това. Нашата гама от предпазители за гърди и размери на приставки за предпазители е подходяща за 99% от майките. Предлага се за закупуване отделно, можете да се чувствате комфортно, докато се изцеждате.

Спецификации

Захранване

Източник: Акумулаторна батерия/ USB-C (адаптерът не е включен)

Материал

Чашка, предно капаче, капак на предпазителя за гърди: Полипропилен
Предпазител за гърди, мембрана, клапа, приставка: Течен силикон
Силиконова тръба: Силикон

Какво включва

USB-C кабел: 1 бр.
Кабел за носене: 1 бр.
Задвижващ блок с акумулаторни батерии

(със сменяема щипка): 1 бр.

Чашка за събиране (сглобена): 1 бр.

Силиконови тръби: 1 бр.

Капак (против прах) на предпазителя за гърди: 1 бр.

Предпазител за гърди (21 мм, 24 мм): 1 бр. всяка

Карта за определяне на размер на зърната: 1 бр.

Приставка 19 мм: 1 бр.

Лесна употреба

Използване на помпата за кърма: Лесна за използване, за почистване и сглобяване

Функции

Гъвкавост при движение: Изпомпване без ръце

Настройки за персонализиране: 16 степени на засмукване в режим на изцеждане, 8

степени на засмукване в режим на стимулация
Задвижващ блок: Акумулаторна батерия/USB-C, Пълното зареждане на батерията отнема до 1,5 часа и продължава припл. 5 сесии на изцеждане

Особености на предпазителя за гърди и приставката: Предлагат се няколко размера за най-добро прилягане

