

PHILIPS

AVENT



Dvojitá elektrická
odsávačka mlieka

Hands-free

Tichý motor

Výkon na úrovni nemocničných
odsávačiek

Lahké zberné nádoby

Mäkká prispôsobivá silikónová
vložka



SCF532/11

Majte voľné ruky. Majte viac času pre seba.

Napodobňuje rytmus sania dieťaťa

Jednoduchá elektrická hands-free odsávačka materského mlieka Philips Avent je navrhnutá pre efektívne a pohodlné odsávanie. Napodobňuje prirodzený rytmus sania dieťaťa, a vďaka vysokému výkonu, jemnému silikónovému materiálu a ľahkej konštrukcii umožňuje odsávanie bez nutnosti drženia.

Fyzická sloboda pri odsávaní

- Pohybujte sa voľne vďaka mimoriadne ľahkým pohárikom na zachytávanie mlieka
- Pohodlné nosenie zaisťuje maximálny pohyb

Napodobňuje rytmus pitia dieťaťa

- Odsávajte efektívne* s rytmom, ktorý napodobňuje rytmus vášho dieťaťa
- Tiché odsávanie s výkonom porovnateľným s nemocničnými odsávačkami

Lahké použitie, jednoduché čistenie a montáž

- Sledujte tok mlieka vďaka úplne priehľadným pohárikom na zachytávanie mlieka
- Jednoduché čistenie a montáž s malým počtom dielov
- Prispôbte si odsávanie pomocou 24 režimov

Bezproblémové prispôbenie pre všetky mamičky

- Rad prsných nadstavcov a veľkostí vložiek do prsných nadstavcov pre každú mamičku
- Silikónové nadstavce sa tvarom prispôbujú prsníkom

Hlavné prvky

Napodobňuje rytmus sania dieťaťa



Bábätká vedianajlepšie, ako piť! To je dôvod, prečo naša elektrická odsávačka mlieka bez pomoci rúk napodobňuje ich prirodzený rytmus pitia – takže si môžete nájsť svoj vlastný rytmus pre efektívne* odsávanie a optimálny výdaj mlieka. Odsávačka mlieka Philips Avent bez pomoci rúk, ktorá odsáva až 85-krát za minútu, je 2-krát rýchlejšia ako väčšina ostatných odsávačiek**.

Tiché odsávanie s výkonom ako nemocničné odsávačky




Tichá motorová jednotka vám poskytne výkon porovnateľný s nemocničnými odsávačkami, ktorý očakávate od tradičnej odsávačky materského mlieka. V tomto prípade však ide o kompaktné a prenosné prevedenie. Vďaka nabíjacej batérii môžete odsávať výkonne a diskretné kedykoľvek a kdekoľvek.

Jedinečné prsné nadstavce SkinSense



Naše jedinečné silikónové prsné vložky SkinSense sú navrhnuté na zistenie maximálneho pohodlia a jemne prispôbujú svoj tvar vašim prsiam využitím prirodzeného tepla vášho tela. Prsné nadstavce sú vyrobené z potravinárskeho silikónu a zaisťujú dokonalejší pocit istoty.

Priehľadný pohárik na zachytávanie mlieka

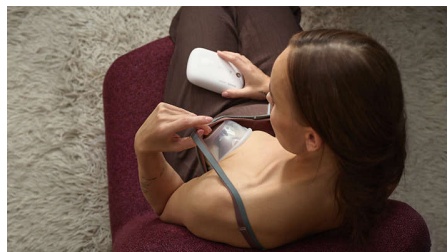

Priehľadné poháriky na zachytávanie mlieka poskytujú voľný pohľad dovnútra. Pomôžu vám správne umiestniť bradavky, aby ste dosiahli čo najlepšie odsávanie, a vizuálne sledovať objem materského mlieka. Tým sa zaistí spoľahlivé odsávanie od prvej kvapky po poslednú.

Mimoriadne ľahký pohárik na zachytávanie mlieka



Jeden prázdny pohárik na zachytávanie mlieka váži len trochu viac ako 100 gramov – až 3x ľahší ako nositeľná odsávačka mlieka. Poháriky pohodlne sedia v podprsenke a sotva zbadáte, že tam sú.

Pohodlie pri nosení pre maximálnu voľnosť pohybu



Naša hands-free odsávačka je navrhnutá tak, aby sa prispôbila vášmu životnému štýlu. Vďaka praktickému pletenému popruhu a sponke na oblečenie môžete motorovú jednotku nosiť krížom cez telo alebo pripevnenú k opasku. Nastaviteľná dĺžka popruhu vám umožní upraviť si odsávačku presne podľa svojich potrieb. Udržujte si vlastný rytmus, buďte v pohybe a majte všetko pod kontrolou – kedykoľvek, kedykoľvek.


Hands-free

Dvojité elektrická odsávačka mlieka

SCF532/11

Hlavné prvky

Prispôsobené odsávanie

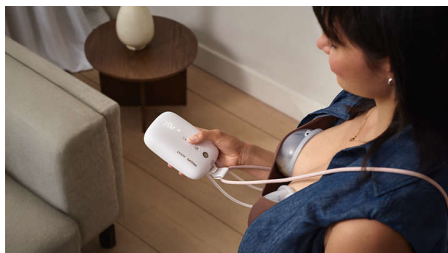


Vyťažte z každého odsávania maximum vďaka 8 režimom stimulácie toku mlieka a 16 režimom odsávania. Počas odsávania ich môžete jemne doladovať a vďaka automatickému uloženiu ideálneho nastavenia do pamäte je odsávačka vždy pripravená na použitie.

Jednoduché na čistenie a zostavenie



Našu odsávačku a jej príslušenstvo sme navrhli tak, aby bolo ich používanie čo najjednoduchšie. Len s niekoľkými spojovacími dielmi sa dá každý pohárik na zachytávanie mlieka ľahko rozobrať, očistiť (ručne alebo v umývačke riadu), dezinfikovať a znova zložiť.

Nájdite svoju ideálnu veľkosť behom niekoľkých sekúnd

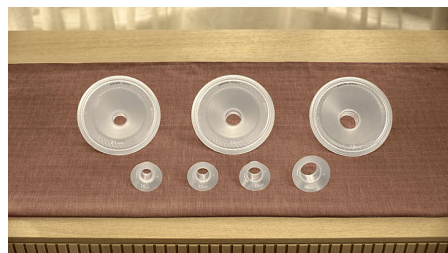

Pomocou karty na meranie veľkosti bradaviek ľahko zistíte ideálnu veľkosť silikónových prsných vložiek a nástavcov na bradavky, ak je to potrebné. Meranie trvá len chvíľku a vďaka širokému rozsahu veľkostí, ktoré vyhovujú 99 % mamičiek, máte o pohodlné a bezpečné nosenie postarané.

Technické údaje

Príkon

Zdroj: Nabíjateľná batéria/USB-C (adaptér nie je súčasťou balenia)

Materiál

Pohárik, predný kryt, kryt prsného nastavca:

Polypropylén

Prsný nastavec, membrána, ventil, vložka:

Tekutý silikón

Silikónová hadička: Silikónový

Čo je súčasťou balenia

Kábel USB-C: 1 ks

Pás na prenášanie: 1 ks

Spojka trubičky: 1 ks

Nabíjateľná pohonná jednotka (s odnímateľnou sponou): 1 ks

Pohárik na zachytávanie mlieka (zložený): 2 ks

Silikónové hadičky: 2 ks

Kryt prsného nastavca (protiprachový): 2 ks

Prsný nastavec (21 mm, 24 mm): 2 ks každý

Karta veľkosti bradaviek: 1 ks

19 mm vložka: 2 ks

Jednoduché použitie

Použitie odsávačky mlieka: Lhké použitie, jednoduché čistenie a montáž

Funkcie

Flexibilita pri pohybe: Odsávanie bez použitia rúk

Nastavenia prispôsobenia: 16 úrovní odsávania v režime odsávania, 8 úrovní odsávania v režime stimulácie

Pohonná jednotka: Nabíjateľná batéria/USB-C, Plné nabitie batérie trvá až 1,5 hodiny a vydrží cca. 5 odsávaní

Špecifikácie prsného nastavca a vložky:

K dispozícii je niekoľko veľkostí pre ideálne prispôsobenie

